ACTIVESHOP®

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Azzurro Special 152 lepotni stol




Uvoznik:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PREDEN UPORABITE IZDELEK, PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO

Ta priročnik vsebuje podrobne informacije o delovanju in vzdrževanju naprave. Pred uporabo naprave preberite priloženi priročnik. Napravo uporabljajte v skladu z navodili. Shranite ta priročnik in poskrbite, da se z njim seznanijo vse osebe, ki lahko uporabljajo napravo.

Tehnični podatki:

Dimenzije: 119 x 60 x 53 cm
Teža: 14 kg
Največja obremenitev: 150 kg
Nastavitev višine: 55–75 cm
Nastavitev naslona: 0–5 cm
Nastavitev kota: 10°

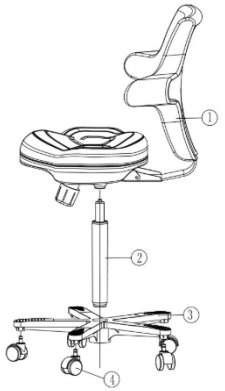

Konstrukcija:

1. Naslonjalo in sedež stola
2. Plinasta vzmet
3. Podnožje stola
4. Kolesca

Sestava:

1. Pri nekaterih modelih naslonjalo in sedež stola nista sestavljena skupaj. V tem primeru naslonjalo potisnite v nosilec sedeža in ga pritrdite s 3 priloženimi vijaki.
2. Kolesa pritrdite na podnožje tako, da jih vtisnete.
3. Debelejšo stran aktuatorja vstavite v podnožje.
4. Sedež namestite na valj.


Opomba: Pri nekaterih modelih je valj zaščiten s plastičnim pokrovom.
(na mestu povezave s sedežem). Pred pritrditvijo sedeža preverite, ali je plastični pokrov odstranjen. V nasprotnem primeru po montaži ne bo mogoče spremeniti navpičnega položaja.

Delovanje:

Vertikalna nastavitev:


Za spust sedeža pritisnite ročico, označeno na sliki, medtem ko sedite na sedežu ali ga kako drugače obtežite.

Za dvig sedeža pritisnite ročico, označeno na sliki, ne da bi pritiskali na sedež.

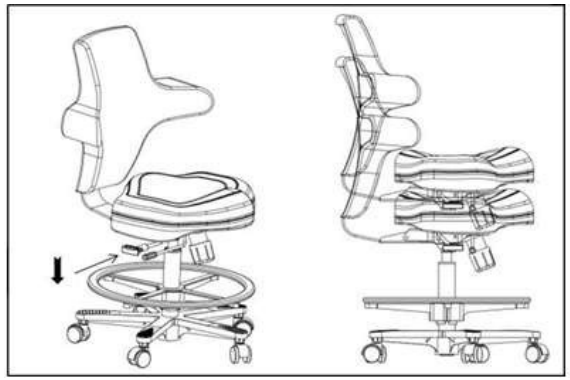


Nastavitev naklona naslona:

Potegnite konec ročice navzven, da odklenete nastavitev naklona. Pritisnite naslonjalo in ga nastavite v želeni položaj.
Nato potisnite konico ročice navznoter, da zaklenete položaj naslona.
Upoštevajte, da je zaradi vrste uporabljenega mehanizma za zaklepanje mehanizma za zaklepanje, da bi naslonjalo približali sedežu, ga morate najprej potisniti v nasprotno smer (kot je označeno s puščico v ilustraciji).

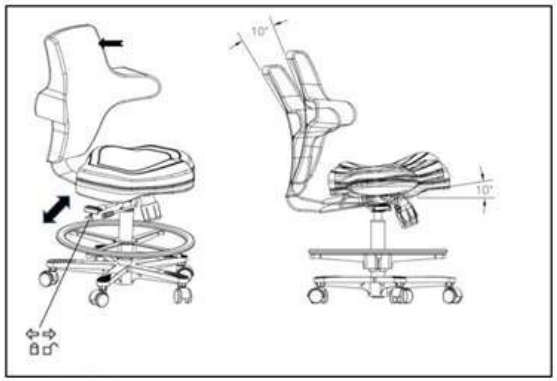

Vodoravna nastavitev sedeža:

Za premikanje sedeža naprej ali nazaj, dvignite označeno v in nato prestavite sedež v želeni položaj. Ko sprostite ročico, sedež ostane v izbranem položaju.

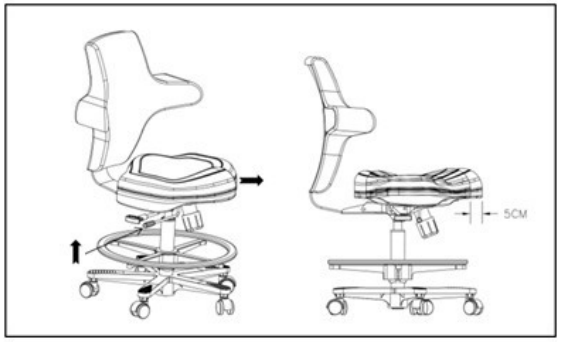

Priporočila:

1. Ne presegajte priporočene nosilnosti stola, saj lahko preseganje priporočene teže povzroči trajne poškodbe (maks. 150 kg).
2. Za čiščenje stola ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo jedka sredstva in barvila, ter oljnih čistilnih sredstev.
3. Neprimerna čistila lahko povzročijo poškodbe materiala, korozijo ali druge pojave.
4. Sedež redno čistite, da se umazanija ne vtisne trajno. Če se oblazinjenje umaže, je najvarneje uporabiti mlačno vodo in milo.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (–) 20 °C in (+) 50 °C, izključno v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo, ki ne presega 75 %. Območje delovne temperature: (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med shranjevanjem in prevozom naprave ne mečite, ne puščajte padati, ne izpostavljajte mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Napravo smejo uporabljati le usposobljeni kozmetični delavci, da se med zdravljenjem izognejo neželenim učinkom.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisiranja in popravila mora opravljati izključno pooblaščeni servisni tehnik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v bližini tekočin, na vlažnih površinah ali z mokrimi rokami, da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center, ki ga zagotavlja ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
   a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) naprava je bila prevrnjena ali je poškodovan njen ohišje.
5. Na kable ne polagajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnostnih razlogov po vsaki uporabi naprave izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V odprtino v napravi ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino vstopi tuj predmet, izključite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca. 8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajanje mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da naprava ne bo delovala pravilno, se poškoduje ali celo pregori.

OPOMBA:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se za preprečitev nevarnosti obrnite na pooblaščeni servisni center.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave, tako da razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena za uporabo otrok. Otrokom ni dovoljeno igrati se z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o njeni uporabi.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Rabljene električne naprave, oprema in embalaža morajo biti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi odneseni v centre za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila glede odlaganje te vrste opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba rabljeno električno opremo zbrati ločeno in jo nato odnesti na zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo. Stare naprave na koncu svoje življenjske dobe vsebujejo dragocene reciklirane sestavne dele, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba odnesti na ustrezna zbirna mesta ali pa jih poslati podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.