ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Sillon Classic se 4 motory a kolébkou Model: C501A



Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

***PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ*.**


Tento návod obsahuje podrobné informace o provozu a údržbě přístroje. Před použitím jednotky si přečtěte přiložený návod. Přístroj používejte tak, jak je popsáno. Tento návod si uschovejte a zajistěte, aby se s ním seznámily všechny osoby, které mohou spotřebič používat.

Elektrické kosmetické křeslo Sillon je profesionální zařízení, které je ideální pro každý kosmetický salon. Je ideální pro masáže, kosmetické a fyzioterapeutické procedury. Křeslo bylo navrženo tak, aby zajistilo naprosté pohodlí při ležení na něm během ošetření. Křeslo se skládá ze čtyř částí a odnímatelného polštáře. Na obou stranách křesla jsou úchyty, na které lze zavěsit dálkové ovládání, aby bylo vždy po ruce.

Nosnost výrobku: 150 kg


Maximální nosnost těla křesla je 150 kg. Nezvedejte větší váhu, než je uvedená hmotnost, kterou křeslo unese.

Neskákejte po opěradle a nevyvíjejte velký tlak na područky, aby nedošlo k poškození konstrukce výrobku.

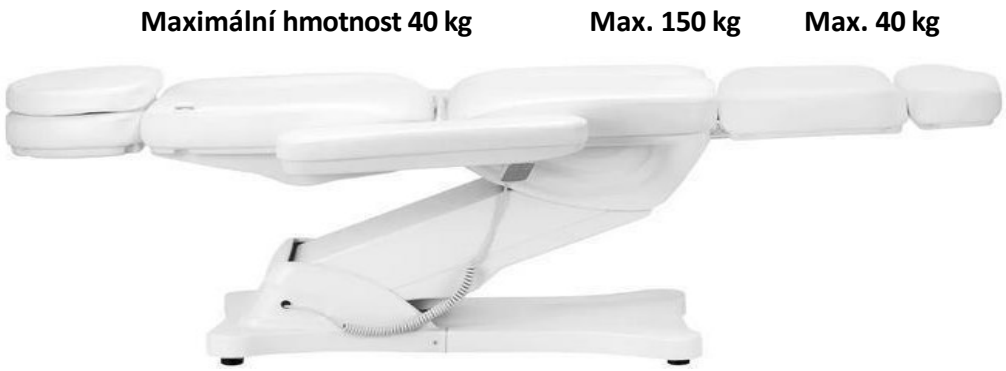

Poznámka

K balení se používá karton a vnější krabice s celkem 10 vrstvami papíru, které zajišťují ochranu vašich výrobků. Doporučujeme ponechat si původní obal pro budoucí použití, zejména pro případ vrácení v záruční době. Z bezpečnostních důvodů jsou ke zvednutí židle z kartonu potřeba dvě osoby. Při zvedání se postavte na obě strany opěrky hlavy a opěrky nohou židle. Nezapomeňte, že židli lze zvedat pouze z polohy opěrky hlavy a podnožky, nikoli z obou stran područek.

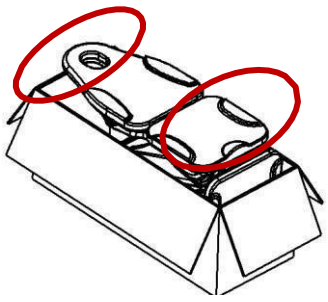

Před použitím židle zkontrolujte, zda je obal neporušený a nebyl poškozen při přepravě. V případě jakéhokoli problému informujte přepravní společnost nebo poprodejní personál do 2 dnů od obdržení jednotky. Ujistěte se, že veškeré příslušenství je v době dodání kompletní. Pokud zjistíte, že příslušenství v době dodání chybí, kontaktujte včas poprodejní personál.


Elektrické kosmetické křeslo musí být používáno v uzavřené, suché místnosti. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi+ 10° a -40° a relativní vlhkost mezi 30 % a 75 %. Pokud bylo elektrické kosmetické křeslo vystaveno teplotám pod 0°, počkejte před použitím alespoň 5 hodin, aby měl přístroj čas dosáhnout pokojové teploty.

Před použitím elektrického kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte elektrické kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.


Tip! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti elektrického kosmetického křesla. Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte ze zásuvky a nenechávejte jej bez dozoru. Odpojte také napájecí kabel.

Rozměry přístroje:

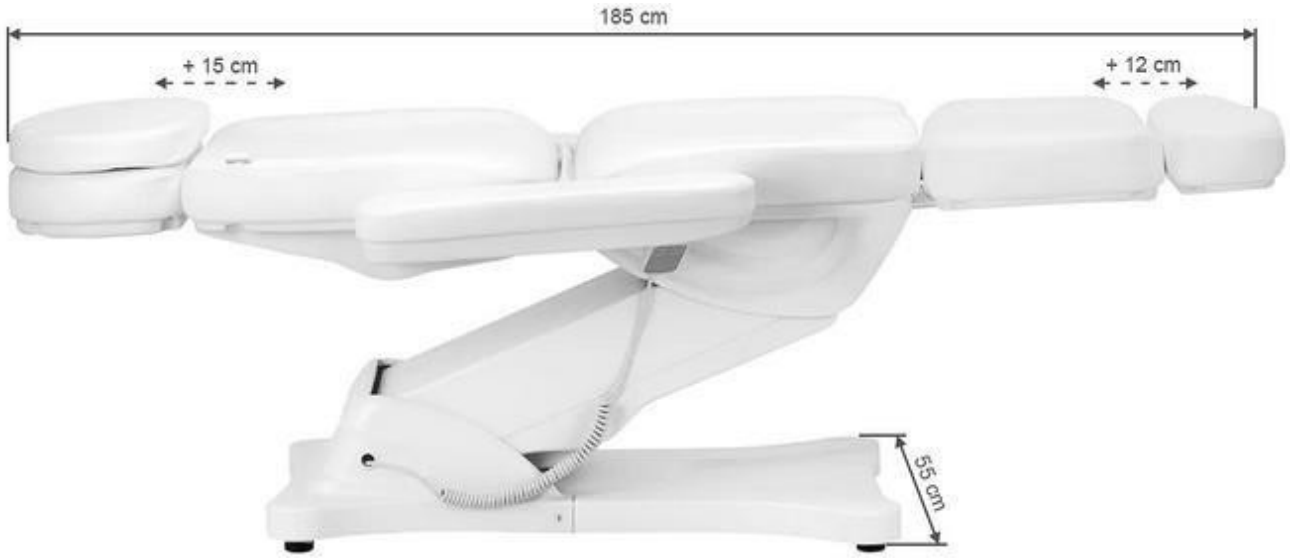



Konstrukce spotřebiče:

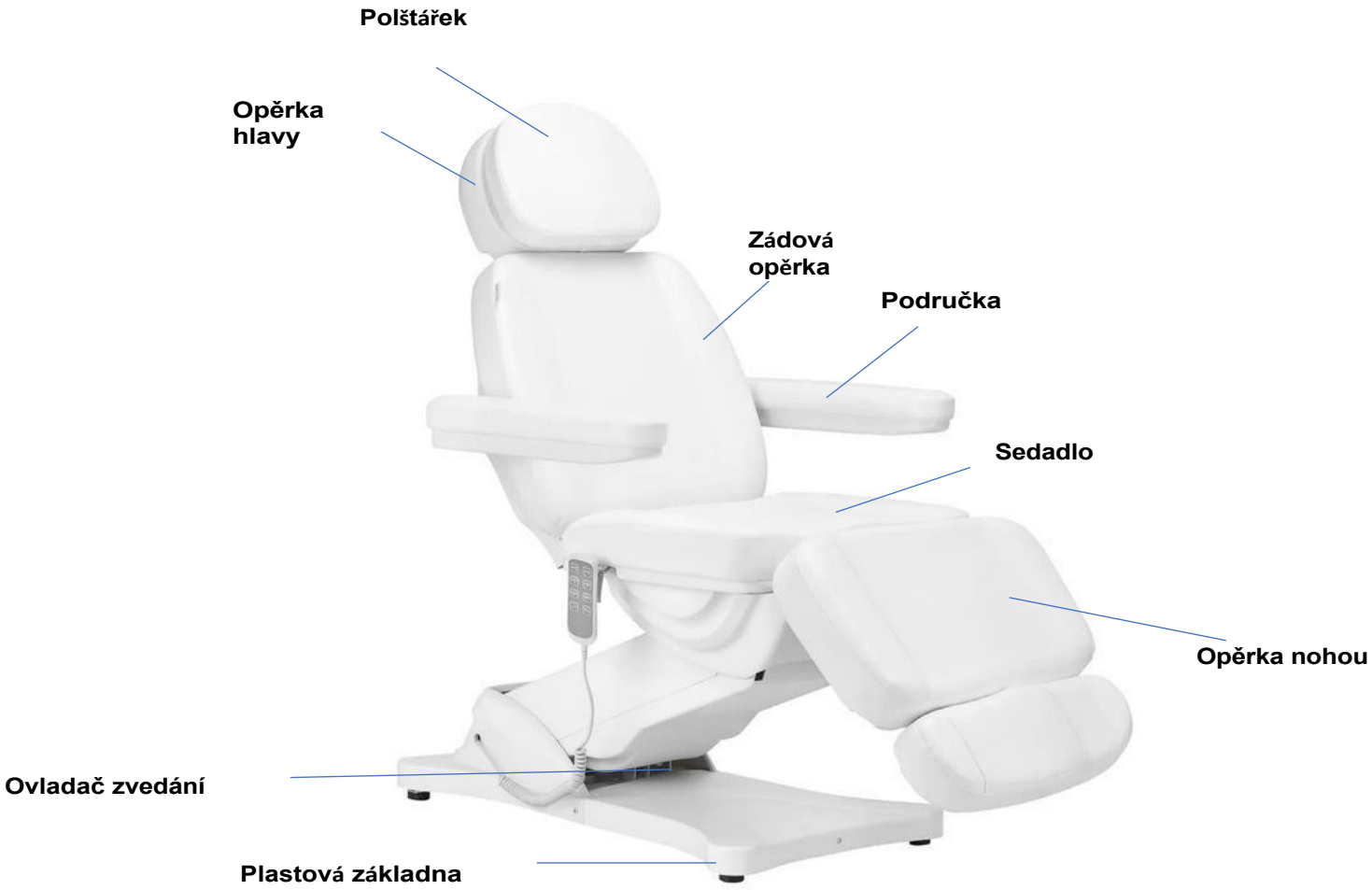

Upozornění

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou a nohou.
3. Elektrické gynekologické vyšetřovací křeslo nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.
4. Nezvedejte větší váhu, než jakou křeslo unese.
5. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Upozornění

1. Z bezpečnostních důvodů připojujte napájecí kabel vždy do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel nepřivazujte k přístroji. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Zajistěte, aby bylo možné napájecí kabel v případě nouze snadno odpojit.
3. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
6. Pod křeslo neumisťujte žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor, aby bylo možné křeslo volně skládat a rozkládat.
8. Ujistěte se, že v okolí sedadla nejsou žádné ostré nebo nebezpečné předměty, které by mohly přístroj poškodit.
9. Zařízení sami neupravujte. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Používání zařízení:

1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110V~240V.

Způsob instalace područky: Křeslo se instaluje na područku:

Pro instalaci područek na židli musí být židle ve vodorovné poloze. Zasuňte loketní opěrku do otvoru umístěného na boku opěradla. Loketní opěrka by měla být pevně připevněna. Otočte ji doprava nebo doleva, aby šla správně nasadit. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou.

Loketní opěrka je kolmá k zemi (bez ohledu na úhel sedadla). Lze ji otočit o 180°.



2. Funkce ručního ovládání (výška zvednutí: lůžko je 58~ 82 cm od země).






3. Funkce ručního ovládání (úhel zdvihu zad 0-80°, úhel zdvihu nohou 0-90°)





4. Funkce zatahování opěrky nohou (opěrka nohou, délka: 0~ 12 cm)

0~ 12cm

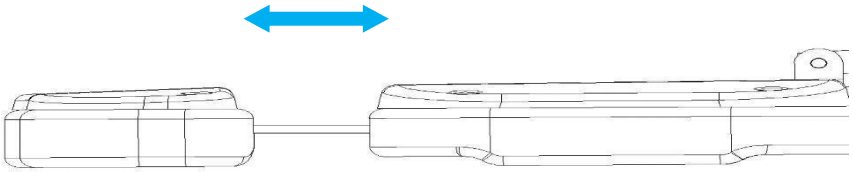

5. Funkce kolébky (sedák židle lze naklonit - tzv. kolébka. Když se opěradlo sklopí a opěrka nohou zvedne, vznikne rovná plocha.



G



H

H



G

Čištění a dezinfekce spotřebiče:

- Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.
- Chcete-li udržet povrch židle v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů použijte malý

kartáč. K čištění přístroje nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté přístroj vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe bude fungovat čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti, nevystavujte přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny. **IV Povrch židle**
- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození spotřebiče, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. Ovládací skříňka a její kabeláž
4. Je příslušenství připevněno
5. Běžná funkce uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Řešení problémů

Problém	**Způsoby řešení**
Ruční ovládání nereaguje	Zkontrolujte, zda rozhraní připojující linku ručního ovládání není uvolněné (Zkontrolujte, zda není problém s deskou plošných spojů), nezapomeňte označit původní polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Přepněte polohu zástrčky motoru

Chcete-li vyměnit ovládací skříňku a objednat další náhradní díly, kontaktujte servisní oddělení, před kontaktováním popište problém:

1. Model
2. Datum nákupu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:

(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného provozu spotřebiče jeho poškození nebo dokonce popálení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Odpadní elektrická a elektronická zařízení by měla být sbírána odděleně a předávána do sběrných míst pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.