ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sillon Classic 4 motorischer elektrischer Kosmetikstuhl mit Wiege

Modell: C501A



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

***BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN, LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG*.**


Diese Anleitung enthält ausführliche Informationen über den Betrieb und die Wartung des Geräts. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie die beiliegende Anleitung. Verwenden Sie das Gerät wie beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung auf und sorgen Sie dafür, dass alle Personen, die das Gerät benutzen könnten, mit ihr vertraut sind.

Der elektrische Kosmetikstuhl Sillon ist ein professionelles Gerät, das sich perfekt für jeden Schönheitssalon eignet. Er ist ideal für Massagen, kosmetische und auch physiotherapeutische Behandlungen. Der Sessel wurde so konzipiert, dass man während der Behandlung bequem darauf liegen kann. Der Sessel besteht aus vier Teilen und einem abnehmbaren Kissen. An beiden Seiten des Sessels befinden sich Griffe, an denen die Fernbedienung aufgehängt werden kann, so dass sie immer griffbereit ist.

Belastbarkeit des Produkts: 150 kg


Die maximale Tragfähigkeit des Sitzkörpers beträgt 150 kg. Heben Sie nicht mehr als das angegebene Gewicht, das der Sitz tragen kann.

Springen Sie nicht auf die Rückenlehne und üben Sie keinen starken Druck auf die Armlehnen aus, um die Struktur des Produkts nicht zu beschädigen.

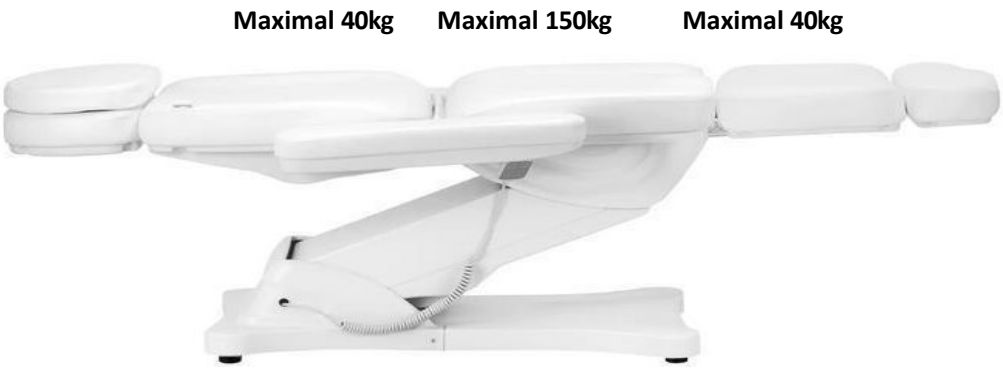

Hinweis

Für die Verpackung werden Pappe und Umkartons mit insgesamt 10 Papierschichten verwendet, um den Schutz Ihrer Produkte zu gewährleisten. Wir empfehlen, die Originalverpackung für eine spätere Verwendung aufzubewahren, insbesondere für Rücksendungen während der Garantiezeit. Aus Sicherheitsgründen sind zwei Personen erforderlich, um den Stuhl aus dem Karton zu heben. Stellen Sie sich beim Anheben auf beide Seiten der Kopf- und Fußstütze des Stuhls. Denken Sie daran, dass der Stuhl nur von der Kopf- und Fußstütze aus angehoben werden kann, nicht von einer der beiden Seiten der Armlehnen.

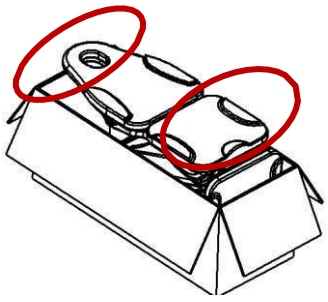

Überprüfen Sie vor der Benutzung des Stuhls, ob die Verpackung intakt ist und nicht durch den Transport beschädigt wurde. Sollte es ein Problem geben, benachrichtigen Sie bitte das Transportunternehmen oder den Kundendienst innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt des Geräts. Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile zum Zeitpunkt der Lieferung vollständig sind. Wenn Sie bei der Lieferung feststellen, dass Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.


Der elektrische Kosmetikstuhl muss in einem geschlossenen, trockenen Raum verwendet werden. Die Temperatur im Raum sollte zwischen+ 10° und -40° und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75% liegen. Wenn der elektrische Kosmetikstuhl Temperaturen unter 0° ausgesetzt war, warten Sie mindestens 5 Stunden, bevor Sie ihn benutzen, damit das Gerät Zeit hat, die Raumtemperatur zu erreichen.

Bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.


Hinweis! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des elektrischen Kosmetikstuhls spielen. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie auch das Netzkabel aus der Steckdose.

Abmessungen des Geräts:

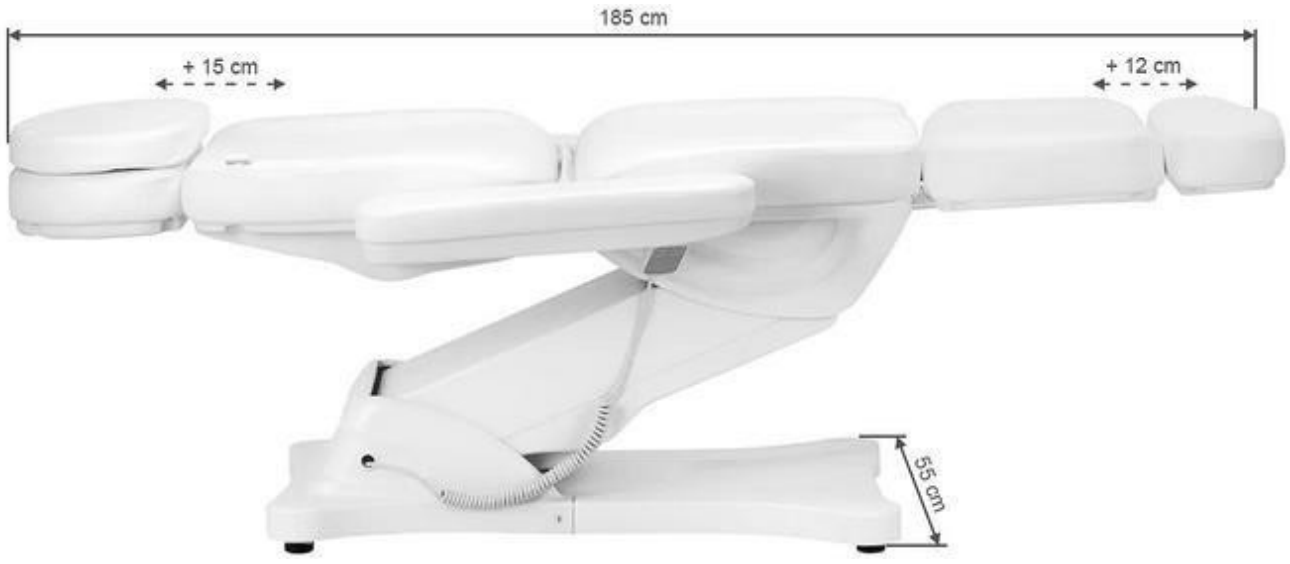



Aufbau des Geräts:

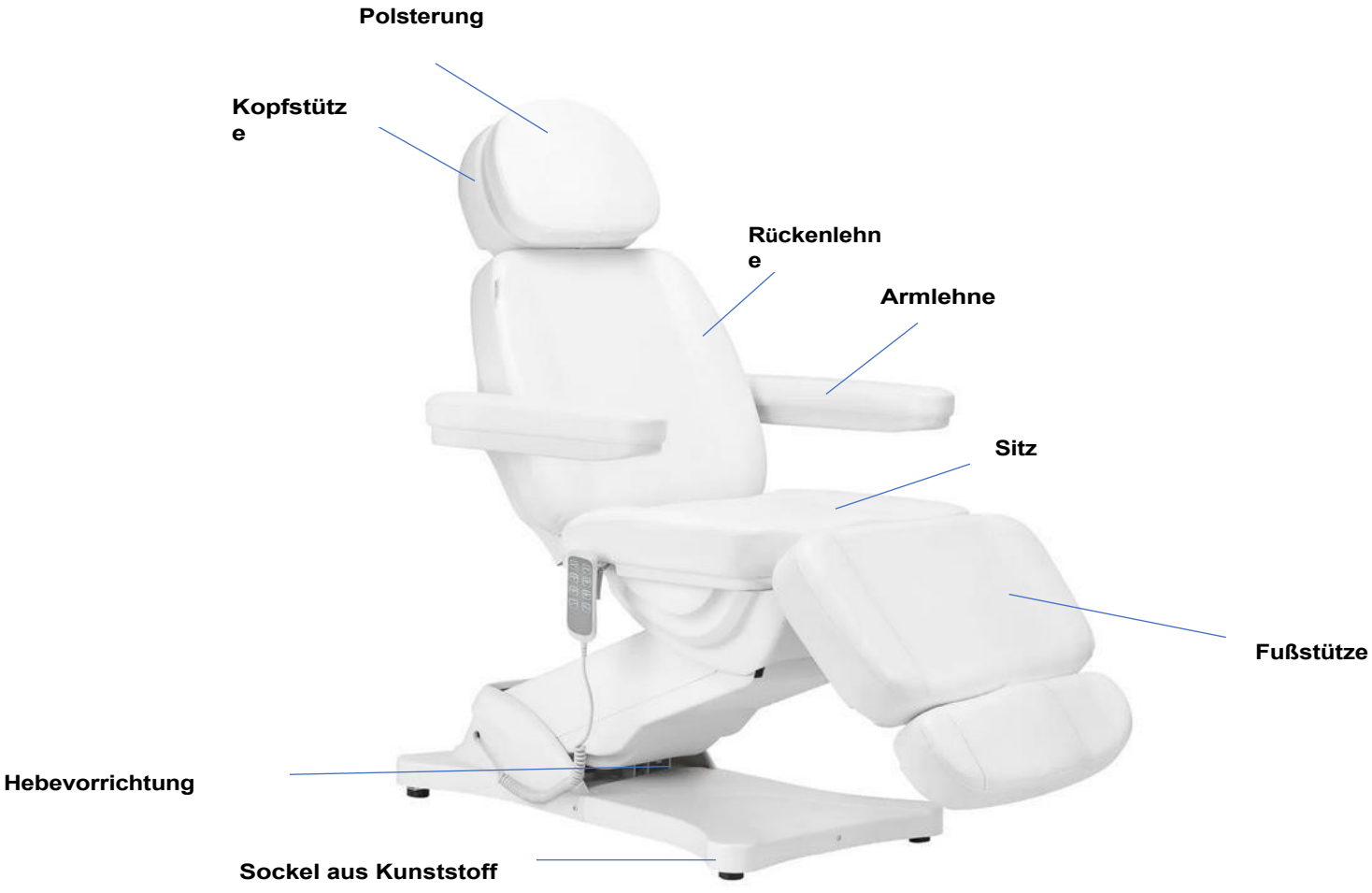

Warnung

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne und die Fußstütze.
3. Verwenden Sie den elektrischen gynäkologischen Untersuchungsstuhl nicht in der Nähe von brennbaren Gasen.
4. Heben Sie nicht mehr Gewicht, als der Stuhl tragen kann.
5. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

Vorsicht

1. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
2. Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel im Notfall leicht entfernt werden kann.
3. Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Stuhls eingeklemmt wird.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie es sofort ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
5. Lassen Sie die Fernbedienung nicht von einer Person bedienen, die nicht an der Behandlung teilnimmt.
6. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
7. Achten Sie darauf, dass um den Stuhl herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er frei ein- und ausgeklappt werden kann.
8. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Sitzes keine scharfen oder schädlichen Gegenstände befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
9. Nehmen Sie keine eigenen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Stuhl nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

Benutzung des Geräts:

1. Schließen Sie das Netzkabel an das externe Stromnetz 110V~240V an.

Montage der Armlehne:

Der Sitz muss sich in einer waagerechten Position befinden, um die Armlehnen daran zu befestigen. Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte fest angebracht sein. Drehen Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig einrastet. Gehen Sie mit der anderen Armlehne genauso vor.

Die Armlehne steht senkrecht zum Boden (unabhängig vom Winkel des Sitzes). Sie kann um 180° gedreht werden.



2. Manuelle Steuerungsfunktion (Hubhöhe: 58~ 82 cm vom Boden).






3. Manuelle Steuerfunktion (Rückenanhebungswinkel 0-80 °, Beinanhebungswinkel 0-90 °)





4. Einziehbare Fußstütze (Fußstütze, Länge: 0~ 12cm)

0~ 12cm

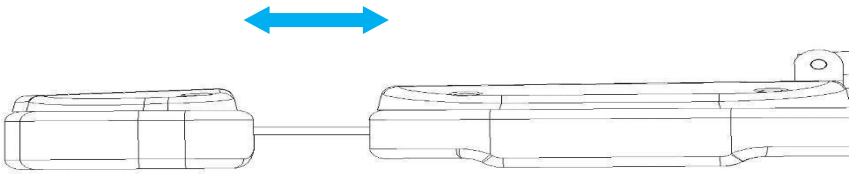

5. Wiegefunktion (die Sitzfläche des Stuhls kann angewinkelt werden - eine sogenannte Wiege. Wenn die Rückenlehne abgesenkt und die Fußstütze angehoben wird, entsteht eine ebene Fläche.



G



H

H



G

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Stuhls regelmäßig, um sie in gutem Zustand zu halten. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Wischen Sie die Metall- und Kunststoffoberflächen sowie die Bedienelemente mit einem feuchten Tuch ab, um sie zu reinigen. Um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen, verwenden Sie einen kleinen

Bürste. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Die Reinigung mit einer milden Spülmittellösung funktioniert am besten. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren zur Reinigung. **IV Sitzfläche**
- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung

Das Gerät muss vor der Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.

1. Reparaturen sollten nur von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

Kontrollieren Sie einmal wöchentlich die Bedienelemente und deren Verkabelung. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:

1. Stromversorgungskabel und deren Befestigung
2. Motorverdrahtung
3. Steuerkasten und seine Verkabelung
4. Sind die Zubehörteile befestigt?
5. Normaler Betrieb des Schließsystems

Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Fehlersuche

Problem	**Lösungsmöglichkeiten**
Die manuelle Steuerung reagiert nicht	Prüfen Sie, ob die Schnittstelle für den Anschluss der Handsteuerung lose ist (prüfen Sie, dass kein Problem mit der Leiterplatte vorliegt) und markieren Sie die ursprüngliche Position des Steckers.
Der Motor spricht nicht an	Tauschen Sie die Position des Motorsteckers aus.

Für den Austausch des Schaltkastens und die Bestellung weiterer Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und schildern Sie das Problem, bevor Sie sich an uns wenden:

1. Modell
2. Datum des Kaufs

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal bedient werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:

(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,

c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines fehlerhaften Beschädigung oder sogar Verbrennung des Geräts. **VORSICHT!**

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.


2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

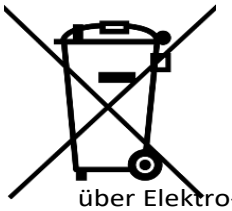

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.