ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Sillon Classic 4-mootoriline elektriline kosmeetikatool koos hälliga Mudel: C501A



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

*** ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHENDIT*.**


See kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikku teavet seadme toimimise ja hoolduse kohta. Enne seadme kasutamist lugege kaasasolevat kasutusjuhendit. Kasutage seadet kirjeldatud viisil. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et kõik isikud, kes võivad seadet kasutada, on sellega kursis.

Elektriline kosmeetikatool Sillon on professionaalne seade, mis sobib ideaalselt igasse ilusalongi. See sobib ideaalselt massaažiks, kosmeetiliseks ja ka füsioteraapiahoolduseks. Tool on konstrueeritud nii, et sellel lamades oleks ravi ajal täielik mugavus. Tool koosneb neljast osast ja eemaldatavast padjast. Istme mõlemal küljel on käepidemed, kuhu saab puldi üles riputada, et see oleks alati käepärast.

Toote kandevõime: 150 kg


Istmekorpuse maksimaalne kandevõime on 150 kg. Ärge tõstke rohkem kui antud kaalu, mida iste suudab kanda.

Ärge hüpake seljatoele ega avaldage suurt survet käetugedele, et vältida toote konstruktsiooni kahjustamist.

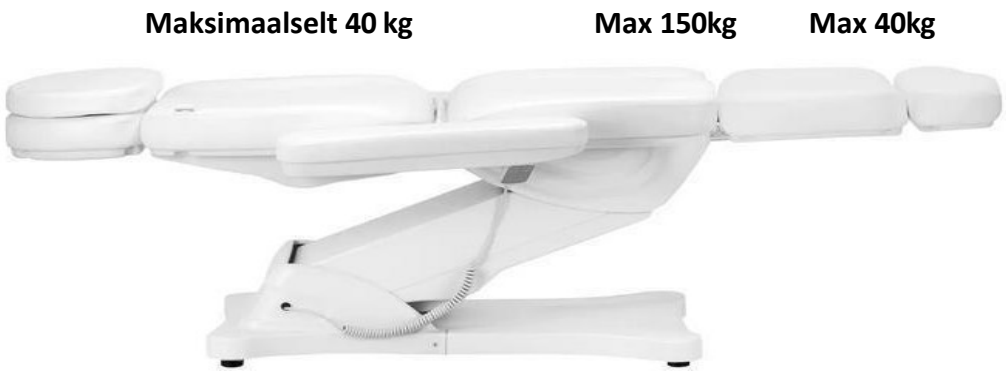

Märkus

Pakendamiseks kasutatakse pappi ja väliskarpe, milles on kokku 10 paberikihti, et tagada teie toodete kaitse. Soovitame säilitada originaalpakendid edaspidiseks kasutamiseks, eriti tagastamiseks garantiiperioodi jooksul. Turvalisuse huvides on tooli pappkarbist välja tõstmiseks vaja kahte inimest. Tõstmisel seiske mõlemal pool tooli pea- ja jalatoest. Pidage meeles, et tooli saab tõsta ainult pea- ja jalatoe positsioonidest, mitte käetugede kummaltki küljelt.

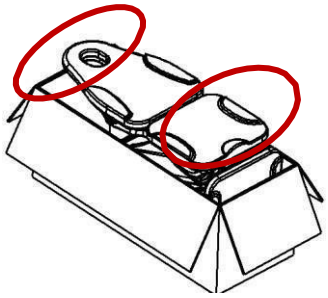

Enne tooli kasutamist kontrollige, et pakend oleks terve ja ei oleks transpordil kahjustatud. Kui on mingeid probleeme, teavitage transpordifirmat või müügijärgset personali 2 päeva jooksul pärast seadme kättesaamist. Veenduge, et kõik tarvikud on kohaletoimetamise ajal täielikud. Kui te leiate, et tarvikud on tarnimise ajal puudu, võtke õigeaegselt ühendust müügijärgse teeninduse töötajatega.


Elektrilist kosmeetikatooli tuleb kasutada suletud ja kuivas ruumis. Ruumi temperatuur peaks olema vahemikus+ 10° kuni -40 ° ja suhteline õhuniiskus vahemikus 30% kuni 75%. Kui elektriline kosmeetikatool on puutunud kokku temperatuuriga alla 0°, oodake enne kasutamist vähemalt 5 tundi, et seade jõuaks toatemperatuurini.

Enne elektrilise kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage elektriline kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.


Näpunäide! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi elektrilise kosmeetikatooli läheduses mängida. Turvalisuse huvides tõmmake seadme pistik välja ja ärge jätke seda järelevalveta. Tõmmake ka toitejuhe välja.

Seadme mõõtmed:

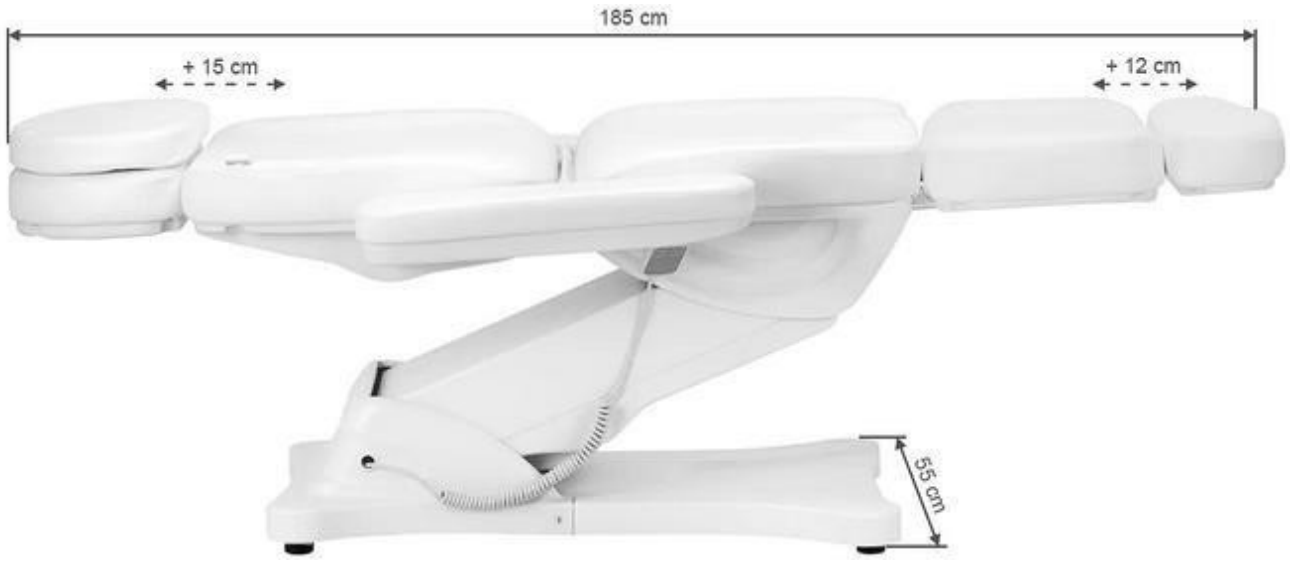



Seadme ehitus:

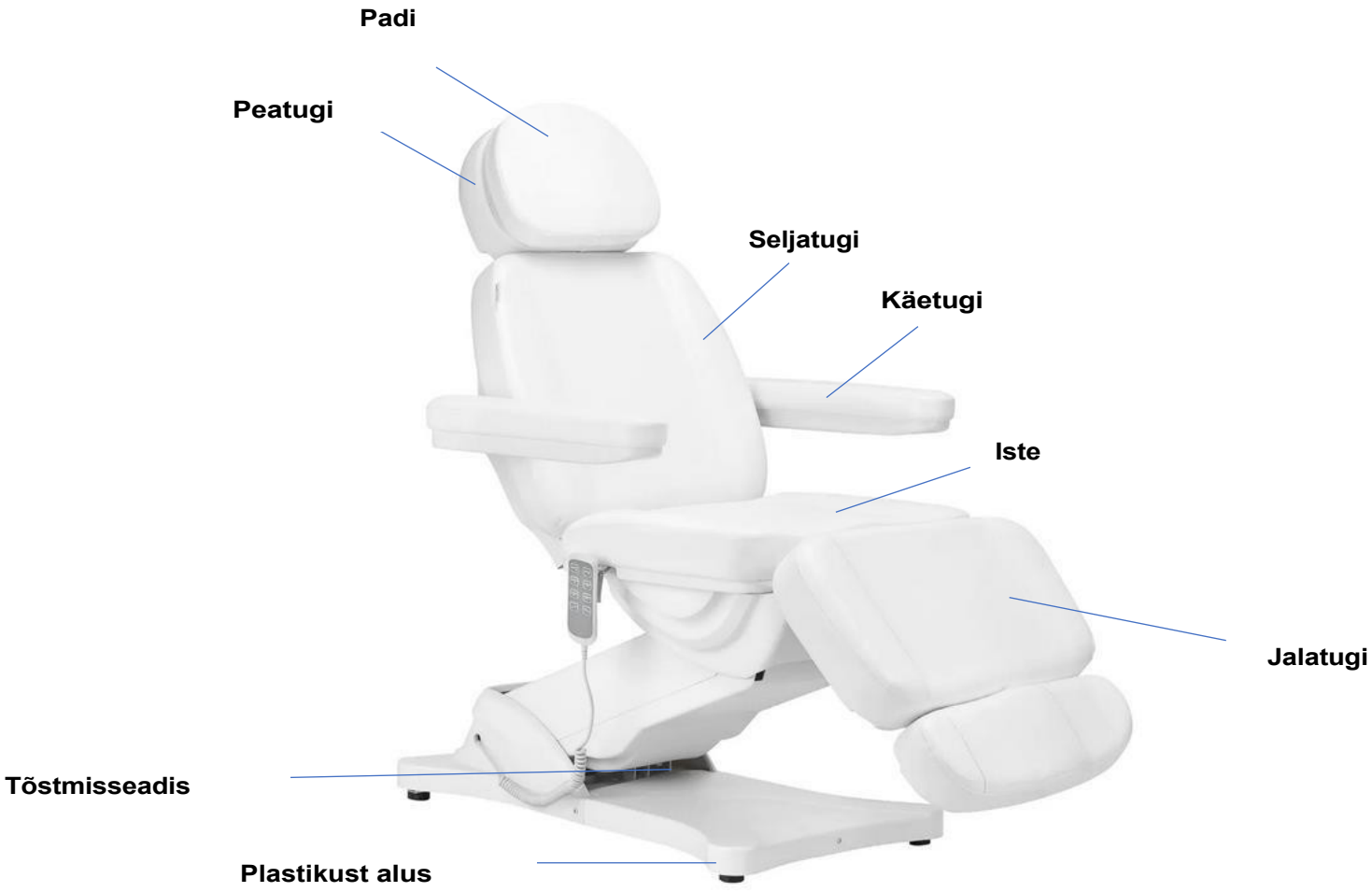

Hoiatus

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käetoele ja jalatoele.
3. Ärge kasutage elektrilist günekoloogilist läbivaatustooli tuleohtlike gaaside läheduses.
4. Ärge tõstke suuremat kaalu, kui tool suudab kanda.
5. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei ületaks 2 meetrit.

Ettevaatust

1. Ohutuse tagamiseks ühendage toolijuhe alati maandatud pistikupessa.
2. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
3. Enne elektrilise kosmeetikatooli teisaldamist eemaldage toitejuhe, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, ühendage juhe kohe lahti, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.
5. Ärge lubage raviga mitteseotud isikul juhtida juhtpulti.
6. Ärge asetage tooli alla mingeid esemeid.
7. Veenduge, et tooli ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.
8. Veenduge, et istme ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
9. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

Seadme kasutamine:

1. Ühendage toitejuhe välise toiteallikaga 110V~240V.

Käetoe paigaldamise meetod:

Käetugede paigaldamiseks peab iste olema horisontaalses asendis. Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse auku. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda paremale või vasakule, nii et see läheks õigesti paika. Tehke sama ka teise käetoega.

Käetugi on maapinnaga risti (sõltumata istme nurgast). Seda saab pöörata 180° võrra.



2. Käsitsi reguleeritav funktsioon (tõstekõrgus: voodi on 58~ 82 cm kõrgusel maapinnast).






3. Käsitsi juhitav funktsioon (selja tõstmise nurk 0-80 °, jalgade tõstmise nurk 0-90 °)





4. Jalatoe sissetõmmatav funktsioon (jalatugi, pikkus: 0~ 12cm)

0~ 12cm

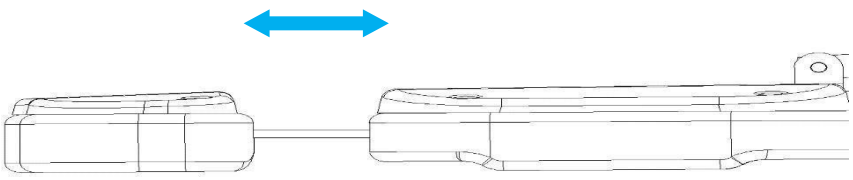

5. Kehtna funktsioon (tooli iste võib olla nurga all - nn häll. Kui seljatugi on langetatud ja jalatugi tõstetud, tekib tasane pind.



G



H



H

G

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Tooli pinna heas seisukorras hoidmiseks puhastage seda regulaarselt. Ärge unustage puhastada ja desinfitseerida tooli pärast iga kasutamist. Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metall- ja plastpindade ning juhtimisseadiste puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks võib kasutada väikest

harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee püstol).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid. **IV Tooli pind**
- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Seade tuleb enne hooldustöid vooluvõrgust lahti ühendada.

1. Remonti peab teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Volitamata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada seadme vigastusi või kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord iga kuue kuu tagant järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskarp ja selle kaabeldus
4. Kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme.

Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage teenindusosakonda.

Veaotsing

Probleem	**Lahendusmeetodid**
Käsitsi juhtimine ei reageeri	Kontrollige, et käsitsijuhtimise liini ühendav liides on lahti (Kontrollige, et ei ole probleeme trükkplaadiga), ärge unustage märkida pistiku algset asukohta.
Mootor ei reageeri	Vahetage mootori pistiku asendit

Juhtimiskarbi vahetamiseks ja muude varuosade tellimiseks võtke ühendust teenindusosakonnaga, kirjeldage probleemi enne ühendust võtmist:

1. Mudel
2. Ostukuupäev

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:

(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seadme ebaõige töö selle kahjustumine või isegi põlemine. **ETTEVAATUST:**

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleks koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.