ACTIVESHOP®

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sillon Classic 4 motor silla cosmetica electrica con cuna Modelo:

C501A



**Importador:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

III CE

***ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES*.**


Este manual contiene información detallada sobre el funcionamiento y el mantenimiento de la unidad. Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones que lo acompañan. Utilice el aparato tal y como se describe. Conserve este manual y asegúrese de que todas las personas que puedan utilizar el aparato estén familiarizadas con él.

El sillón de estética eléctrico Sillon es un equipo profesional perfecto para cualquier salón de belleza. Es ideal para masajes, tratamientos cosméticos y también de fisioterapia. El sillón se ha diseñado para garantizar una comodidad total al tumbarse en él durante el tratamiento. El sillón consta de cuatro partes y un cojín extraíble. Hay asas a ambos lados del asiento donde se puede colgar el mando a distancia para tenerlo siempre a mano.

## Capacidad de carga del producto: 150 kg


La capacidad de carga máxima del cuerpo del asiento es de 150 kg. No levante más peso del que puede soportar el asiento.

No salte sobre el respaldo ni ejerza mucha presión sobre los reposabrazos para evitar dañar la estructura del producto.

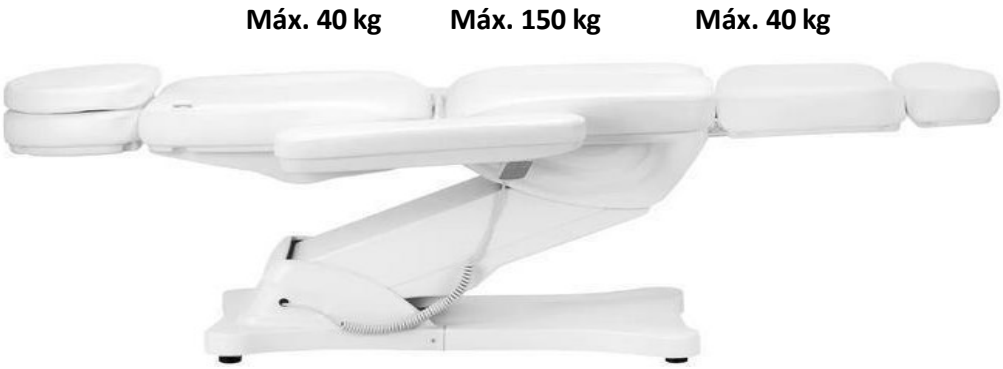


## Nota

Para el embalaje se utiliza cartón y cajas exteriores, con un total de 10 capas de papel para garantizar la protección de sus productos. Recomendamos conservar el embalaje original para futuros usos, especialmente para devoluciones durante el periodo de garantía. Por razones de seguridad, se necesitan dos personas para levantar la silla de la caja de cartón. Al levantarla, colóquese a ambos lados del reposacabezas y del reposapiés de la silla. Recuerde que el sillón sólo puede levantarse desde las posiciones del reposacabezas y el reposapiés, no desde ninguno de los lados de los reposabrazos.

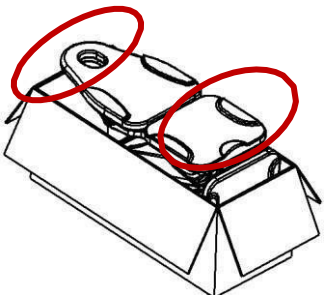

Antes de utilizar el sillón, compruebe que el embalaje está intacto y no ha sufrido daños durante el transporte. Si hubiera algún problema, notifíquelo a la empresa de transporte o al personal de postventa en un plazo de 2 días a partir de la recepción de la unidad. Asegúrese de que todos los accesorios estén completos en el momento de la entrega. Si encuentra que faltan accesorios en el momento de la entrega, póngase en contacto con el personal de postventa a tiempo.


La silla de cosmética eléctrica debe utilizarse en habitaciones cerradas y secas. La temperatura en la habitación debe estar entre+ 10° y -40 ° y la humedad relativa entre 30% y 75%. Si el sillón estético eléctrico ha estado expuesto a temperaturas inferiores a 0°, espere al menos 5 horas antes de utilizarlo para que el aparato tenga tiempo de alcanzar la temperatura ambiente.

Antes de utilizar el sillón estético eléctrico, lea las instrucciones y siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón estético eléctrico en el lugar donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.


**Nota.** Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca de la silla estética eléctrica. Por razones de seguridad, desenchufe el aparato y no lo deje sin vigilancia. Desenchufe también el cable de alimentación.

**Dimensiones del aparato:**

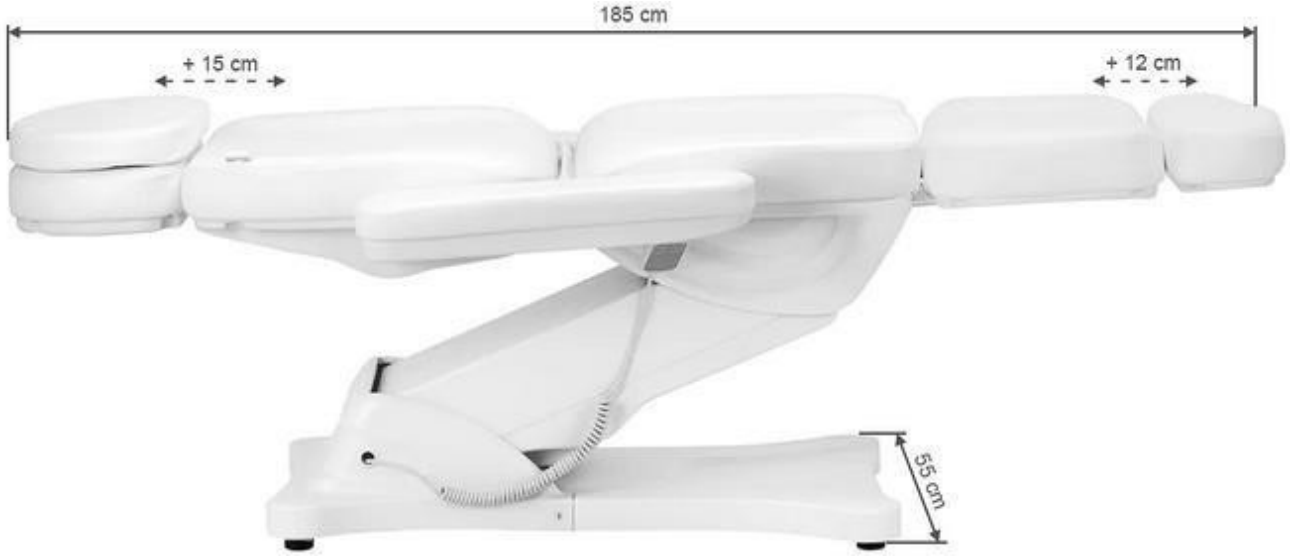




**Construcción del aparato:**

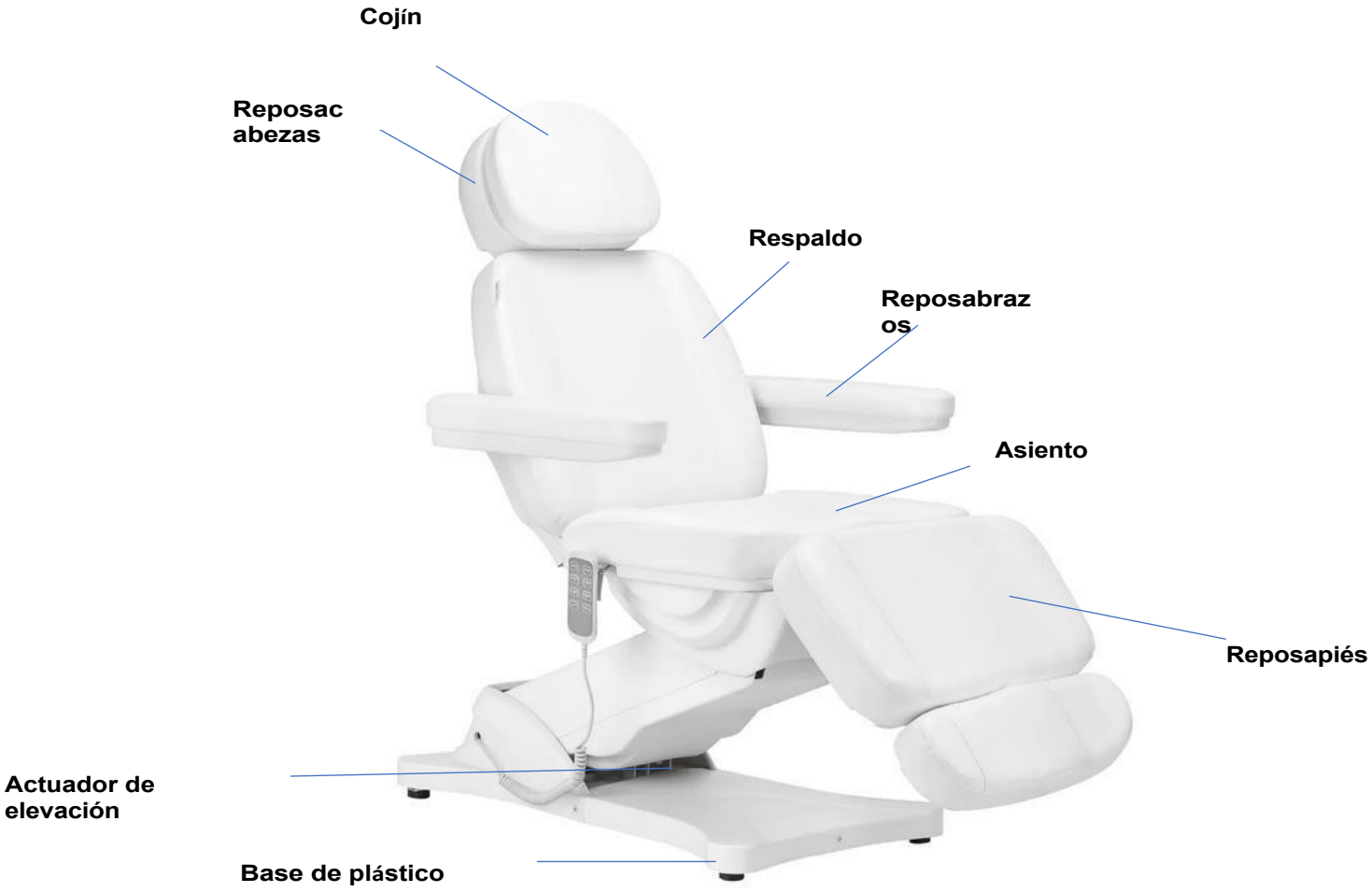

**Advertencia**

1. El reposapiés no está diseñado para soportar todo el peso de un adulto.
2. No se siente directamente en el reposabrazos ni en el reposapiés.
3. No utilice el sillón de reconocimiento ginecológico eléctrico cerca de gases inflamables.
4. No levante más peso del que pueda soportar la silla.
5. Asegúrese de que la distancia entre enchufes no supere los 2 metros.

**Precaución**

1. Por razones de seguridad, conecte siempre el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra.
2. No ate el cable de alimentación a la unidad. Levantar o tirar del cable de alimentación puede dañarlo. Asegúrese de que el cable de alimentación pueda retirarse fácilmente en caso de emergencia.
3. Retire el cable de alimentación antes de mover el sillón de belleza eléctrico para que no quede atascado entre algunas partes del sillón.
4. Si el cable de alimentación está dañado, desconéctelo inmediatamente, no utilice el sillón y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Utilice únicamente el cable de alimentación original.
5. No permita que una persona que no esté realizando el tratamiento controle el mando a distancia.
6. No coloque ningún objeto debajo del asiento.
7. Asegúrese de que hay suficiente espacio libre alrededor del asiento para poder plegarlo y desplegarlo libremente.
8. Asegúrese de que no haya objetos afilados o dañinos alrededor del asiento que puedan dañar la unidad.
9. No modifique la unidad usted mismo. Si la silla no funciona correctamente, deje de utilizarla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

**Utilización del aparato:**

1. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación externa 110V~240V.

**Método de instalación del reposabrazos:**

El asiento debe estar en posición horizontal para encajar los reposabrazos en él. Deslice el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar firmemente sujeto. Gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para que encaje correctamente. Haga lo mismo con el otro reposabrazos.

El reposabrazos está perpendicular al suelo (independientemente del ángulo del asiento). Puede girarse 180°.



2. Función de control manual (altura de elevación: la cama está a 58~ 82 cm del suelo)







3. Función de control manual (ángulo de elevación de la espalda 0-80 °, ángulo de elevación de las piernas 0-90 °)








4. Función retráctil del reposapiés (reposapiés, longitud: 0~ 12cm)

**0~ 12cm**

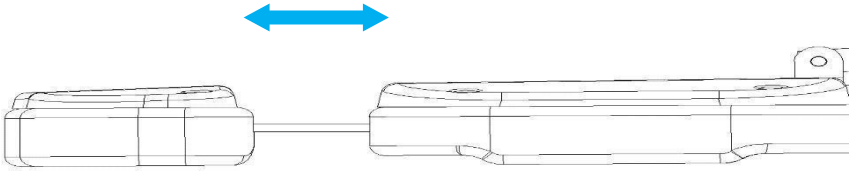

5. Función cuna (el asiento de la silla puede inclinarse, lo que se denomina cuna. Al bajar el respaldo y subir el reposapiés, se crea una superficie plana.



G



H



H

G

## Limpieza y desinfección del aparato

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, límpiela regularmente. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Recomendamos realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

## I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para las zonas o rincones de difícil acceso, un pequeño cepillo

cepillo funciona bien. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

**II Superficies de acero inoxidable**

- Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

**III Superficies metálicas pintadas o cromadas**

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para limpiar.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza. **IV Superficie de la silla**
- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

## Mantenimiento

**Desenchufe el aparato antes de proceder a su mantenimiento.**

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón de belleza eléctrico ni los accesorios si no funcionan correctamente.
4. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

### Medidas de mantenimiento

Compruebe los mandos y su cableado una vez a la semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:

1. Cable de alimentación y su fijación
2. Cableado del motor
3. La caja de control y su cableado
4. La fijación de los accesorios
5. El funcionamiento normal del sistema de cierre

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador/unidad de control.

Si alguna pieza del equipo está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

## Solución de problemas

| Problema | Métodos de solución |
|---|---|
| El control manual no responde | Compruebe que la interfaz que conecta la línea de control manual está suelta (Compruebe que no hay ningún problema con la placa de circuito) recuerde marcar la posición original del enchufe. |
| El motor no responde | Cambie la posición del enchufe del motor |

Para sustituir la caja de control y pedir otras piezas de repuesto, póngase en contacto con el servicio técnico, describa el problema antes de ponerse en contacto:

1. Modelo
2. Fecha de compra

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de funcionamiento incorrecto del aparato, daños o incluso quemaduras. **PRECAUCIÓN:**

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

## ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.