moretti®

IT **Termofori**
MANUALE DI ISTRUZIONI

ES **Almohadillas eléctricas**
MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN **Heating pads**
INSTRUCTION MANUAL

SCANSIONA IL CODICE QR
PER ALTRE LINGUE

MA **LTK700_LTK710_LTK720_LTK730_LTK740_LTK750_LTK770_01_A_IT**_06-2026

INDICE

1. CODICI ..... PAG. 3
2. INTRODUZIONE ..... PAG. 3
3. CONFORMITÀ NORMATIVA ..... PAG. 3
4. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA ..... PAG. 3
4.1 Rischi elettrici ..... pag. 3
4.2 Uso su bambini e persone fragili ..... pag. 4
4.3 Sicurezza generale e imballo ..... pag. 4
4.4 Divieti principali e uso non corretto ..... pag. 4
5. PRIMO UTILIZZO ..... PAG. 4
5.1 Funzionamento ..... pag. 4
5.2 Spegnimento ..... pag. 4
5.3 Pulizia (essenziale) ..... pag. 5
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA ..... PAG. 5
7. DESCRIZIONE GENERALE ..... PAG. 6
7.1 LTK700-LTK710 ..... pag. 6
7.2 LTK720 ..... pag. 6
7.3 LTK730 - LTK740 - LTK750 ..... pag. 7
7.4 LTK770 ..... pag. 7
8. MODALITÀ D'USO ..... PAG. 8
9. UTILIZZO ..... PAG. 8
10. PULIZIA E MANUTENZIONE ..... PAG. 8
10.1 Pulizia del dispositivo ..... pag. 8
10.2 Asciugatura ..... pag. 8
10.3 Prima del riutilizzo ..... pag. 9
11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI ..... PAG. 9
12. CARATTERISTICHE TECNICHE ..... PAG. 9
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ..... PAG. 10
14. GARANZIA ..... PAG. 11
15. CLAUSOLE ESONERATIVE ..... PAG. 11

1. CODICI

LTK700 Termoforo - 9 temperature
LTK710 Termoforo cervicale - 9 temperature
LTK720 Termoforo a fascia - 3 temperature
LTK730 Mantella termica cervicale e spalle - 3 temperature
LTK740 Mantella termica cervicale e schiena - 3 temperature
LTK750 Mantella termica per schiena - 3 temperature
LTK770 Scaldapiedi elettrico - 3 temperature

2. INTRODUZIONE

La ringraziamo per aver scelto un dispositivo Moretti S.p.A. per uso domestico, realizzato nel rispetto degli standard qualitativi applicabili ai prodotti elettrici.
Il presente manuale ha lo scopo di fornire:
- istruzioni tecniche per il corretto utilizzo del dispositivo;
- indicazioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione;
- avvertenze di sicurezza per l'utilizzatore.

Leggere attentamente tutte le sezioni del presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. In caso di dubbi o necessità di chiarimenti, contattare il rivenditore autorizzato o il servizio di assistenza tecnica Moretti S.p.A.

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. CONFORMITÀ NORMATIVA

Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea applicabile ai dispositivi elettrici a bassa tensione.

In particolare:
- Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE (LVD) (apparecchi elettrici a bassa tensione)
- Prodotto classificato come articolo non medicale
- Progettato e testato secondo le seguenti norme tecniche:
  - **EN 60335-1:2012** (sicurezza degli apparecchi elettrici domestici)
  - **EN 60335-2-17:2013** (requisiti specifici per termofori e coperte riscaldanti)
  - **EN 62233:2008** (campi elettromagnetici)

La temperatura massima erogabile dal dispositivo è pari a 65°C ± 5°C, in conformità ai limiti previsti dalle normative di riferimento.

4. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

4.1 Rischi elettrici

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete elettrica.
- NON azionare il comando con mani bagnate.
- NON tirare il cavo di alimentazione per scollegare la spina.
- NON immergere il cavo di alimentazione o il telecomando.
- Scollegare sempre la spina prima della pulizia, della manutenzione o quando il dispositivo non è in uso.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere il dispositivo e non tentare di ripararlo. Rivolgersi a un centro autorizzato.
- Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da personale autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente il comando indicato sull'etichetta del prodotto.

4.2 Uso su bambini e persone fragili
- NON adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- I bambini devono essere sempre supervisionati.
- Non utilizzare su neonati, persone malate o insensibili al calore.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali devono usare il dispositivo solo sotto supervisione.
- Non utilizzare su portatori di pacemaker.
- Il prodotto non è destinato a uso medico ospedaliero.

4.3 Sicurezza generale e imballo
- Dopo l'apertura, verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- In caso di danni, non utilizzare e contattare il rivenditore.
- Tenere gli imballaggi lontani dai bambini: rischio di soffocamento.

4.4 Divieti principali e uso non corretto
- Utilizzare solo come termoforo per uso domestico.
- NON utilizzare il dispositivo se bagnato o in ambienti umidi (es. bagno).
- NON utilizzare piegato.
- NON posizionare il telecomando o l'alimentatore sotto o sopra il prodotto durante l'uso.
- NON lasciare oggetti o indumenti all'interno quando il prodotto è piegato.
- Lasciare raffreddare prima di riporlo.
- Controllare regolarmente lo stato del prodotto; in caso di usura, non utilizzarlo.
- NON utilizzare per riscaldare animali.
- NON utilizzare in presenza di gas infiammabili o vicino a fonti di gas.
- NON posizionare materiali combustibili sul prodotto (carta, plastica, cartone, ecc.).
- NON esporre a fonti di calore, gelo, luce solare diretta o umidità.
- NON inserire aghi o oggetti appuntiti.

⚠ **AVVERTENZA!**
In caso di uso improprio, sussiste il rischio di lesioni.

5. PRIMO UTILIZZO
1. Collegare il telecomando
   Inserire il connettore del telecomando nella presa del termoforo.
2. Collegare alla corrente
   Inserire la spina nella presa elettrica.
3. Accendere il dispositivo
   Selezionare il livello di temperatura:
   - 0 = spento
   - 1 = calore basso, per uso continuo
   - 2–5 = calore medio
   - 6–9 = calore alto
4. Posizionare il termoforo sulla zona del corpo da trattare (schiena, cervicale, addome, ecc.).

5.1 Funzionamento
- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 90 minuti
- Per riaccendere: riportare su 0, attendere qualche secondo, poi selezionare di nuovo la temperatura.

5.2 Spegnimento
1. Portare il selettore su "0".
2. Scollegare la spina dalla presa.

ATTENZIONE (IMPORTANTE)
- Non utilizzare se bagnato.
- Non addormentarsi con il dispositivo acceso.
- Non usare su bambini o persone insensibili al calore.
- Non piegare durante l'uso.

5.3 Pulizia (essenziale)
- Scollegare sempre dalla corrente.
- Lavare solo a mano (max 30°C).
- Non usare candeggina.
- Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

REF Codice dispositivo

Marchio CE

LOT Lotto di produzione


Leggere il manuale per le istruzioni


Condizioni di smaltimento


Classe di protezione II


Non candeggiare


Lavaggio a mano



Non lavare a secco


Non asciugare in asciugatrice


Non stirare


7. DESCRIZIONE GENERALE

7.1 LTK700-LTK710

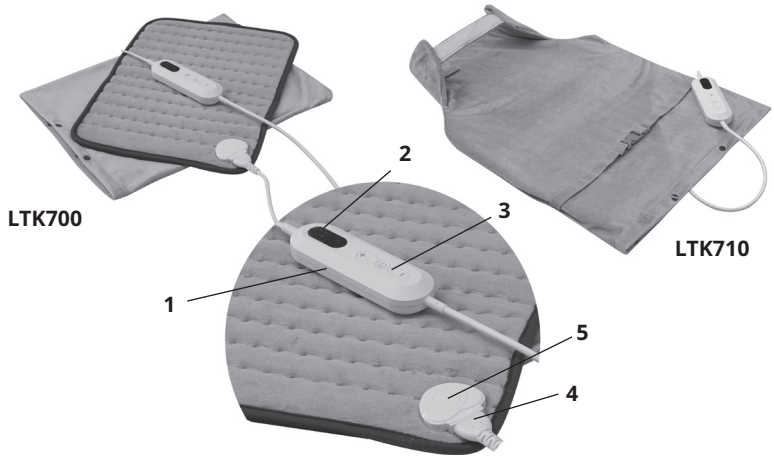


Componenti principali
1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore

7.2 LTK720

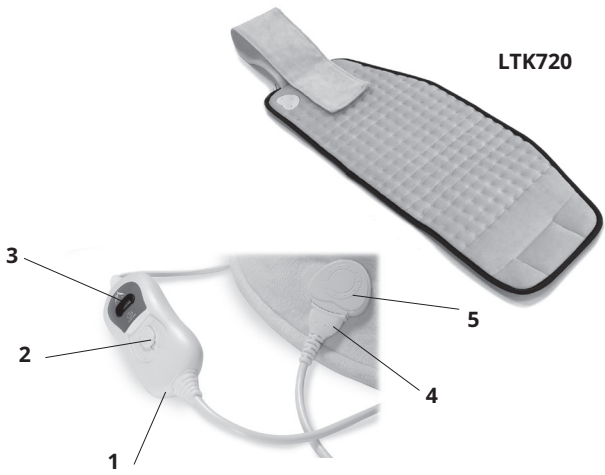


Componenti principali
1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore

7.3 LTK730 - LTK740 - LTK750

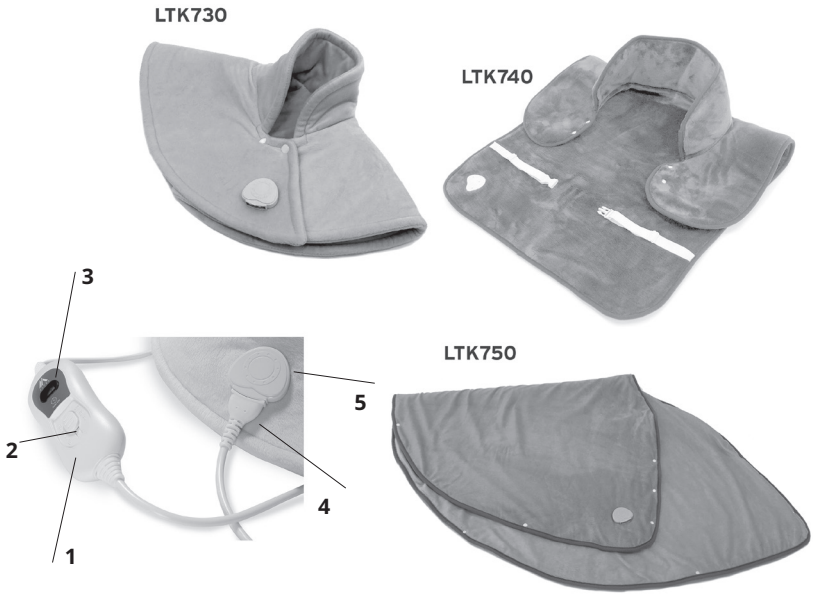

Componenti principali
1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore

7.4 LTK770

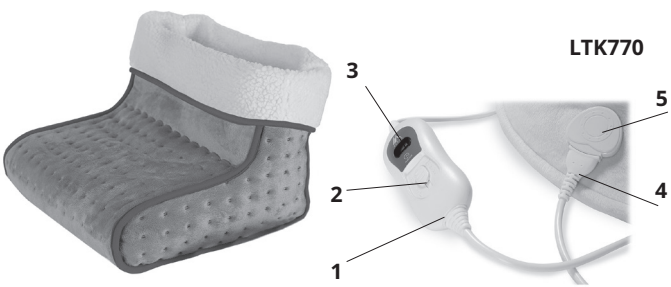

Componenti principali
1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore

8. MODALITÀ D'USO

Il termoforo è progettato per fornire calore localizzato al corpo. Può essere utilizzato su diverse zone, tra cui: cervicale, spalle, schiena, zona lombare, addome, articolazioni, mani e piedi, a seconda del modello.

ATTENZIONE!
- Utilizzare esclusivamente con il comando fornito in dotazione.
- Il modello del comando è indicato sull'etichetta del prodotto.

9. UTILIZZO

1. Collegamento
Inserire il connettore del comando (4) nella base (5) del termoforo.

2. Accensione
Inserire la spina nella presa di corrente.

3. Selezione della temperatura in base al modello disponibile.
Ruotare il selettore per impostare il livello desiderato:

Livello	Funzione
0	Spento
1	Calore basso, per uso continuo
2–5	Calore medio
6–9*	Calore alto

* disponibile solo nei modelli a 9 livelli

10. PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! PRIMA DI INIZIARE
- Scollegare il termoforo dalla rete elettrica.
- Staccare il cavo di collegamento.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente freddo.

10.1 Pulizia del dispositivo


Lavare a mano; temperatura massima 30 °C


Non candeggiare


Non lavare a secco

- Utilizzare un detergente neutro
- Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi

10.2 Asciugatura


Non usare l'asciugatrice

- Lasciare asciugare all'aria.
- Non posizionare su termosifoni o fonti di calore.
- Non accelerare l'asciugatura con dispositivi elettrici.

Non stirare

10.3 Prima del riutilizzo
Assicurarsi che il termoforo sia completamente asciutto.

11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE (RAEE), l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

12. CARATTERISTICHE TECNICHE

moretti
CON TE, CON CURA.

NO BLEACH NO IRONING NO DRY CLEAN NO WASHER DRY

Model:
Voltage: **220-240 ~ 50Hz**
Rated power input: **100W**

REF
LOT

MADE IN P.R.C.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA | *IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR* | *IMPORTED AND DISTRIBUTED BY*
Moretti S.p.A. Via Bruxelles, 3 - Cavriglia (AR) - Italy

IT: USARE SOLO CON IL COMANDO SS03. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN: USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS03. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.

FR: N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU'AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SSO3. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSERDES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.

ES: USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SSO3. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NINOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.

PT: USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SSO3. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

- Dimensioni:
  - 40x30 cm (Cod. LTK700);
  - 42x63 cm (Cod. LTK710);
  - 29x69 cm (Cod. LTK720);
  - 60x62 cm (Cod. LTK730);
  - 60x90 cm (Cod. LTK740);
  - 150x100 cm (Cod. LTK750);
  - 30x30x24 cm (Cod. LTK770);
- Potenza: 100 W - Tensione: 220-240 V
- Materiale: 100% poliestere

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE! PRIMA DI INIZIARE
- Scollegare il termoforo dalla rete elettrica
- Staccare il cavo di collegamento
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente freddo

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo non riceve alimentazione.	Verificare se: **a.** il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa di collegamento; **b.** la spina di rete è inserita nella presa della corrente; **c.** la presa di corrente è difettosa; **d.** il fusibile è scattato
	Non è stato selezionato alcun livello di temperatura. Il regolatore del livello di temperatura è in posizione 0.	Spostare il livello del regolatore.
	Si è attivata la protezione contro il surriscaldamento.	Far controllare il dispositivo.

14. GARANZIA

Tutti i dispositivi Moretti sono garantiti contro difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del dispositivo, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del dispositivo o per la mancata osservanza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del dispositivo è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i dispositivi contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e alle istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni dovuti a una spedizione diversa da quella originale effettuata da Moretti oppure mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia i componenti usurabili se il danno è imputabile al normale utilizzo del dispositivo.

15. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del dispositivo Moretti sia ininterrotto o privo di errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni Stati o Paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione ai dispositivi per i consumatori. In tali Stati o Paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

Consulta il nostro sito per l'ultima versione disponibile del manuale d'uso.

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - 52022 Cavriglia (AR) - Italy
www.morettispa.com - info@morettispa.com
Made in P.R.C.

moretti®

MA **LTK700_LTK710_LTK720_LTK730_LTK740_LTK750_LTK770_01_A_ES**_06-2026

ES **Almohadillas eléctricas**
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA MÁS IDIOMAS

ES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS ..... PAG. 14
2. INTRODUCCIÓN ..... PAG. 14
3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO ..... PAG. 14
4. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ..... PAG. 14
   - 4.1 Riesgos eléctricos ..... pag. 14
   - 4.2 Uso por niños y personas vulnerables ..... pag. 15
   - 4.3 Seguridad general y embalaje ..... pag. 15
   - 4.4 Principales prohibiciones y uso incorrecto ..... pag. 15
5. PRIMER USO ..... PAG. 15
   - 5.1 Funcionamiento ..... pag. 15
   - 5.2 Apagado ..... pag. 15
   - 5.3 Limpieza (esencial) ..... pag. 16
6. SÍMBOLOS ..... PAG. 16
7. DESCRIPCIÓN GENERAL ..... PAG. 17

7.1 LTK700-LTK710 ..... pag. 17

   - 7.2 LTK720 ..... pag. 17
   - 7.3 LTK730 - LTK740 - LTK750 ..... pag. 18
   - 7.4 LTK770 ..... pag. 18
8. INSTRUCCIONES DE USO ..... PAG. 19
9. USO ..... PAG. 19
10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..... PAG. 19
    - 10.1 Limpieza del dispositivo ..... pag. 19
    - 10.2 Secado ..... pag. 19
    - 10.3 Antes de reutilizar ..... pag. 20
11. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES ..... PAG. 20
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ..... PAG. 20
13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... PAG. 21
14. GARANTÍA ..... PAG. 21
15. CLÁUSULAS EXONERATIVAS ..... PAG. 21

ES

1. CÓDIGOS

LTK700 Almohadilla eléctrica multiusos - 9 temperaturas
LTK710 Almohadilla eléctrica para cervical y espalda - 9 temperaturas
LTK720 Almohadilla eléctrica lumbar - 3 temperaturas
LTK730 Manta eléctrica para cervical y hombros - 3 temperaturas
LTK740 Manta eléctrica para cervical y espalda - 3 temperaturas
LTK750 Manta eléctrica para la espalda - 3 temperaturas
LTK770 Calentapiés eléctrico - 3 temperaturas

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir una almohadilla térmica Moretti.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual, en especial las indicaciones de seguridad, y sígalas durante su uso. Conserve el manual para futuras consultas y entréguelo junto con el producto en caso de cederlo a otra persona.

En su interior encontrará instrucciones sencillas para un uso correcto y consejos útiles para garantizar su seguridad.

Para cualquier duda o necesidad, póngase en contacto con su distribuidor de confianza.

Nota: Compruebe que todas las piezas del producto no se hayan dañado durante la expedición. En caso de dudas no use el dispositivo y contacte con el distribuidor para instrucciones ulteriores.

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Este producto cumple con los requisitos esenciales establecidos por la normativa europea aplicable a los dispositivos eléctricos de baja tensión.

En particular:

- Conforme a la Directiva Europea 2014/35/EU (LVD) (equipos eléctricos de baja tensión)
- Producto clasificado como artículo no médico
- Diseñado y probado de acuerdo con las siguientes normas técnicas:
  - **EN 60335-1:2012** (seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico)
  - **EN 60335-2-17:2013** (requisitos específicos para almohadillas térmicas y mantas eléctricas)
  - **EN 62233:2008** (campos electromagnéticos)

La temperatura máxima suministrada por el dispositivo es de 65°C ± 5°C, en conformidad con los límites establecidos por las normas de referencia.

4. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

4.1 Riesgos eléctricos

- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la de la red eléctrica.
- NO accione el mando con las manos mojadas.
- NO tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- NO sumerja el cable de alimentación ni el mando a distancia.
- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo, de realizar cualquier operación de mantenimiento o cuando no esté en uso.
- En caso de avería o mal funcionamiento, apague el dispositivo y no intente repararlo.
- Diríjase a un servicio técnico autorizado.
- Si el cable está dañado, deberá ser sustituido por personal autorizado.
- Utilice exclusivamente el mando indicado en la etiqueta del producto.

4.2 Uso por niños y personas vulnerables
- NO apto para niños menores de 3 años.
- Los niños deben estar siempre bajo supervisión.
- No utilizar en bebés, personas enfermas o insensibles al calor.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas deben usar el dispositivo solo bajo supervisión.
- No utilizar en personas con marcapasos.
- El producto no está destinado a uso médico hospitalario.

4.3 Seguridad general y embalaje
- Después de abrir el producto, verifique que no esté dañado.
- En caso de daños, no lo utilice y contacte con su distribuidor.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños: riesgo de asfixia.

4.4 Principales prohibiciones y uso incorrecto
- Utilizar únicamente como almohadilla térmica para uso doméstico.
- NO utilizar el dispositivo si está mojado o en ambientes húmedos (por ejemplo, baño).
- NO utilizar doblado.
- NO colocar el mando o la fuente de alimentación debajo o encima del producto durante su uso.
- NO dejar objetos o prendas en su interior cuando el producto esté doblado.
- Dejar enfriar antes de guardarlo.
- Comprobar regularmente el estado del producto; en caso de desgaste, no utilizarlo.
- NO utilizar para calentar animales.
- NO utilizar en presencia de gases inflamables o cerca de fuentes de gas.
- NO colocar materiales combustibles sobre el producto (papel, plástico, cartón, etc.).
- NO exponer a fuentes de calor, heladas, luz solar directa o humedad.
- NO introducir agujas u objetos punzantes.

⚠ **¡ADVERTENCIA!**
En caso de uso impropio, existe el riesgo de posibles lesiones.

5. PRIMER USO

1. Conectar el mando.
Inserte el conector del mando en la toma de la almohadilla térmica.
2. Conectar a la corriente.
Enchufe el dispositivo a la toma eléctrica.
3. Encender el dispositivo.
Seleccione el nivel de temperatura:
   - 0 = apagado
   - 1 = calor bajo, para uso continuo
   - 2–5 = calor medio
   - 6–9 = calor alto
4. Colocar la almohadilla térmica
   Aplíquela sobre la zona del cuerpo a tratar (espalda, cervical, abdomen, etc.).

5.1 Funcionamiento
- El dispositivo se apaga automáticamente después de 90 minutos.
- Para volver a encenderlo: coloque el selector en 0, espere unos segundos y seleccione nuevamente la temperatura.

5.2 Apagado
1. Coloque el selector en “0”.
2. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

ES

ATENCIÓN (IMPORTANTE)
- No utilizar si está mojado.
- No se duerma con el dispositivo encendido.
- No usar en niños o personas insensibles al calor.
- No doblar durante el uso.

5.3 Limpieza (esencial)
- Desconectar siempre de la corriente.
- Lavar solo a mano (máx. 30°C).
- No usar lejía.
- Dejar secar completamente antes de usarlo.

6. SÍMBOLOS


Código del producto


Marcado CE


Mes y año de producción


Manual de instrucciones


Eliminación


Clase de aislamiento II


No utilizar lejía


Lavar a mano



No lavar en seco


No secar la almohadilla eléctrica en la secadora


No planchar


7. DESCRIPCIÓN GENERAL

7.1 LTK700-LTK710

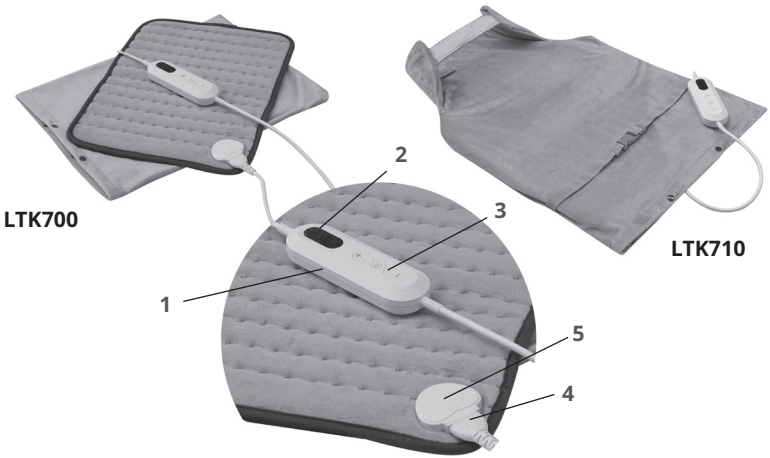

Componentes principales
1. Mando
2. Selector de temperatura
3. Pantalla
4. Conector
5. Base del conector

7.2 LTK720

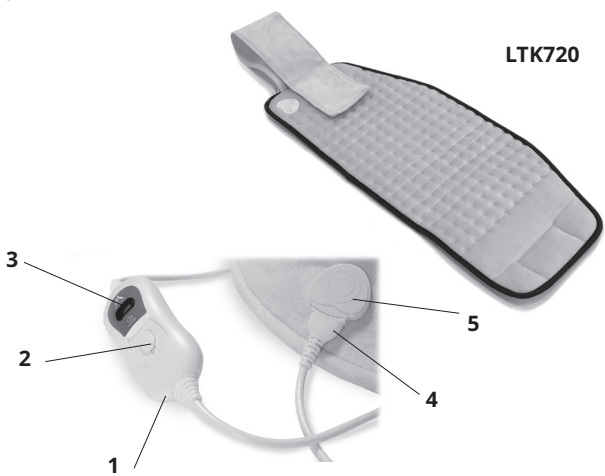


Componentes principales
1. Mando
2. Selector de temperatura
3. Pantalla
4. Conector
5. Base del conector

Imágenes con fines ilustrativos


ES

7.3 LTK730 - LTK740 - LTK750

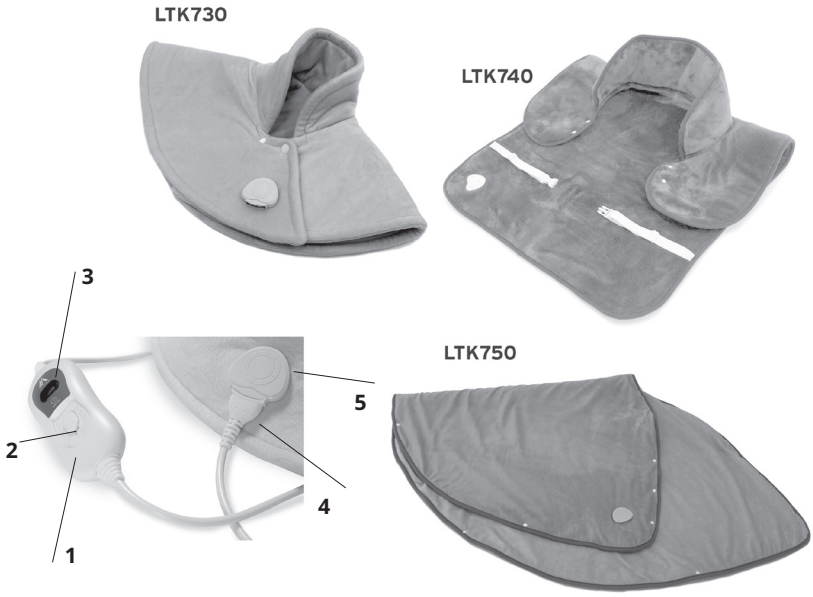

Componentes principales
1. Mando
2. Selector de temperatura
3. Pantalla
4. Conector
5. Base del conector

7.4 LTK770

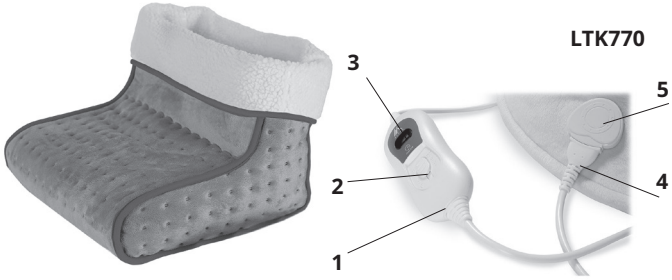

Componentes principales
1. Mando
2. Selector de temperatura
3. Pantalla
4. Conector
5. Base del conector

Imágenes con fines ilustrativos

8. INSTRUCCIONES DE USO

La almohadilla térmica está diseñada para proporcionar calor localizado al cuerpo. Puede utilizarse en diferentes zonas, entre ellas: cervical, hombros, espalda, zona lumbar, abdomen, articulaciones, manos y pies, según el modelo.

⚠ **¡ATENCIÓN!**
Utilizar exclusivamente con el mando suministrado con el producto.

9. USO

1. Conexión.
Inserte el conector del mando (4) en la base (5) de la almohadilla térmica.

2. Encendido.
Enchufe el dispositivo a la toma de corriente.

3. Selección de temperatura según el modelo disponible.
Gire el selector para ajustar el nivel deseado:

Nivel	Función
0	Apagado
1	Calor bajo, para uso continuo
2–5	Calor medio
6–9*	Calor alto

* disponible solo en modelos de 9 niveles

10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ **¡ATENCIÓN! ANTES DE EMPEZAR**
- Desconecte la almohadilla térmica de la red eléctrica.
- Desconecte el cable de conexión.
- Asegúrese de que el producto esté completamente frío.

10.1 Limpieza del dispositivo


Lavar solo a mano; Temperatura máxima: 30°C


No utilizar lejía


No lavar en seco

- Utilizar un detergente neutro.
- No utilice productos químicos ni abrasivos.

10.2 Secado


No utilice la secadora

- Dejar secar al aire.
- No colocar sobre radiadores o fuentes de calor.
- No acelerar el secado con dispositivos eléctricos.


No planchar

ES

10.3 Antes de reutilizar

Asegúrese de que la almohadilla térmica esté completamente seca.

11. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN GENERALES

El empaque del producto consiste en materiales reciclables. Elimínelo de acuerdo a las reglas de protección del medio ambiente.

Según la Directiva 2012/19/UE (RAEE), el aparato en desuso debe eliminarse en conformidad. Se recuperan los materiales reciclables contenidos en el aparato para evitar la degradación ambiental. Para obtener más información, contacte con la institución de eliminación local o con el distribuidor del electrodoméstico.

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

moretti
CON TE, CON CURA.

NO BLEACH NO IRONING NO DRY CLEAN NO WASHER DRY

Model:
Voltage: **220-240 ~ 50Hz**
Rated power input: **100W**

REF
LOT

MADE IN P.R.C.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA | *IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR* | *IMPORTED AND DISTRIBUTED BY*
Moretti S.p.A. Via Bruxelles, 3 - Cavriglia (AR) - Italy

IT: USARE SOLO CON IL COMANDO SSO3. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN: USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SSO3. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.

FR: N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU'AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SSO3. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSERDES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.

ES: USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SSO3. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NINOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.

PT: USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SSO3. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

- Medidas
  - 40x30 cm (Cod. LTK700);
  - 42x63 cm (Cod. LTK710);
  - 29x69 cm (Cod. LTK720);
  - 60x62 cm (Cod. LTK730);
  - 60x90 cm (Cod. LTK740);
  - 150x100 cm (Cod. LTK750);
  - 30x30x24 cm (Cod. LTK770).
- Potencia: 100 W - Voltaje: 220-240 V.
- Material 100% poliéster.

13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ **¡ATENCIÓN!**
Si el aparato no funciona correctamente, no intente repararlo usted mismo.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona.	El dispositivo no recibe corriente eléctrica.	Verifique si: **a.** La conexión del cable es correcta; **b.** El enchufe está correctamente insertado; **c.** La toma de corriente funciona correctamente; **d.** El fusible se ha activado.
	No se ha seleccionado ningún nivel de temperatura. El selector del nivel de temperatura está en posición 0.	Coloque el selector del nivel.
	Se ha activado la protección contra el sobrecalentamiento.	Haga controlar el equipo.

14. GARANTÍA

Todos los productos MORETTI tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defecto de fabricación o de material. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso.
La destinación correcta de uso está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados de una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual para la instalación, el montaje y el uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes:
calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por el alimentación eléctrica (donde está), uso de piezas no suministradas por Moretti, por no respetar las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños de expedición (distintas de las expediciones originales de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas al deterioro si el daño es causado por normal uso del producto.

15. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Salvo indicación expresada en esta garantía y dentro de los límites de la ley, Moretti no ofrece ninguna declaración, garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo todas las declaraciones, garantías o condiciones de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, no infracción y no interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti será sin interrupción o sin errores. La duración de cualquier garantía implícita que se puede imponer por ley se limita al período de garantía, dentro de los límites de la ley. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes relacionados con productos para consumidores finales. En esos estados o países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía pueden no aplicarse al usuario. Esta garantía está sujeta a cambios sin aviso previo.

Consulte nuestro sitio web para obtener la última versión disponible del manual de usuario.

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - 52022 Cavriglia (AR) - Italy
www.morettispa.com - info@morettispa.com
Made in P.R.C.

moretti®

MA **LTK700_LTK710_LTK720_LTK730_LTK740_LTK750_LTK770_01_A_EN**_06-2026

SCAN QR-CODE
FOR MORE LANGUAGES

EN **Heating pad**
INSTRUCTION MANUAL

EN

INDEX

1. CODES ..... PAG. 24
2. INTRODUCTION ..... PAG. 24
3. REGULATORY COMPLIANCE ..... PAG. 24
4. SAFETY WARNINGS ..... PAG. 24
4.1 Electrical hazards ..... pag. 24
4.2 Use with children and vulnerable persons ..... pag. 25
4.3 General safety and packaging ..... pag. 25
4.4 Main prohibitions and improper use ..... pag. 25
5. FIRST USE ..... PAG. 25
5.1 Operation ..... pag. 25
5.2 Switching off ..... pag. 25
5.3 Cleaning (essential) ..... pag. 26
6. SYMBOLS ..... PAG. 26
7. GENERAL DESCRIPTION ..... PAG. 27
7.1 LTK700-LTK710 ..... pag. 27
7.2 LTK720 ..... pag. 27
7.3 LTK730 - LTK740 - LTK750 ..... pag. 28
7.4 LTK770 ..... pag. 28
8. INSTRUCTIONS FOR USE ..... PAG. 29
9. USE ..... PAG. 29
10. CLEANING AND MAINTENANCE ..... PAG. 29
10.1 Washing ..... pag. 29
10.2 Drying ..... pag. 29
10.3 Before reuse ..... pag. 30
11. GENERAL CONDITIONS OF DISPOSAL ..... PAG. 30
12. TECHNICAL FEATURES ..... PAG. 30
13. TROUBLESHOOTING ..... PAG. 31
14. WARRANTY ..... PAG. 31
15. EXEMPT CLAUSES ..... PAG. 31

EN

1. CODES

LTK700 Multi-purpose heating pad - 9 temperatures
LTK710 Neck and back heating pad - 9 temperatures
LTK720 Lumbar heating belt - 3 temperatures
LTK730 Neck and shoulders heating cape - 3 temperatures
LTK740 Neck and back heating cape - 3 temperatures
LTK750 Back heating cape - 3 temperatures
LTK770 Electric feet warmer - 3 temperatures

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a Moretti heating pad.

Before using the product, please read this manual carefully, especially the safety instructions, and follow them during use. Keep the manual for future reference and pass it on together with the product if it is transferred to a third party.

Inside, you will find simple instructions for proper use and useful advice to ensure your safety.

For any questions or assistance, please contact your trusted retailer.

Note: Check that all parts of the product have not been damaged during the shipment. In case of damage do not use the product and contact the retailer for further instructions.

3. REGULATORY COMPLIANCE

This product complies with the essential requirements set out by the applicable European legislation for low-voltage electrical devices.

In particular:

- Compliant with the European Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.
- Product classified as a non-medical device.
- Designed and tested in accordance with the following technical standards:
    - **EN 60335-1:2012** (Safety of household electrical appliances)
    - **EN 60335-2-17:2013** (Particular requirements for heating pads and electric blankets)
    - **EN 62233:2008** (Electromagnetic fields)

The maximum temperature delivered by the device is 65°C ± 5°C, in compliance with the limits set by the relevant standards.

4. SAFETY WARNINGS

4.1 Electrical hazards

- Before connecting the appliance, check that the voltage indicated on the rating label matches the voltage of the electrical supply.
- DO NOT operate the controller with wet hands.
- DO NOT pull the power cable to unplug the appliance.
- DO NOT immerse the power cable or the remote controller in water.
- Always unplug the appliance before cleaning, performing any maintenance, or when the device is not in use.
- In the event of a fault or malfunction, switch off the device and do not attempt to repair it.
- Contact an authorised service centre.
- If the cable is damaged, it must be replaced by authorised personnel.
- Use only the controller indicated on the product label.

4.2 Use with children and vulnerable persons

- NOT suitable for children under 3 years of age.
- Children must always be supervised.
- Do not use on infants, sick individuals, or persons insensitive to heat.
- Persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities should use the device only under supervision.
- Do not use on individuals with pacemakers.
- This product is not intended for medical or hospital use.

4.3 General safety and packaging

- After opening, check that the product is not damaged.
- In case of damage, do not use it and contact your retailer.
- Keep packaging materials out of reach of children: risk of suffocation.

4.4 Main prohibitions and improper use

- Use only as a heating pad for domestic use.
- DO NOT use the device if wet or in humid environments (e.g. bathroom).
- DO NOT use while folded.
- DO NOT place the controller or power supply under or on top of the product during use.
- DO NOT leave objects or clothing inside when the product is folded.
- Allow to cool before storing.
- Regularly check the condition of the product; do not use it if worn or damaged.
- DO NOT use to warm animals.
- DO NOT use in the presence of flammable gases or near gas sources.
- DO NOT place combustible materials on the product (paper, plastic, cardboard, etc.).
- DO NOT expose to heat sources, frost, direct sunlight, or moisture.
- DO NOT insert needles or sharp objects.

⚠ **WARNING!**
There is a risk of injury in case of improper use.

5. FIRST USE

1. Connect the controller.
   Insert the controller connector into the heating pad socket.
2. Plug into the power supply.
   Insert the plug into an electrical outlet.
3. Turn on the device.
   Select the temperature level:
   - 1 = low level, for continuous use
   - 2–5 = medium level
   - 6–9 = high level
4. Position the heating pad
   Place it on the area of the body to be treated (back, neck, abdomen, etc.).

5.1 Operation

- The device automatically switches off after 90 minutes.
- To restart: set to 0, wait a few seconds, then select the temperature again.

5.2 Switching off

1. Set the selector to “0”.
2. Unplug from the electrical outlet.

EN

WARNING (IMPORTANT)
- Do not use if wet.
- Do not fall asleep with the device switched on.
- Do not use on children or persons insensitive to heat.
- Do not fold during use.

5.3 Cleaning (essential)
- Always disconnect from the power supply.
- Hand wash only (max 30°C).
- Do not use bleach.
- Allow to dry completely before use.

6. SYMBOLS


Product code


CE mark


Month and year of production


Instruction manual


Disposal


Insulation class II


Do not use bleach


Hand wash



Do not dry-clean


Do not dry the heating pad in the dryer


Do not iron


7. GENERAL DESCRIPTION

7.1 LTK700-LTK710

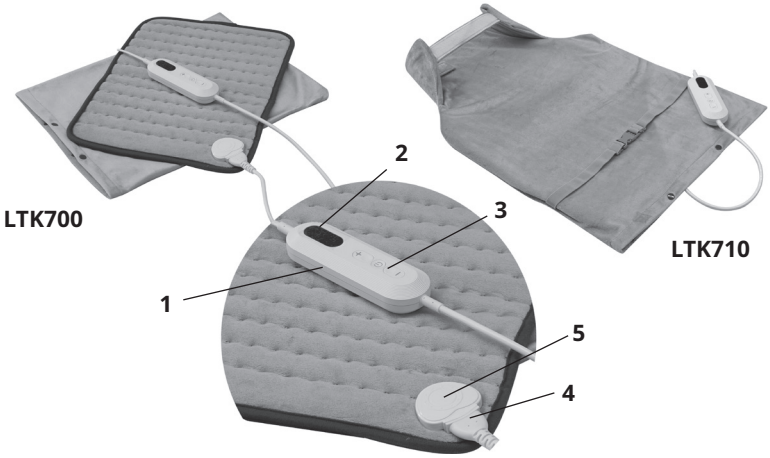

Main components
1. Remote control
2. Temperature selector
3. Display
4. Connector
5. Connector base

7.2 LTK720

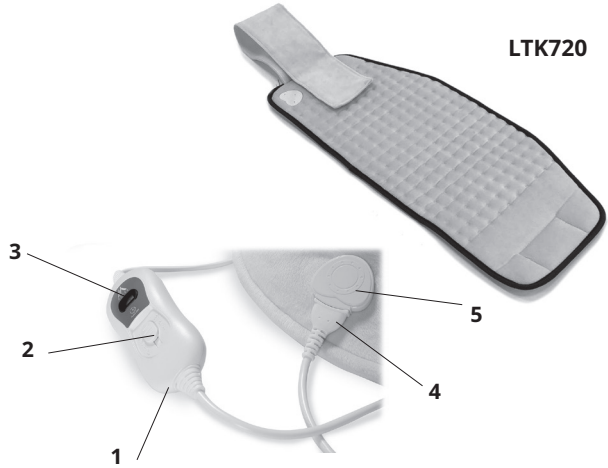


Main components
1. Remote control
2. Temperature selector
3. Display
4. Connector
5. Connector base

Image for illustration only


EN

7.3 LTK730 - LTK740 - LTK750

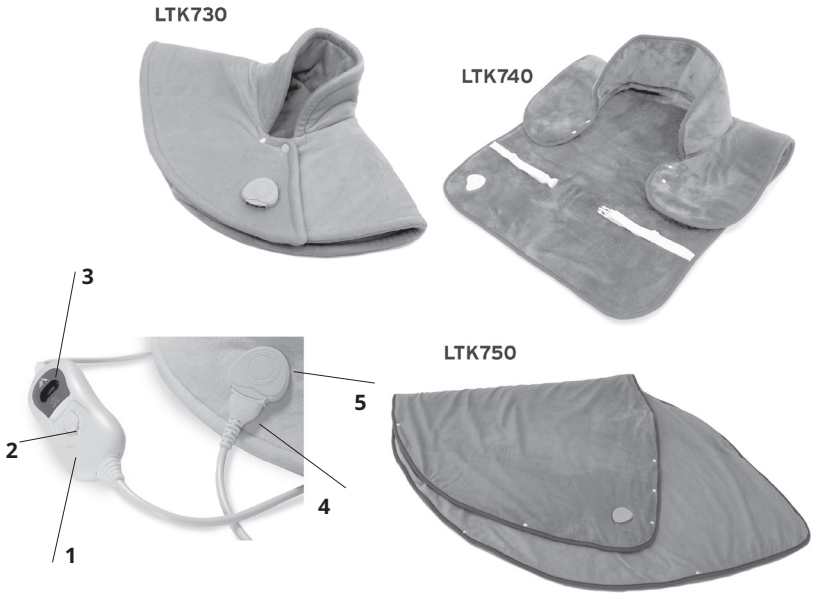

Main components
1. Remote control
2. Temperature selector
3. Display
4. Connector
5. Connector base

7.4 LTK770

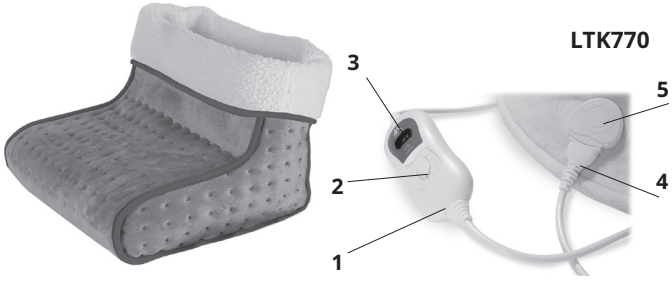

Main components
1. Remote control
2. Temperature selector
3. Display
4. Connector
5. Connector base

Image for illustration only

8. INSTRUCTIONS FOR USE

The heating pad is designed to provide localized heat to the body. It can be used on various areas, including: neck (cervical area), shoulders, back, lower back, abdomen, joints, hands, and feet, depending on the model.

WARNING!
- Use only with the controller supplied with the product.
- The controller model is indicated on the product label.

9. USE

1. Connection

Insert the controller connector (4) into the socket (5) of the heating pad.

2. Power on

Plug the device into the electrical outlet.

3. Temperature selection depending on the model available.

Turn the selector to set the desired level:

Level	Function
0	Off
1	Low level, for continuous use
2–5	Medium heat
6–9*	High heat

* available only on 9-level models

10. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING! BEFORE STARTING
- Disconnect the heating pad from the power supply.
- Unplug the connection cable.
- Ensure the product is completely cool.

10.1 Washing


Hand wash only; Maximum temperature: 30°C


Do not use bleach


Do not dry-clean

- Use a mild detergent.
- Do not use chemicals or abrasive products.

10.2 Drying


Do not dry in the dryer

- Allow to air dry.
- Do not place on radiators or heat sources.
- Do not speed up drying with electrical devices.

Image for illustration only

Do not iron

EN

10.3 Before reuse
Ensure the heating pad is completely dry before use.

11. GENERAL CONDITIONS OF DISPOSAL

The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.

The product must be disposed of appropriately, in compliance with Directive 2012/19/EU (WEEE). The recyclable materials contained in the appliance must be recovered so as to prevent environmental pollution. For further information, contact the local disposal body or the appliance dealer

12. TECHNICAL FEATURES

moretti
CON TE, CON CURA.

NO BLEACH NO IRONING NO DRY CLEAN NO WASHER DRY

Model:
Voltage: **220-240 ~ 50Hz**
Rated power input: **100W**

REF
LOT

MADE IN P.R.C.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA | *IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR* | *IMPORTED AND DISTRIBUTED BY*
Moretti S.p.A. Via Bruxelles, 3 - Cavriglia (AR) - Italy

IT: USARE SOLO CON IL COMANDO SS03. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN: USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS03. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.

FR: N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU'AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SSO3. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSERDES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.

ES: USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SSO3. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NINOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.

PT: USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SSO3. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

- Measures:
  - 40x30 cm (Cod. LTK700);
  - 42x63 cm (Cod. LTK710);
  - 29x69 cm (Cod. LTK720);
  - 60x62 cm (Cod. LTK730);
  - 60x90 cm (Cod. LTK740);
  - 150x100 cm (Cod. LTK750);
  - 30x30x24 cm (Cod. LTK770).
- Power: 100 W - Voltage: 220-240 V.
- Material 100% polyester.

13. TROUBLESHOOTING

WARNING!
If the electrical device does not work properly and it is defective, do not attempt to repair it by yourself.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The device does not work.	The device is not receiving power.	Check if: **a.** Check that the plug is properly inserted; **b.** Verify the cable connection; **c.** Check the electrical outlet; **d.** Check the fuse.
	No temperature level has been selected. The temperature selector is in position 0.	Move the temperature selector
	The protection against overheating has been activated.	Have the device checked by the manufacturer.

14. WARRANTY

Every Moretti product is guaranteed for 2 (two) YEARS from the purchase date, except the restrictions specified below. The warranty shall not apply in case of damage caused by improper use, abuse, alterations of the product or any other use not in compliance with the user manual. The proper use of the product is indicated in the user manual. Moretti S.p.A. shall not be liable for any damages or personal injuries due to incorrect assembly/improper use of the device, not compliant with the user manual. Moretti does not guarantee its products against damages or faults in the following cases: natural disasters, non-authorized maintenance or reparations, damages caused by electrical supply problems (if provided), use of parts or components not provided by Moretti, failure in accomplishing the guidelines and instructions for use, non-authorized alterations, damages due to the transport (different from Moretti original delivery) or failure in maintaining the device as indicated in the manual. The components subject to wear are not covered by this warranty if the damage is due to the normal use of the product.

15. EXEMPT CLAUSES

Except what clearly specified in this warranty and in accordance with the law, Moretti S.p.A. does not offer its customers any other declaration, warranty or condition, expressed or implicit, including any declaration, warranty or condition of merchantability, of non violation or non interference, of suitability for a specific aim. Moretti S.p.A. does not guarantee that the use of Moretti products will be continuous and faultless. The duration of possible implicit warranties that may be applied in accordance with the law is limited to the warranty period. Some states or countries do not allow limitations to the duration of an implicit warranty, or the exoneration, or the limitations of accidental or indirect damages related to products for consumers. In such states or countries some exonerations or limitation of this warranty may not be applied to the user. This warranty is subject to modifications without any prior notice.

Please consult our website for the most up-to-date version of the user manual.

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - 52022 Cavriglia (AR) - Italy
www.morettispa.com - info@morettispa.com
Made in P.R.C.

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3
52022 Cavriglia (AR) Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com