ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Elektrischer Kosmetikstuhl Azzurro 891




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

Abmessungen des Geräts:

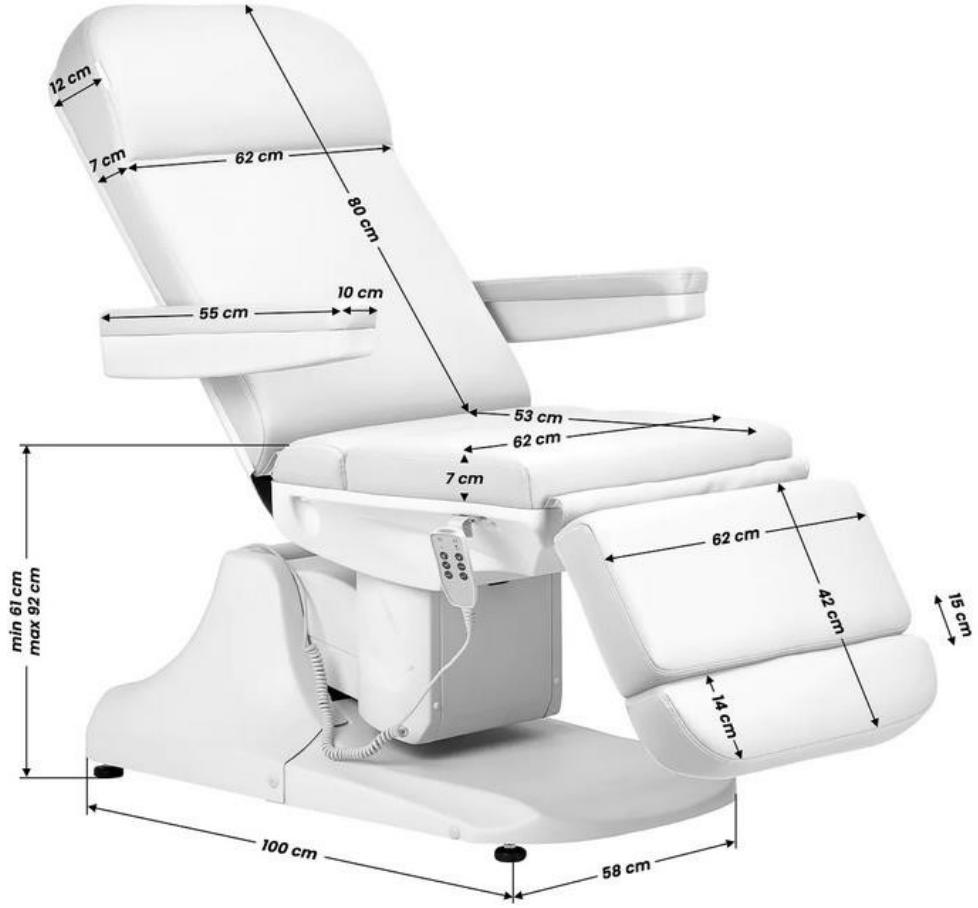

Das Gerät wird mit einer Fernbedienung gesteuert.

Funktionen der Fernbedienung:



1. Sitzhöhenverstellung von 61-92 cm (drücken, um den Sitz anzuheben oder abzusenken).

2. Einstellung des Rückenlehnenwinkels

3. Einstellung der Fußstütze (drücken, um die Position der Fußstütze zu ändern)

Einstellung der Fußstütze:

Die Fußstütze hat eine Verstellmöglichkeit und kann von 0-15 cm verlängert werden. Um die Fußstütze zu verlängern, drehen Sie den Knopf an der Unterseite und verlängern Sie die Fußstütze auf die gewünschte Länge.



Reinigung und Desinfektion der Maschine

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts.

Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Z u s t a n d zu halten, sollten Sie sie regelmäßig reinigen. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

Beste funktioniert am besten ist die Reinigung von mit einer milden Lösung Reinigungsmittel. Ammoniak i Die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III. Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Wasserstrahl (Brause, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren für die Reinigung.

IV Sitzoberfläche

- Wischen Sie die Sitzoberfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

Überprüfen Sie die Bedienelemente und ihre Verkabelung einmal pro Woche. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:

1. Stromkabel und dessen Befestigung
2. Motorverkabelung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. die normale Funktion des Schließsystems

Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.
Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Fehlersuche

Problem	**Ursache**	**Lösungsmethode**
Wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, reagiert die Fernbedienung nicht	Die Funktion der betreffenden Taste hat bereits ihr Maximum erreicht.	1. Versuchen Sie, eine andere Taste zu drücken.
Das Gerät macht seltsame Geräusche beim Einstellen der Höhe	Lose Schraube	Alle Schrauben anziehen