

ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lampă de tratament de masă Glow MX6 / MX3



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street, building
DC 2a 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl




Date tehnice:

Model	HD-M3X	HD-M6X
Tensiune de intrare	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Tensiune de intrare	12V 2A	24V 1.5A
Putere maximă	20W	36W
Culoare	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Dimensiuni	400 x 200 x 40mm	580 x 190 x 445mm
Greutate	1,4 kg	4,6 kg

Construcția și montarea lămpii HD-M6X


1. Înșurubați partea inferioară a trepiedului (partea D) în bază. Apoi înșurubați partea superioară a trepiedului (partea C) în partea inferioară (partea D).

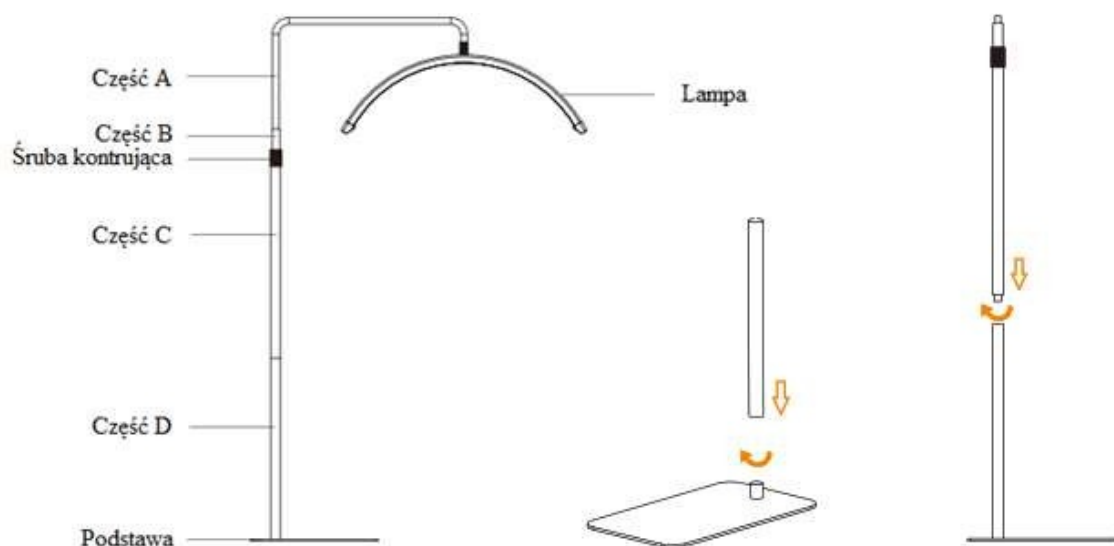


2. Montarea lămpii pe trepied

- Slăbiți șurubul de fixare.
- Scoateți partea B din partea C.
- Răsuciți partea A cu partea B.
- Introduceți partea B în partea C.
- Strângeți șurubul de fixare.
- Conectați cablurile pentru alimentarea cu energie electrică.

Notă: Poziționarea suportului lămpii frumos deasupra piciorului trepiedului asigură cea mai mare stabilitate pentru lampă.

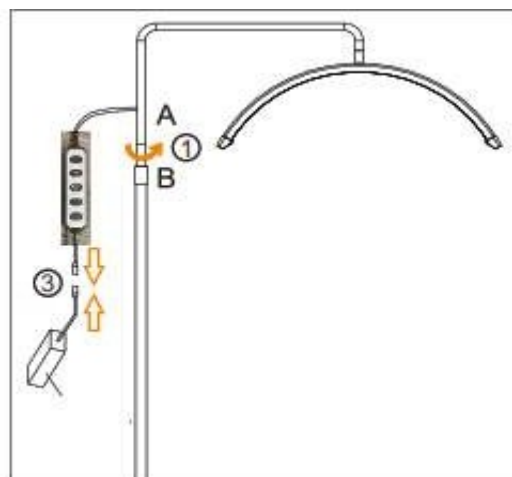

Construcția și montarea lămpii HD-M3X

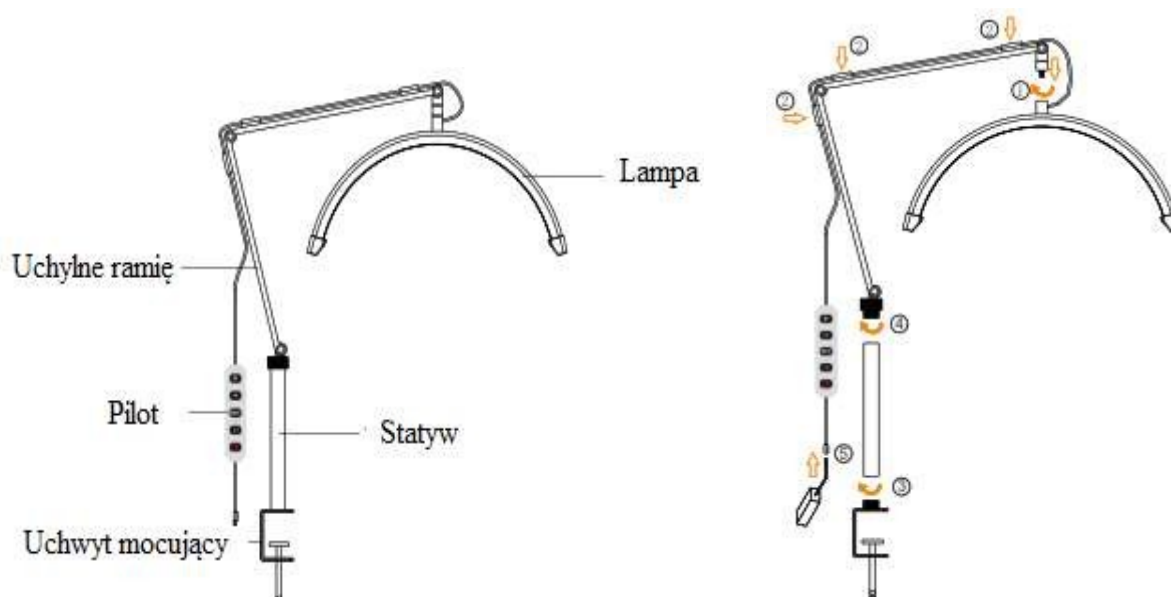


1. Înșurubați lampa în partea superioară a brațului de înclinare.
2. Montați cablul în suporturile speciale de ghidare
3. Montați suportul lămpii pe suportul de montare
4. Conectați lampa la trepied
5. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare

Notă: Este posibilă ajustarea rigidității articulațiilor brațului pivotant cu o cheie Allen.

După utilizarea prelungită sau intensivă a brațului lămpii poate apărea un joc excesiv al articulațiilor. Îmbunătățiți rigiditatea articulațiilor prin strângerea șuruburilor de fixare.

Atenție! Nu strângeți prea tare șuruburile. Există riscul de deteriorare a brațului lămpii dacă șuruburile de fixare sunt strânse excesiv.

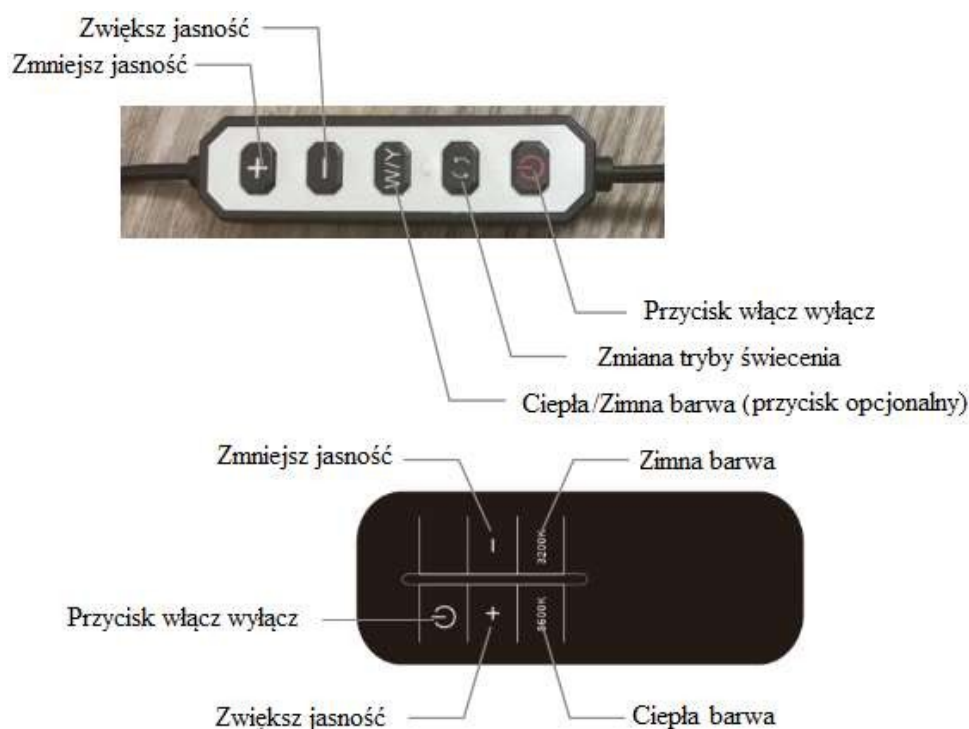

Utilizarea lămpii HD-M3X/ HD-M6X

Notă: Telecomanda este opțională pe lampă (unele modele nu includ telecomanda)

Notă: Butonul de schimbare a modului de iluminare este opțional pe controlerul lămpii (unele modele nu au acest

Construcția și montarea lămpii HD-M3X

buton).

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP SP. Z O.O.). în următoarele cazuri:
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

echipamentele electrice și electronice uzate trebuie colectate separat și duse la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP SP. Z O.O.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați dispozitivul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.