ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pomocnik podologiczny 984

HZ-984 grey / white



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2026

Scan for different languages

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Przed pierwszym użyciem prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na później.


Pomocnik podologiczny 984 to prosty i funkcjonalny mebel przeznaczony do gabinetów podologicznych, salonów kosmetycznych oraz innych przestrzeni zabiegowych, w których istotna jest dobra organizacja stanowiska pracy. Ułatwia przechowywanie narzędzi, kosmetyków oraz sprzętu, wprowadzając porządek i estetykę do wnętrza.

Dane techniczne	
Moc lampy ultrafioletowej	6 W
Napięcie	230 V ~ / 50 Hz
Maksymalny udźwig	30 kg

Zintegrowany sterylizator UV w szufladzie

Szuflada z wbudowaną lampą UV umożliwia higieniczne zabezpieczenie narzędzi pomiędzy zabiegami. Lustrzane wykończenie wnętrza wspomaga równomierne działanie promieniowania UV, zwiększając skuteczność sterylizacji.

- System aktywowany jest wyłącznie po pełnym domknięciu szuflady,
- Wysunięcie szuflady powoduje natychmiastowe wyłączenie lampy UV.

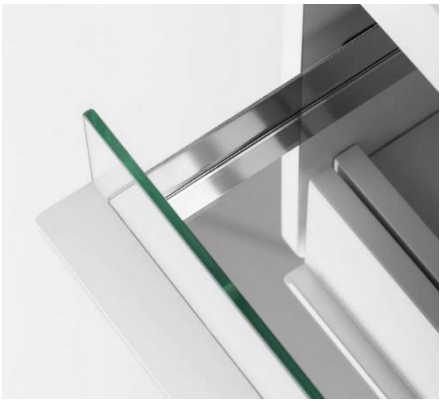

Zintegrowane gniazda zasilania

Pomocnik posiada tylny panel z trzema gniazdami sieciowymi oraz dwoma portami USB i jednym USB-C, co umożliwia wygodne podłączenie różnego rodzaju urządzeń.



Ergonomia pracy

- Przelotki na kable umieszczone w ściankach przy górnej szufladzie.
- Zintegrowany uchwyt na lampę-lupę pozwala na stabilne mocowanie ramienia lampy blisko pola zabiegowego.
- Praktyczne kółka ułatwiające sprawne przemieszczanie szafki w obrębie gabinetu.

Konserwacja i pielęgnacja produktu

- Lekkie zanieczyszczenia powierzchni oraz kurz należy regularnie usuwać za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
- W przypadku tłustych lub uporczywych plam należy najpierw przetrzeć obudowę ściereczką nasączoną roztworem z delikatnego detergentu, a następnie wytrzeć całą powierzchnię do sucha.
- Nie należy używać mocnych rozpuszczalników, takich jak benzen, benzyna czy rozcieńczalniki, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić strukturę powłoki lakierniczej.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać w pomieszczeniach o zbyt dużej wilgotności.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia od -5°C do +50°C oraz przy względnej wilgotności powietrza w zakresie od 45% do 85%.

Wymiary produktu



Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu szafki, należy przeprowadzić poniższą procedurę kontrolną przed skontaktowaniem się z serwisem:

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Procedura naprawcza
Z wnętrza korpusu dobiegają nietypowe dźwięki, a konstrukcja wpada w zauważalne wibracje.	Poluzowanie śrub montażowych w trakcie eksploatacji.	Należy dokładnie sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby łączące elementy konstrukcyjne szafki.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób w bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.