ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo 557A s vaničkami




Dovozce:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod k použití.

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že křeslo je funkční.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.


Upozornění! Děti a nezkušené osoby nesmějí tento přístroj používat. Děti musí být pod dohledem a nesmějí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry:

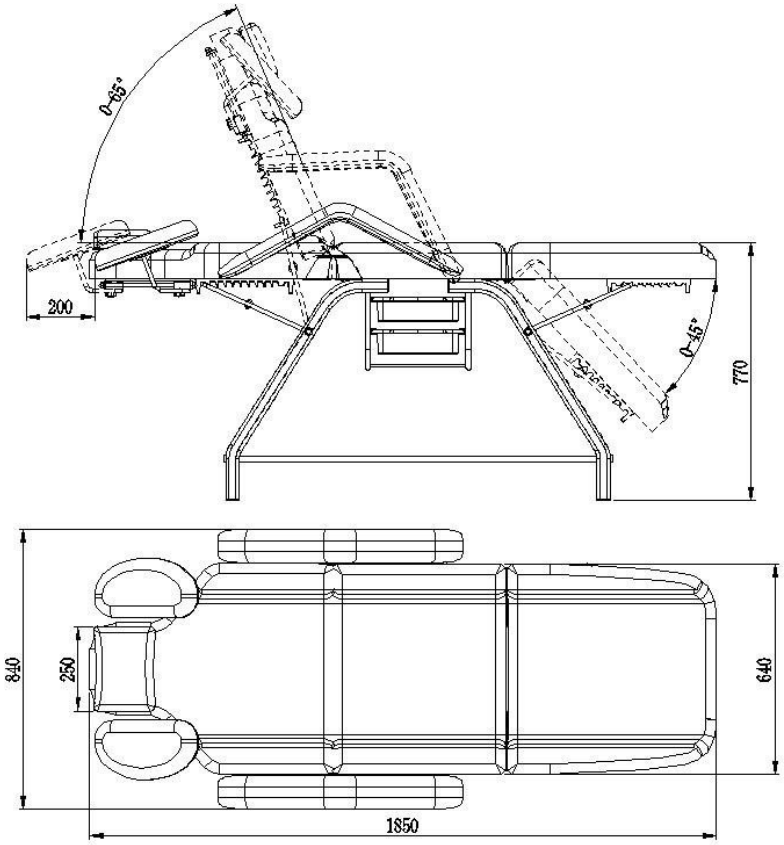


Návod k montáži zařízení:


Namontujte rám křesla. Položte lehátko na rovný a pevný povrch a poté k němu pomocí šroubů připevněte rám křesla. Postupně nasuňte: plochý nosník (1), poté spojovací prvek (2) a šroub (3).

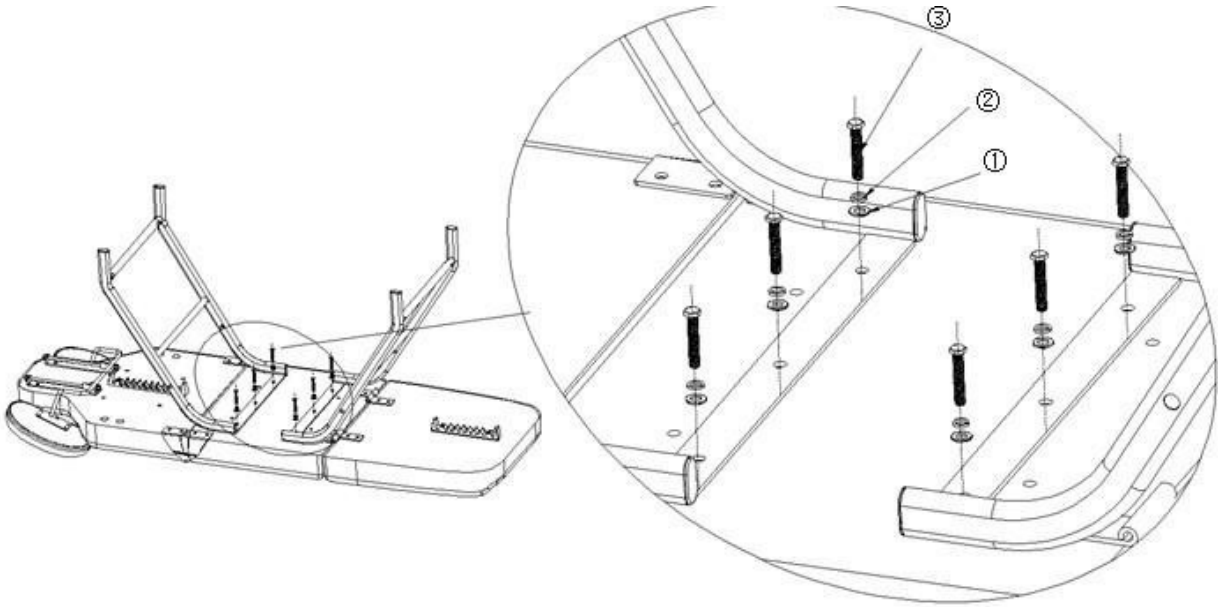


Namontujte držák podnosu:
Nasaďte držák podnosu na rám a připevněte jej šrouby.

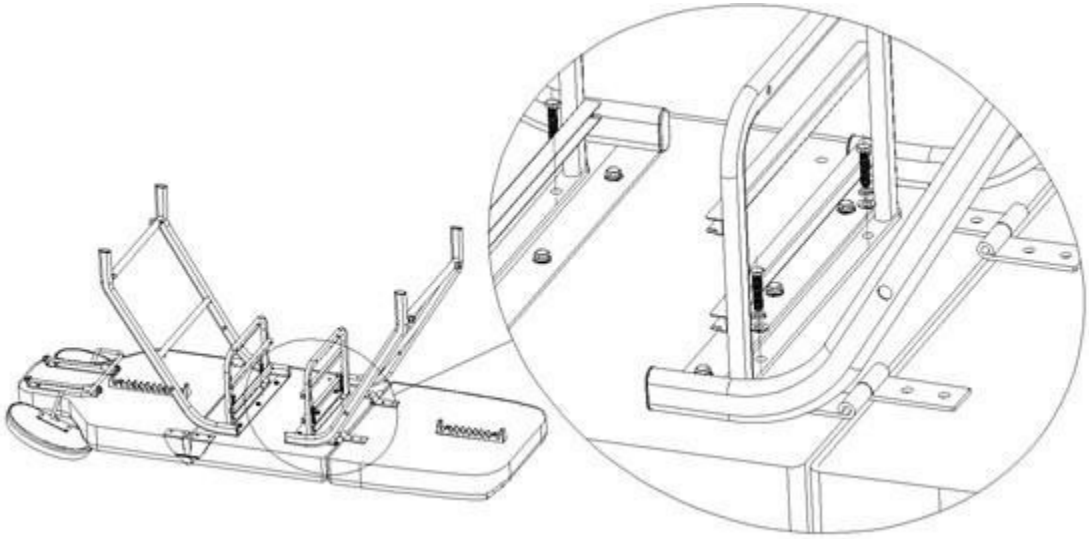


Poté spojte držák podnosu s spojovací trubkou a utáhněte jej šrouby, jak je znázorněno na obrázku níže.

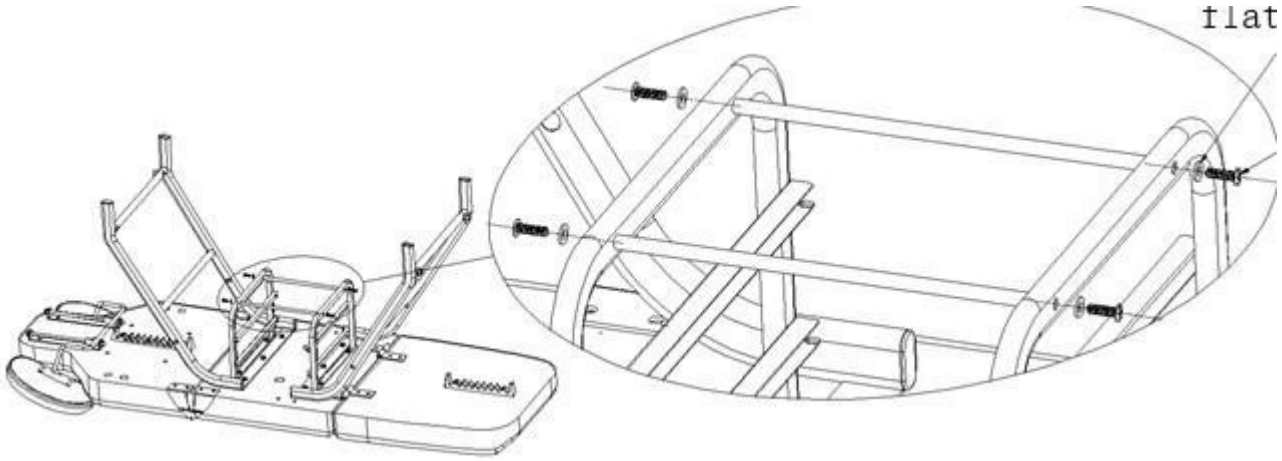

Upevněte spojovací tyč rámu křesla: připevněte spojovací tyč do 4 otvorů v nohách křesla pomocí šroubů.

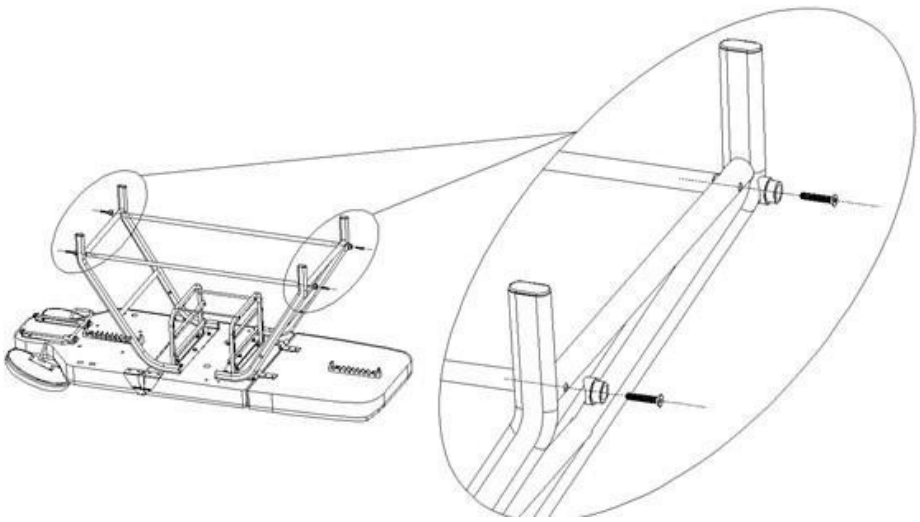


Namontujte ovladač opěradla a podnožky na obě strany nohou křesla pomocí šroubů (kratší pružina pod opěradlem a delší pod podnožkou):

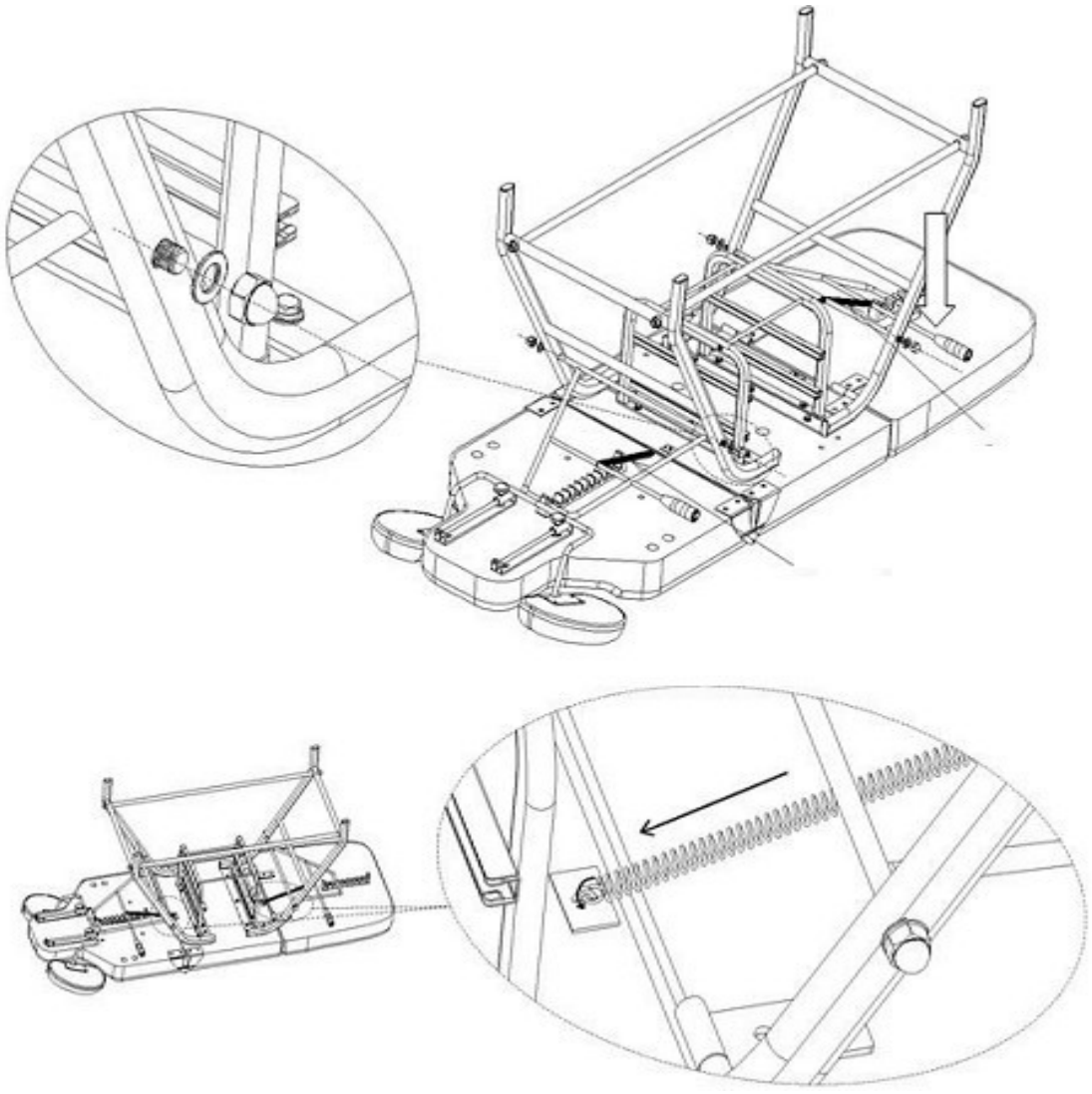

Namontujte otočný knoflík na loketní opěrku:


Nasměrujte knoflík do montážního otvoru loketní opěrky a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.

Povolte knoflík, abyste posunuli polohu loketní opěrky, jak je znázorněno na obrázku.

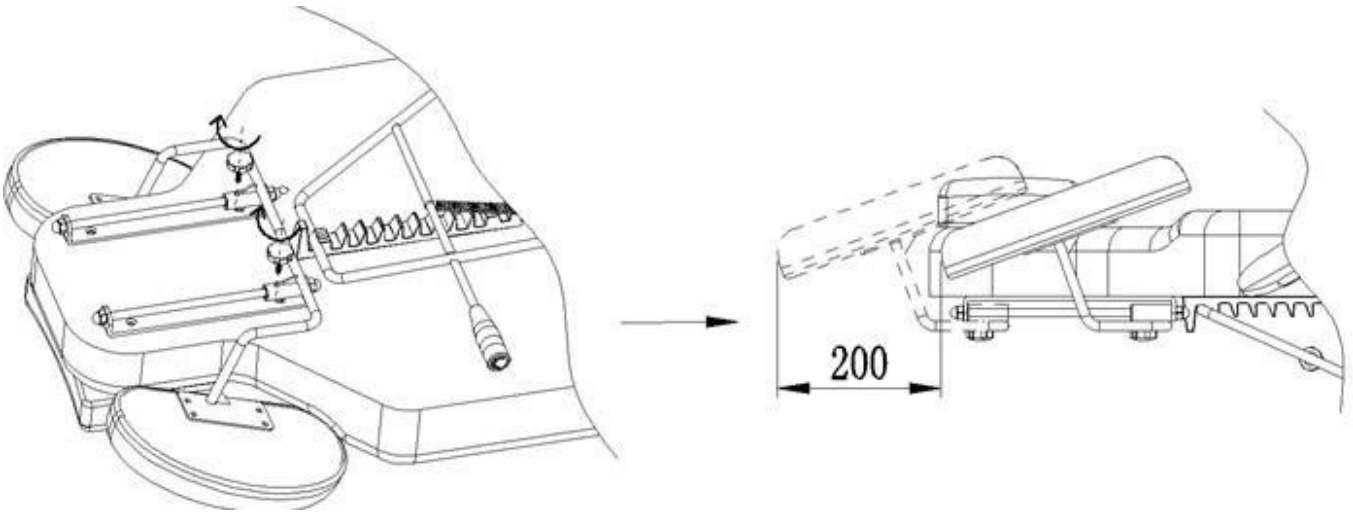


Instalace loketní opěrky:

Zasuňte loketní opěrku do otvoru na boku opěradla. Loketní opěrka by měla být pevně uchycena. Otočte ji doprava nebo doleva, aby správně zapadla na místo.

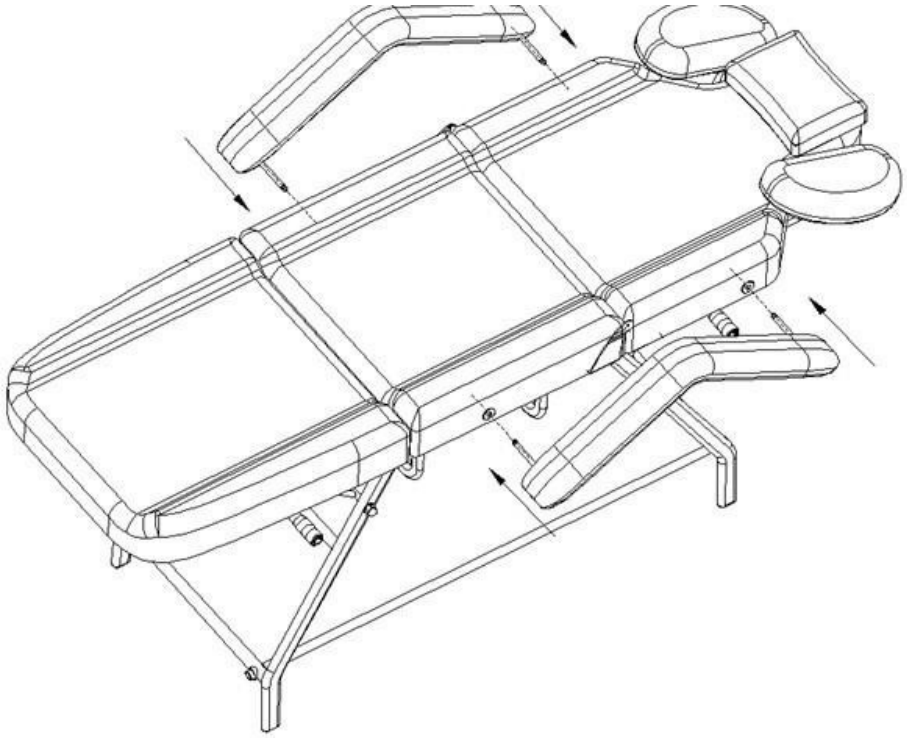

Nainstalujte zásobník podle níže uvedeného obrázku. Zasuňte zásobník do vodítek pod sedadlem.

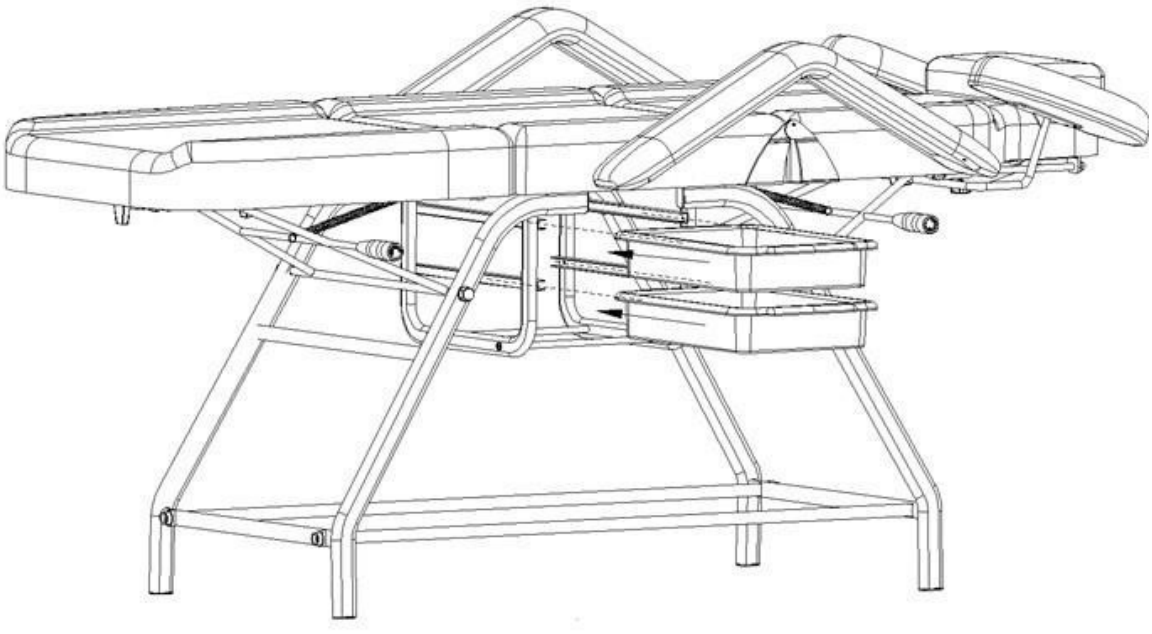

Funkce sedadla:

1. Zvedání opěradla

Naklápění opěradla a sklopení podnožky lze nastavit pomocí ruční páčky. Opěradlo i podnožka mají samostatné páčky, díky čemuž lze výšku každé části nastavit zvlášť. To umožňuje přizpůsobit nastavení křesla individuálně potřebám klienta, aby byl prováděný zákrok co nejpohodlnější. Křeslo lze sklopit až do polohy lehátka.

Chcete-li zvednout opěradlo, uchopte páku, zvedněte ji nahoru a nastavte na požadovanou výšku.

2. Sklápění opěradla
   Držte opěradlo křesla a druhou rukou uchopte rukojeť páky a spouštějte ji dolů, dokud nedosáhnete požadované polohy. Jakmile dosáhnete požadované výšky, páku pusťte.



Čištění a dezinfekce zařízení:

• Aby se povrch křesla udržel v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a dezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou za měsíc.

I Kovové a plastové povrchy

• K čištění kovových a plastových povrchů a ovládacích prvků je otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů se dobře hodí malý kartáček. Nepoužívejte příliš velké množství čisticího prostředku. Poté zařízení dezinfikujte vhodným dezinfekčním prostředkem.

II Nerezové povrchy

• Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít amoniak a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaké vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu, nevystavujte zařízení podmínkám, které by mohly vést k znečištění kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch křesla

• Povrch křesla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým, měkkým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání zařízení výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět výhradně pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo s mokrýma rukama – aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo bylo poškozeno jeho pouzdro.

5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do otvoru v zařízení nevkládejte žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a obraťte se na prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení, aby byly s ním spojené rizika srozumitelné.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.

5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Vyřazená elektrická zařízení, příslušenství a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat do kontejnerů na domácí odpad . Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použitá elektrická zařízení sbírat odděleně a následně je odevzdat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Na konci životnosti obsahují i stará zařízení plně funkční součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k opětovnému zpracování. Proto je třeba je předat do příslušných sběrných míst, stejně tak je lze předat také společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení je třeba skladovat v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy se zařízení nesmí házet ani upouštět, nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.