ACTIVESHOP®

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Kosmetikstuhl 557A mit Ablagefächern




**Importeur:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, Gebäude
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Lesen Sie vor der Verwendung des Kosmetikstuhls die Gebrauchsanweisung durch.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionsfähig ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl an dem Ort auf, an dem er verwendet werden soll.


**Hinweis!** Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

**Abmessungen:**

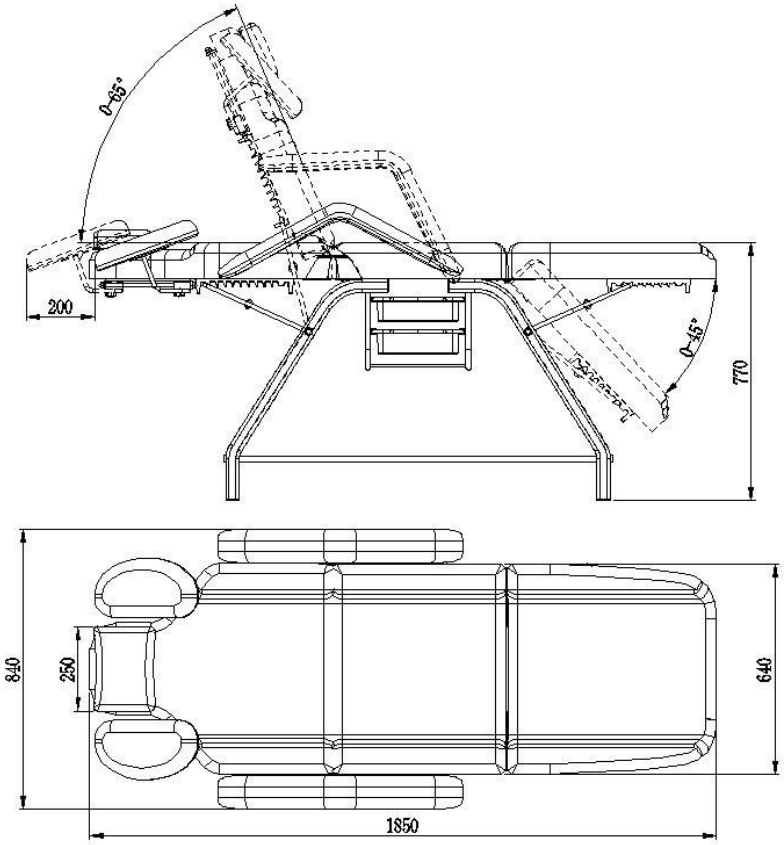



**Montageanleitung**:


Montieren Sie das Gestell des Sessels. Legen Sie die Liegefläche auf eine ebene, stabile Unterlage und befestigen Sie das Gestell des Sessels mit Schrauben an der Liegefläche. Setzen Sie nacheinander folgende Teile ein: die flache Halterung (1), dann das Verbindungsstück (2) und die Schraube (3).

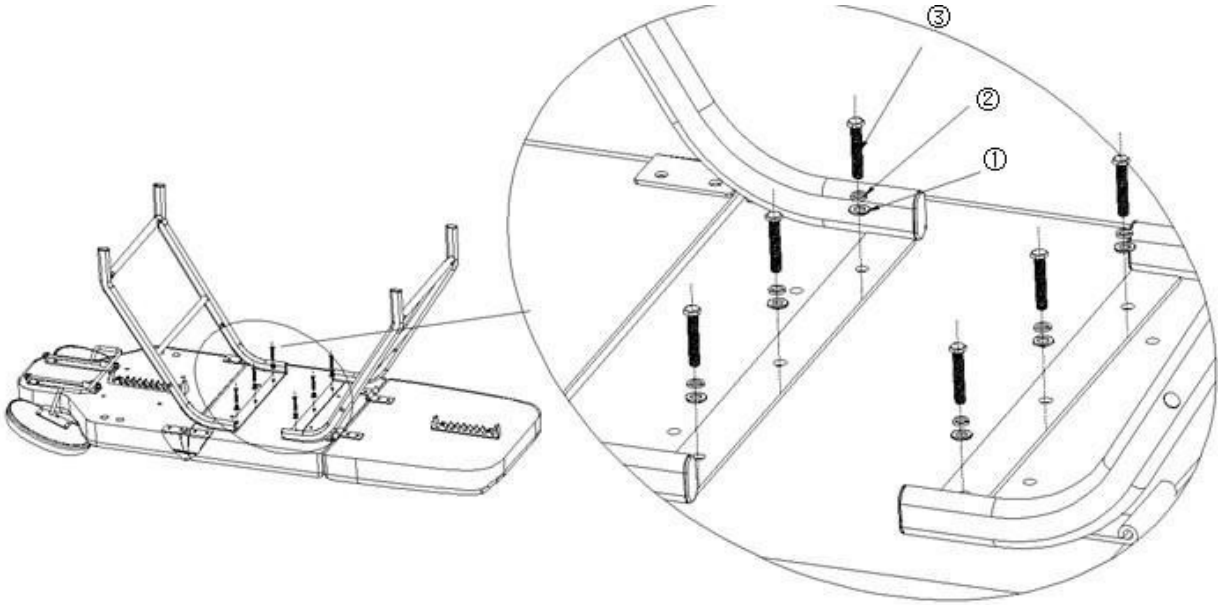


Montieren Sie die Ablagehalterung:
Setzen Sie die Ablagehalterung auf das Gestell und befestigen Sie sie mit Schrauben.

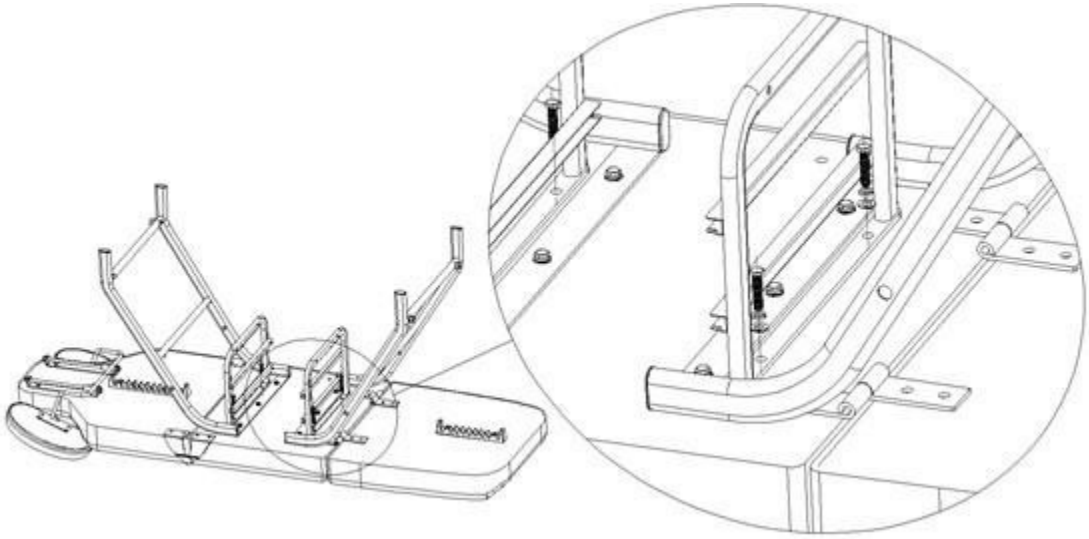


Verbinden Sie anschließend die Ablagehalterung mit dem Verbindungsrohr und ziehen Sie sie mit Schrauben fest, wie auf dem Bild unten zu sehen.

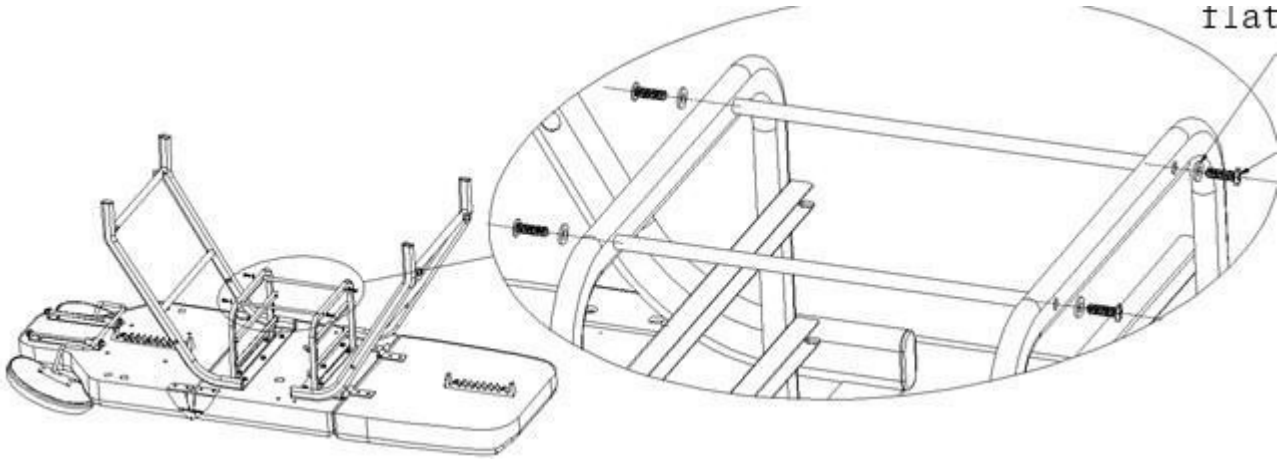


Befestigen Sie die Verbindungsstange des Sesselrahmens: Befestigen Sie die Verbindungsstange mit Schrauben an den 4 Löchern in den Sesselbeinen.

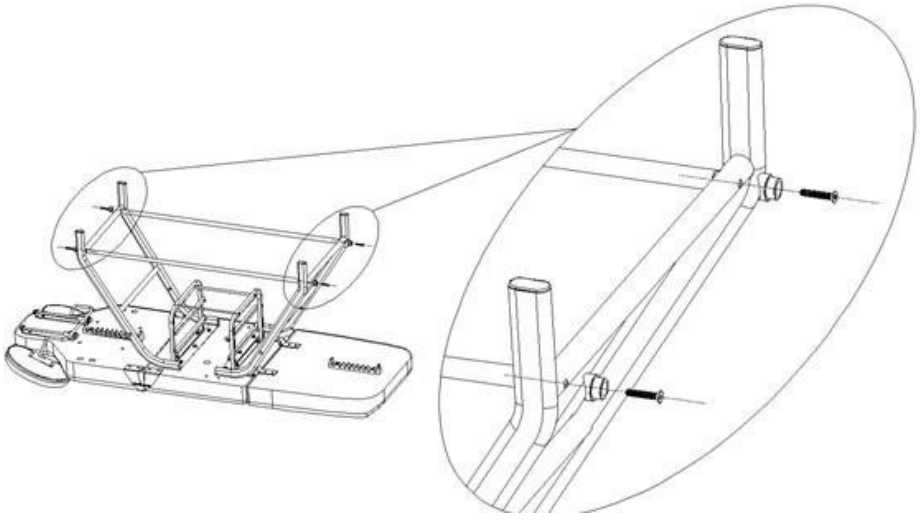


Befestigen Sie den Verstellmechanismus für Rückenlehne und Fußstütze auf beiden Seiten der Stuhlbeine mit Schrauben (die kürzere Feder unter der Rückenlehne, die längere unter der

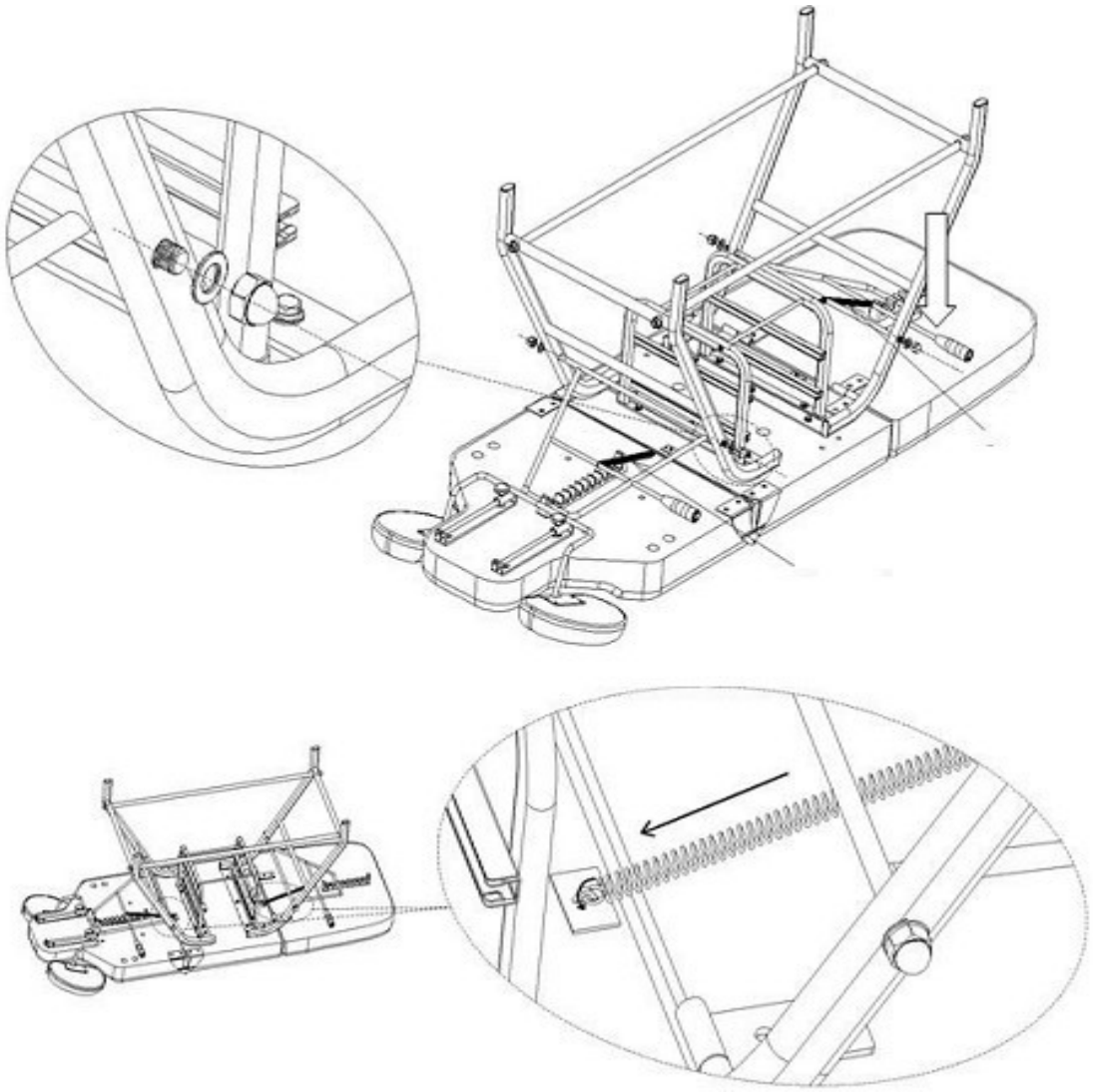

Fußstütze):


Montieren Sie den Drehknopf der Armlehne:

Richten Sie den Drehknopf auf die Befestigungsöffnung der Armlehne aus und ziehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Lösen Sie den Drehknopf, um die Position der Armlehne wie auf dem Bild gezeigt zu verstellen.

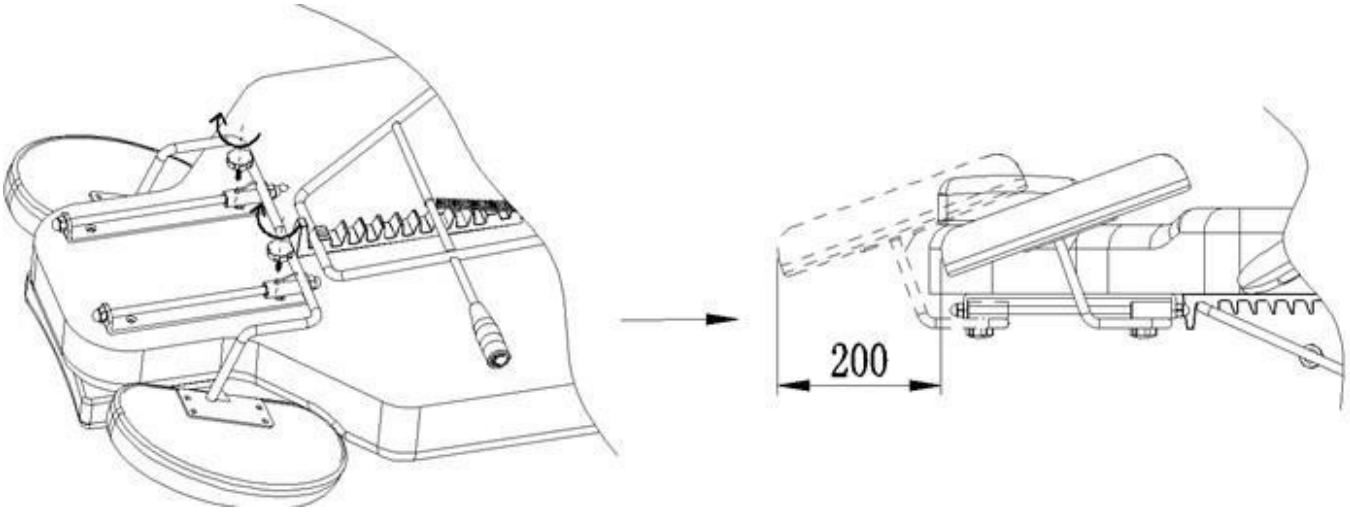


Montage der Armlehne:

Schieben Sie die Armlehne in die Öffnung an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte fest sitzen. Drehen Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig einrastet.

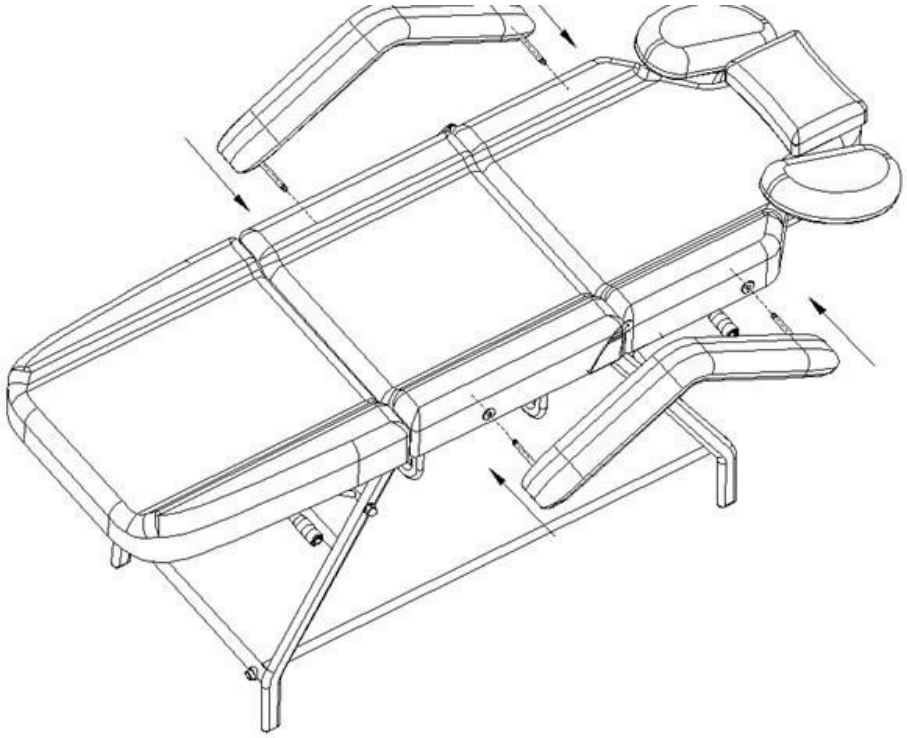

Setzen Sie den Behälter wie auf dem folgenden Bild gezeigt ein. Schieben Sie den Behälter in die Führungen unter dem Sitz.

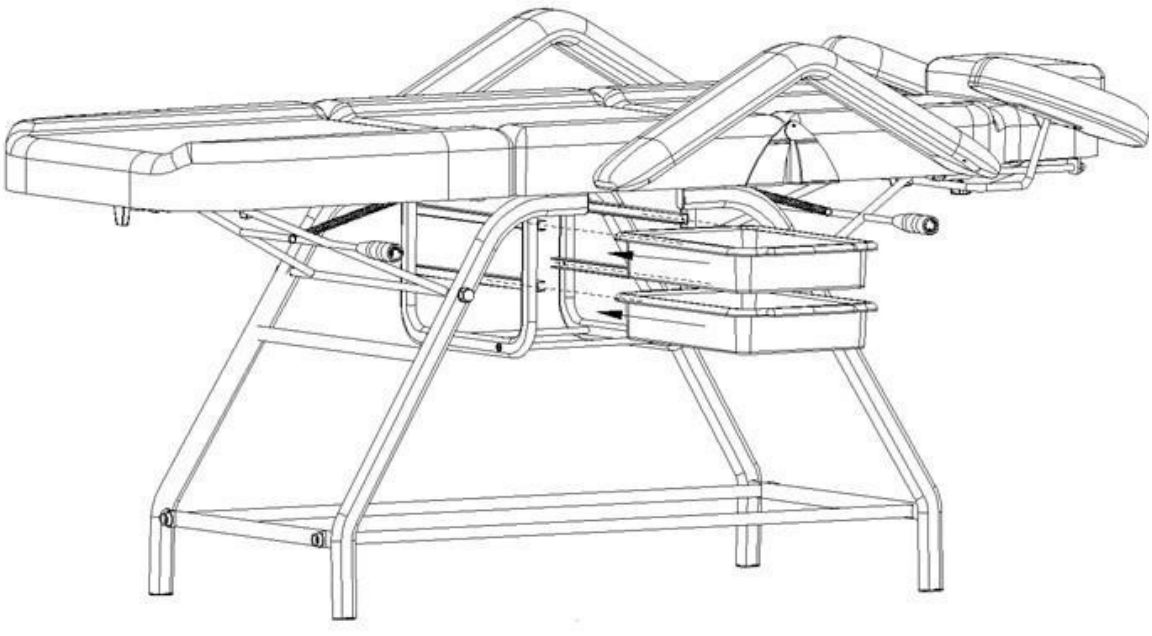

Funktionen des Sitzes:

1. Anheben der Rückenlehne

Die Neigung der Rückenlehne und der Fußstütze lässt sich mit einem manuellen Hebel einstellen. Sowohl die Rückenlehne als auch die Fußstütze verfügen über separate Hebel, sodass die Höhe jedes Teils individuell reguliert werden kann. So lässt sich der Sessel ganz nach den Bedürfnissen des Kunden einstellen, damit die Behandlung so komfortabel wie möglich ist. Der Sessel lässt sich bis in eine Liegeposition ausklappen.

Um die Rückenlehne anzuheben, greifen Sie den Hebel, ziehen Sie ihn nach oben und stellen Sie ihn auf

die gewünschte Höhe ein.

2. Rückenlehne absenken
   Halten Sie die Rückenlehne fest und greifen Sie mit der anderen Hand den Hebelgriff, um den Stuhl nach unten zu bewegen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Lassen Sie den Hebel los, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist.



**Reinigung und Desinfektion des Geräts:**

• Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, sollte sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

**I Metall- und Kunststoffoberflächen**

• Um Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente zu reinigen, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen oder Ecken eignet sich eine kleine Bürste gut. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit für das Gerät. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.

**II Oberflächen aus Edelstahl**

• Am besten eignet sich eine milde Reinigungslösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie chlorhaltige Lösungen.

**III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen**

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verschmutzung durch Flüssigkeiten führen könnten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

**IV Oberfläche des Sessels**

• Wischen Sie die Oberfläche des Sessels gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und reiben Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

## SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden – damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät ist umgestürzt oder das Gehäuse ist beschädigt.

5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion Funktionsweise des Geräts, dessen Beschädigung oder sogar eines Brandes.

## ACHTUNG:

1. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen in der Nähe befinden, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts

verfügen.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

## ENTSORGUNG DES GERÄTS



Ausgediente Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sind gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren zu übergeben. Elektrogeräte dürfen nicht in Behälter für Hausmüll geworfen werden. Es ist die Vorschriften zur Entsorgung dieser Art von Geräten zu befolgen. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten auch Altgeräte wertvolle, recycelbare Bestandteile, weshalb sie der Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Geben Sie sie daher bitte an den entsprechenden Sammelstellen ab; alternativ können Sie sie auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte ausschließlich in der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen –20 °C und +50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.