ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Azzurro 891




Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí b ý t pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry spotřebiče:

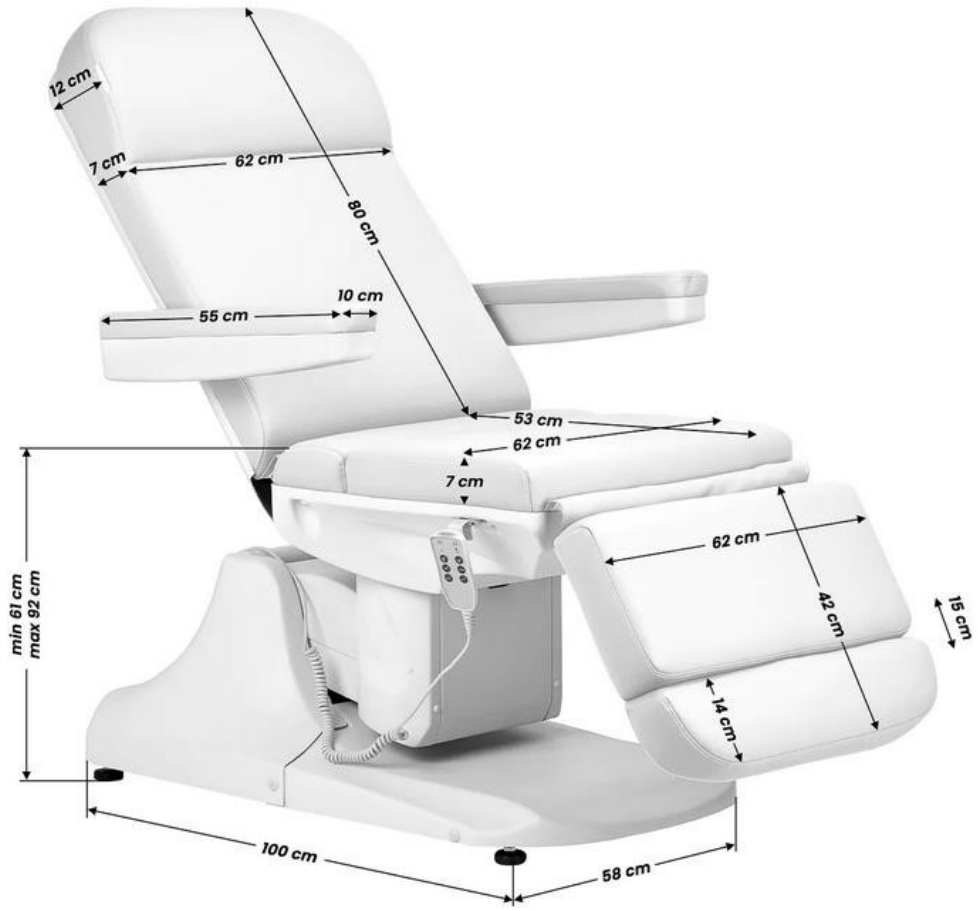

Spotřebič se ovládá dálkovým ovladačem.

Funkce dálkového ovládání:



1. Nastavení výšky sedadla v rozmezí 61-92 cm (stisknutím se sedadlo zvedne nebo sníží).

2. Nastavení úhlu opěradla

3. Nastavení opěrky nohou (stisknutím změníte polohu opěrky nohou).

Nastavení opěrky nohou:

Opěrka nohou má možnost nastavení a lze ji prodloužit v rozsahu 0-15 cm. Pro prodloužení opěrky nohou otočte knoflíkem na spodní straně a opěrku nohou prodloužte na požadovanou délku.



Čištění a dezinfekce stroje

Před čištěním přístroj odpojte od sítě.

Chcete-li udržet povrch židle v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlepší funguje nejlépe je čištění s jemným roztokem čisticího prostředku. Čpavek i většinu rozpouštědel lze použít k odstranění odolných skvrn. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a n e v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. Napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.
Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Řešení problémů

Problém	**Příčina**	**Způsob řešení**
Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači dálkový ovladač nereaguje.	Funkce daného tlačítka již dosáhla svého maxima.	1. Zkuste stisknout jiné tlačítko
Přístroj vydává při nastavování podivné zvuky výšky	Uvolněný šroub	Utáhněte všechny šrouby