ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón de estética eléctrico Azzurro 891




Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y realice los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón cosmético en el lugar donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.

Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón cosmético.

Dimensiones del aparato:

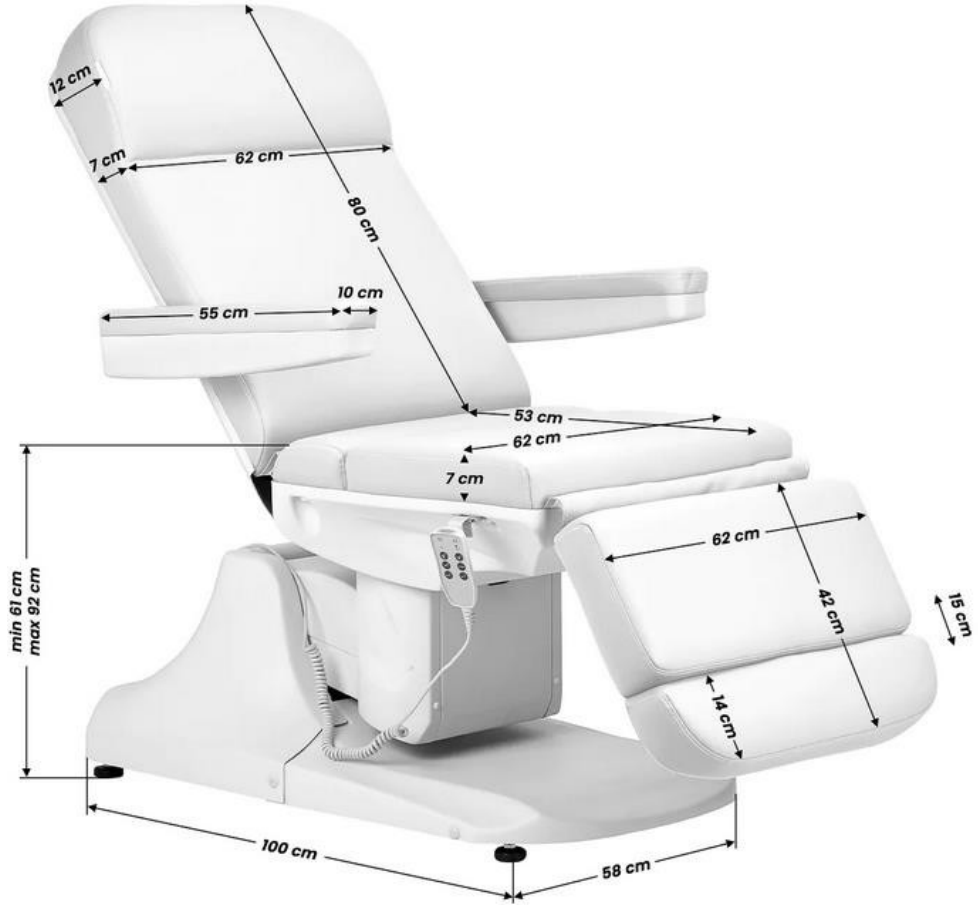

El aparato se controla con un mando a distancia.

Funciones del mando a distancia:



1. Ajuste de la altura del asiento de 61-92 cm (pulse para subir o bajar el asiento).

2. Ajuste del ángulo del respaldo

3. Ajuste del reposapiés (pulse para cambiar la posición del reposapiés)

Ajuste del reposapiés:

El reposapiés tiene una opción de ajuste y puede extenderse de 0-15cm. Para extender el reposapiés, gire el mando de la parte inferior y extienda el reposapiés hasta la longitud deseada.



Limpieza y desinfección de la máquina

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

Para mantener la superficie de la silla en buen estado, límpiela con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Recomendamos realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Un cepillo pequeño funcionará bien para limpiar zonas o rincones de difícil acceso. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Mejor funciona mejor es limpiar con una solución detergente. Amoníaco i a mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del asiento

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

Desenchufe el aparato antes de proceder al mantenimiento.

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón de belleza eléctrico ni los accesorios si no funcionan correctamente.
4. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Medidas de mantenimiento

Compruebe los mandos y su cableado una vez a la semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:

1. Cable de alimentación y su fijación
2. Cableado del motor
3. La caja de control y su cableado
4. La fijación de los accesorios
5. El funcionamiento normal del sistema de cierre

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador/unidad de control.

Si alguna pieza del equipo está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

Solución de problemas

Problema	**Causa**	**Método de solución**
Al pulsar un botón del mando a distancia, éste no responde	La función del botón en cuestión ya ha alcanzado su máximo.	1. Intente pulsar otro botón
El aparato hace ruidos extraños al ajustar la altura	Tornillo flojo	Apriete todos los tornillos