ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Azzurro 891 elektrische cosmetische stoel




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Lees de instructies en voer de volgende stappen uit voordat u de cosmeticastoel in gebruik neemt:

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal verwijderd is.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de cosmeticastoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.
4. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Let op! Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.

Afmetingen van het apparaat:

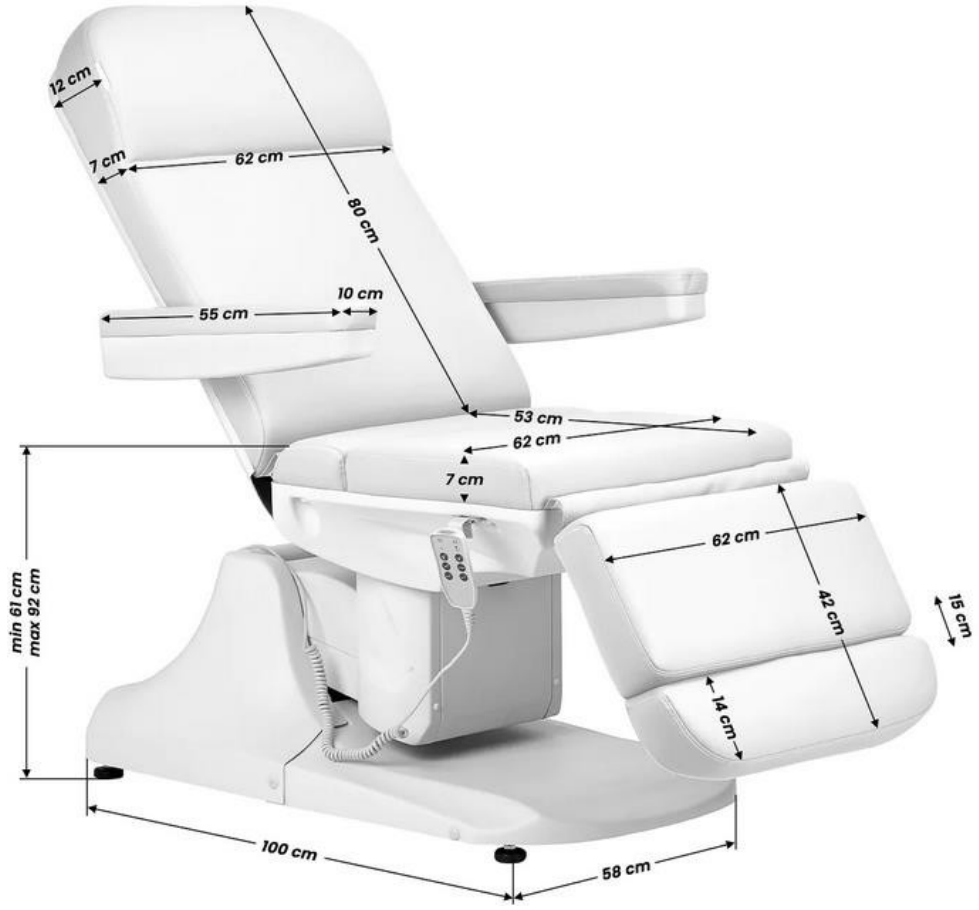

Het apparaat wordt bediend met een afstandsbediening.

Functies van de afstandsbediening:



1. Zithoogteverstelling van 61-92cm (indrukken om de stoel hoger of lager te zetten).

2. Rugleuninghoekinstelling

3. Voetsteunverstelling (indrukken om de positie van de voetsteun te wijzigen)

Voetsteunverstelling:

De voetsteun heeft een verstelmogelijkheid en kan worden uitgeschoven van 0-15cm. Om de voetsteun te verlengen, draai je aan de knop aan de onderkant en schuif je de voetsteun uit tot de gewenste lengte.



Reiniging en desinfectie van de machine

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Maak de stoel regelmatig schoon om het oppervlak in goede conditie te houden. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Wij raden aan de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

Beste werkt het best is schoonmaken met een milde oplossing reinigingsmiddel. Ammoniak i De meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Zitvlak

- Veeg het oppervlak van het zadel gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Haal voor onderhoud de stekker uit het stopcontact.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant goedgekeurd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische schoonheidsstoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de staat en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:

1. Stroomkabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. De schakelkast en de bedrading ervan
4. Of er accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/bedieningseenheid openen of vervangen. Als een onderdeel van de apparatuur beschadigd is, trekt u de stekker uit het stopcontact en stopt u het gebruik. Breng vervolgens de servicedienst op de hoogte.

Problemen oplossen

Probleem	**Oorzaak**	**Oplossingsmethode**
Als er op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt, reageert de afstandsbediening niet	De functie van de knop in kwestie heeft zijn maximum al bereikt.	1. Probeer op een andere knop te drukken.
Het apparaat maakt vreemde geluiden bij het aanpassen van de hoogte	Losse schroef	Draai alle schroeven vast