ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Azzurro 891



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

III


CE

Înainte de a utiliza fotoliul cosmetic, citiți instrucțiunile și efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în zona în care va fi utilizat.
4. Conectați ștecherul la o priză adecvată.

Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiunile aparatului:

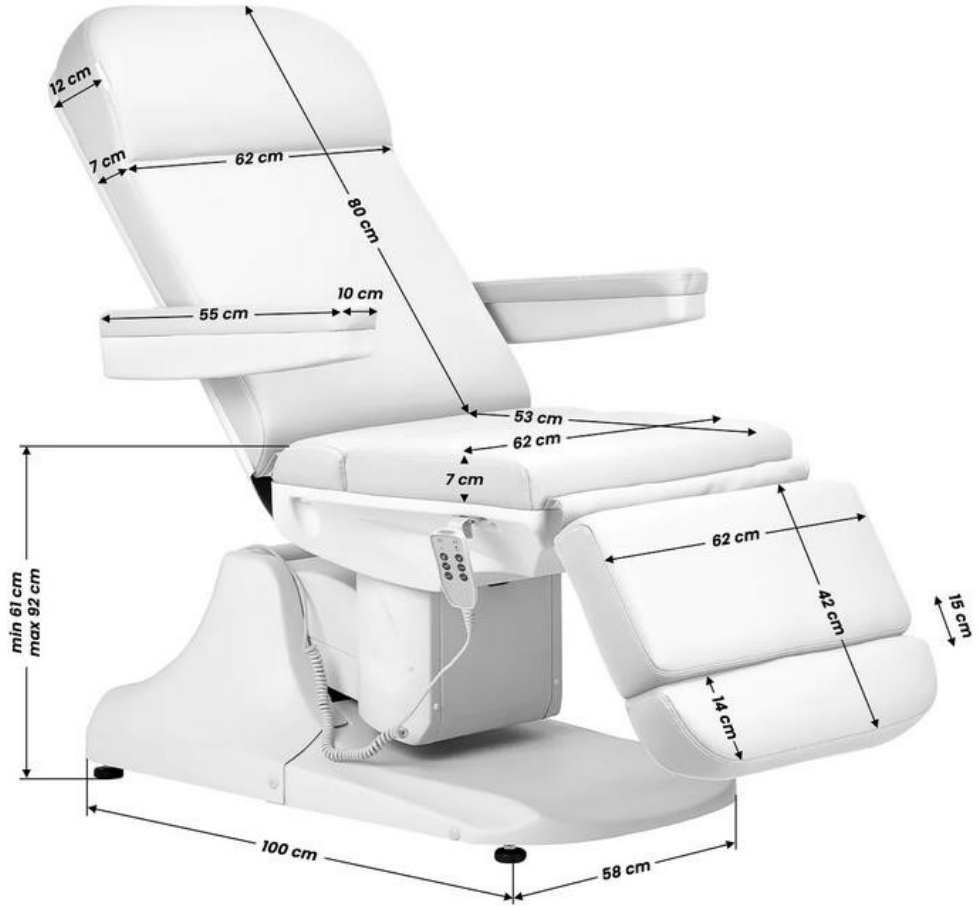

Aparatul este controlat prin telecomandă.

Funcțiile telecomenzii:



1. Reglarea înălțimii scaunului de la 61-92 cm (apăsați pentru a ridica sau a coborî scaunul).

2. Reglarea unghiului spătarului

3. Reglarea suportului pentru picioare (apăsați pentru a schimba poziția suportului pentru picioare)

Reglarea suportului pentru picioare:

Suportul pentru picioare are o opțiune de reglare și poate fi extins de la 0-15cm. Pentru a extinde suportul pentru picioare, rotiți butonul de pe partea inferioară și extindeți suportul pentru picioare la lungimea dorită.



Curățarea și dezinfectarea mașinii

Scoateți unitatea din priză înainte de curățare.

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

Cele mai bune funcționează cel mai bine este curățarea cu o soluție soluție detergent. Amoniac i majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablajul motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă observați defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare/control.
Dacă orice parte a echipamentului este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu îl mai utilizați. Apoi anunțați departamentul de service.

Rezolvarea problemelor

Problema	**Cauza**	**Metoda de soluționare**
Când este apăsat un buton de pe telecomandă, telecomanda nu reacționează	Funcția butonului în cauză a ajuns deja la maximum.	1. Încercați să apăsați un alt buton
Aparatul scoate sunete ciudate atunci când reglați înălțimii	Șurub slăbit	Strângeți toate șuruburile