

Pesapersona meccanica professionale a colonna

- Design classico con quadrante su colonna per una lettura facilitata
- Ruote optional aiutano al trasporto
- Struttura solida e stabile

Funzioni

Peso, regolazione dello zero

Struttura

Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato, con sistema di pesata a doppia molla temprata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato, lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento nel tempo. Pedana in gomma antiscivolo.

Dimensioni

Totale W270 x D400 x H900 mm

Pedana W240-260 x D300 x H85 mm

Colonna Ø60 x H750 mm / Quadrante Ø180 mm

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE

Classe di precisione IIII secondo la norma EN45501

Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745

Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pz dimensioni W300 x D430 x H1040 mm

Peso: netto 7 kg - lordo 10 kg



Il tappetino è removibile per consentire una migliore igienizzazione



Ruote per facilitare il trasporto (optional)



WH200: statimetro telescopico 60-210 cm optional (pag. 62)

GMDN: 38267 - CND: V0399 - Repertorio: 2516414 - con WH200: 2516415

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata
R150A	00021A	150 kg	1000 g	W260 x D300 mm

Accessori inclusi: piedini antiscivolo, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
WH200 statimetro 60-210 cm (pag. 62)	00069AB	Omologazione	AOMOL
Ruote trasporto	00006	Certificato di taratura con masse certificate da Centro LAT Accredia	ACOSITMD
		Certificato di taratura rilasciato da Centro LAT Accredia	ACOLAT2
		Estensione garanzia 5 anni	AGAES
		Verifica periodica 3 anni	AOPER1

Statimetro adulti telescopico

- Misura fino a 225 cm, doppia unità di misura
- Struttura in alluminio anodizzato
- Pratico ed intuitivo grazie all'asta telescopica
- Applicabile alle balance Wunder e a muro

Installabile su balance Wunder

Compatibile con i seguenti modelli:

RH, RA colonna, RB colonna, RW02 CORRIMANO, RW2.0 BASIC, R2020 cavo, WBA


Semplice lettura

Grazie all'asta serigrafata e all'indicatore in rosso la lettura delle misurazioni è intuitiva e semplice



Applicabile a muro

Lo statimetro si può fissare facilmente a una parete tramite l'utilizzo dell'apposito supporto

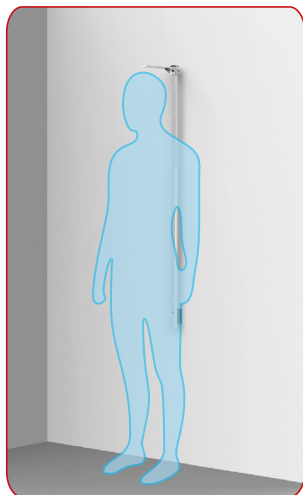

Struttura

Alluminio anodizzato serigrafato con paletta pieghevole in ABS per misurare altezza

Dimensioni

W35 x D55 x H940 mm

Paletta in ABS misura 25 cm

Packaging

1 pz dimensioni W40 x D70 x H1040 mm

Peso: netto 0,7 kg - lordo 1 kg



CND: V030299 - Repertorio: 676627

Modello	WH200	WH200
Codice	00069AB	00069AD
Portata	Da 60 a 210 cm	Da 65 a 225 cm
Unità di misura	cm/pollici	cm/pollici
Divisione	1 mm	1 mm
Garanzia	2 anni	2 anni