ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Hüdrauliline kosmeetikatool Sillon 210



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poola

www.activeshop.com.pl


Rev. A/05/2025

Skannige erinevate keelte jaoks


Mõõtmed:




Paigaldamine:

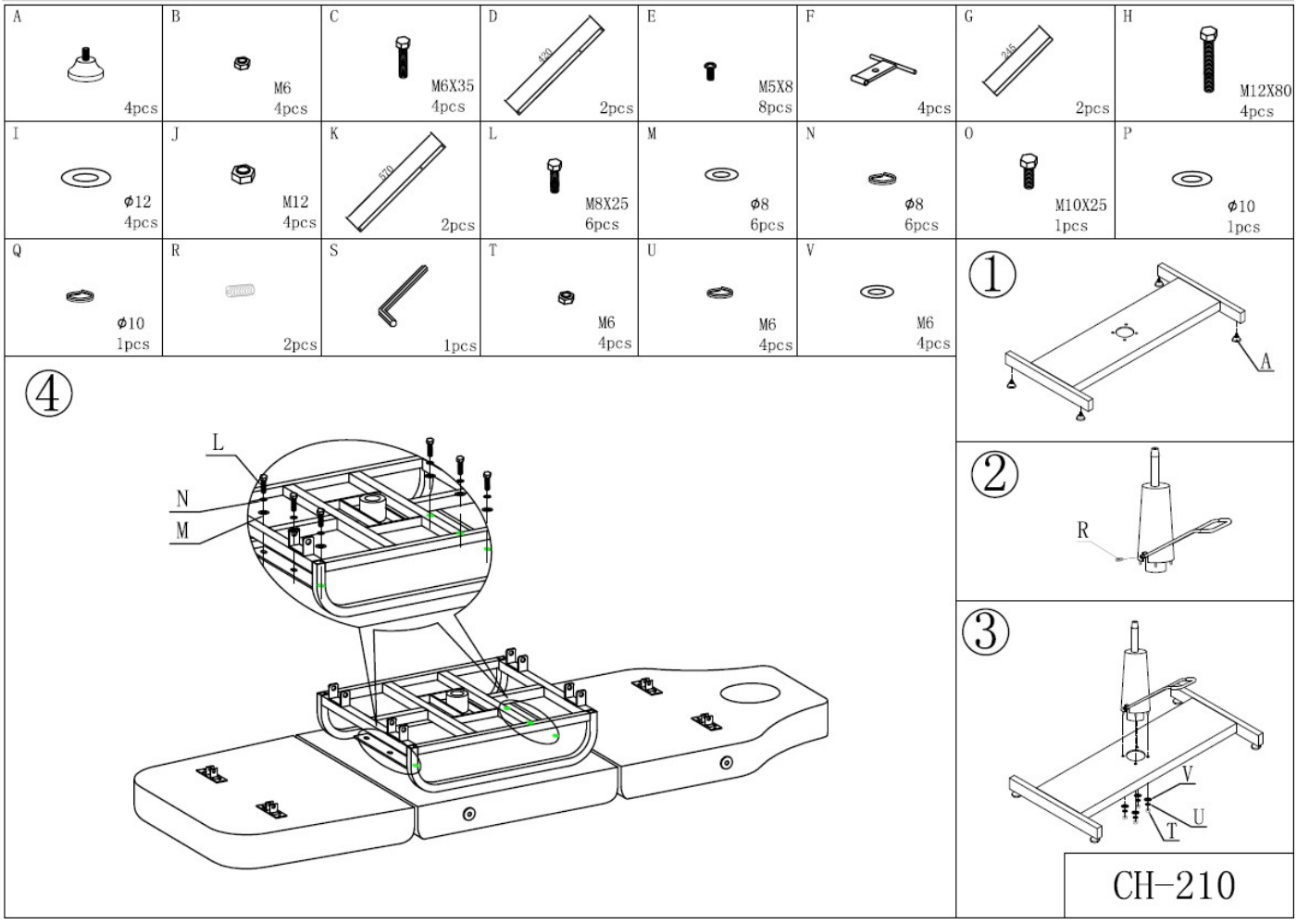


1. Lükake alusplaadid istme alusesse.
2. Paigaldage kõrguse reguleerimise hoob silindrile, kasutades elementi R.
3. Aseta silinder istme alusele ja kinnita see elementidega V, U ja T.
4. Aseta metallist istme raam tooli põhja ja kinnita see elementidega L, M ja N.

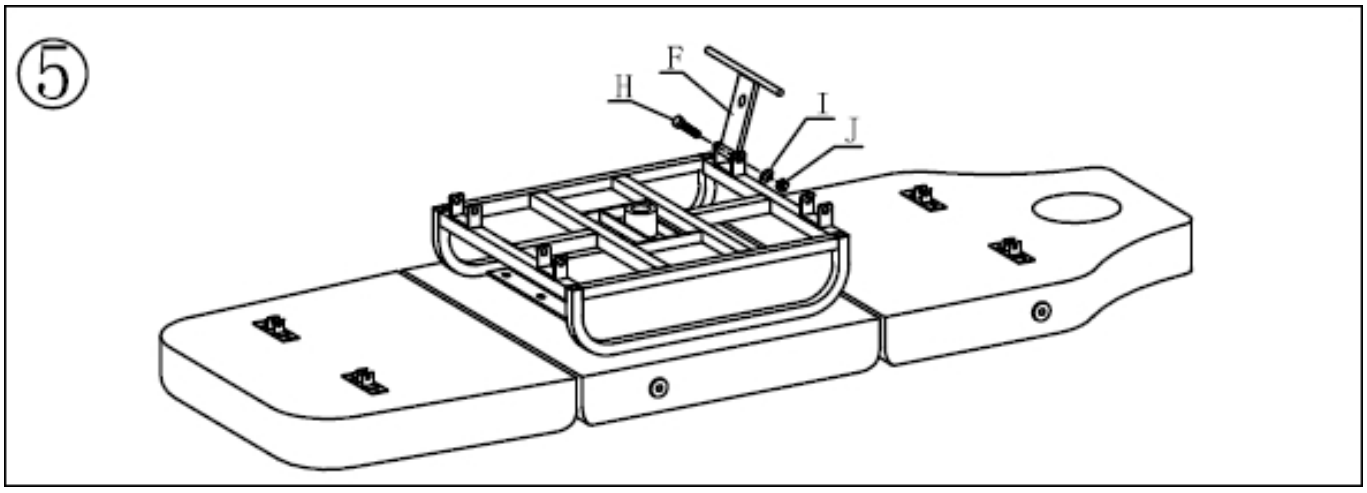


5. Paigaldage element F, kinnitades selle elementidega I, J ja H.

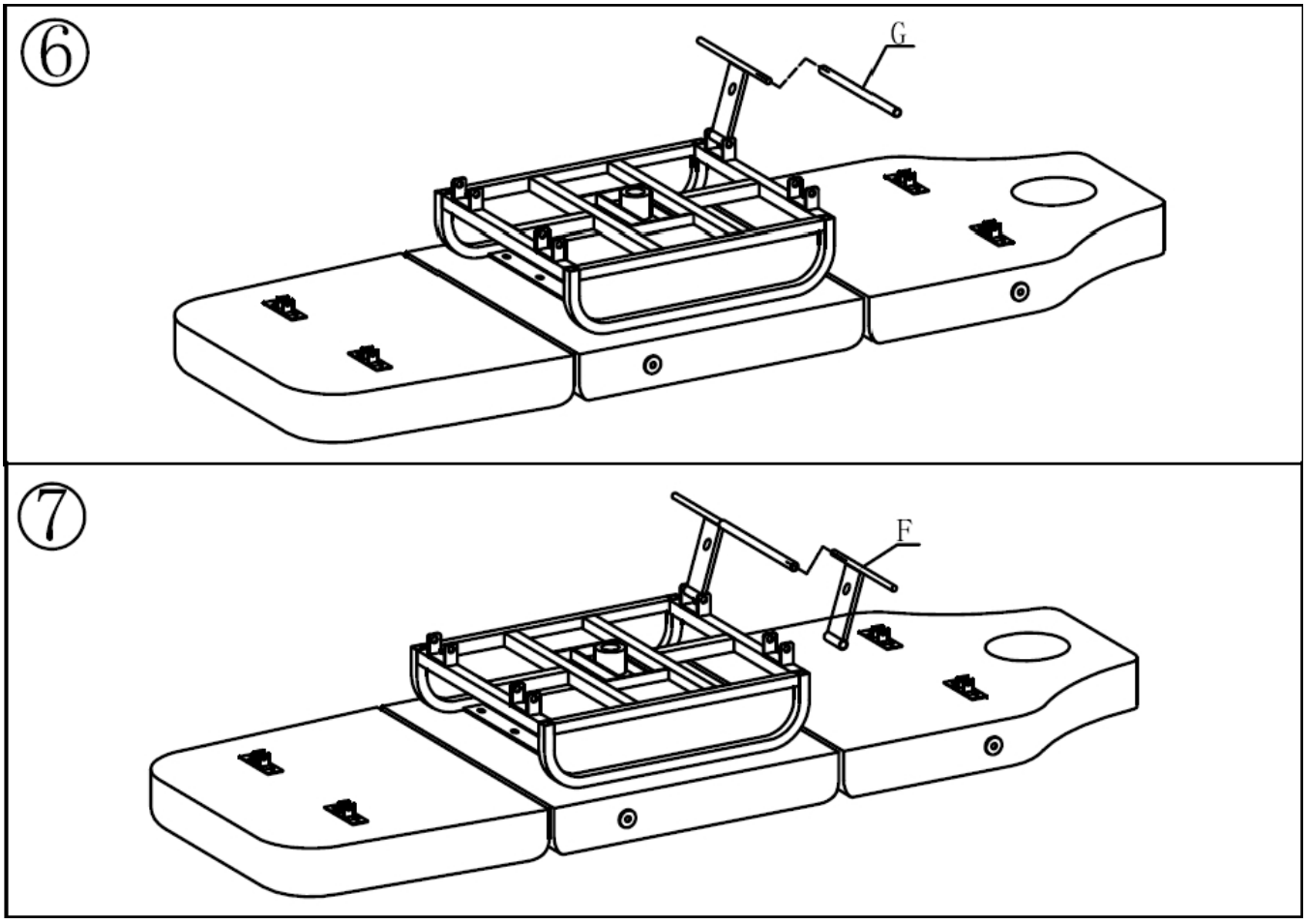


6,7. Kasutage elementi G kahe elemendi F ühendamiseks.

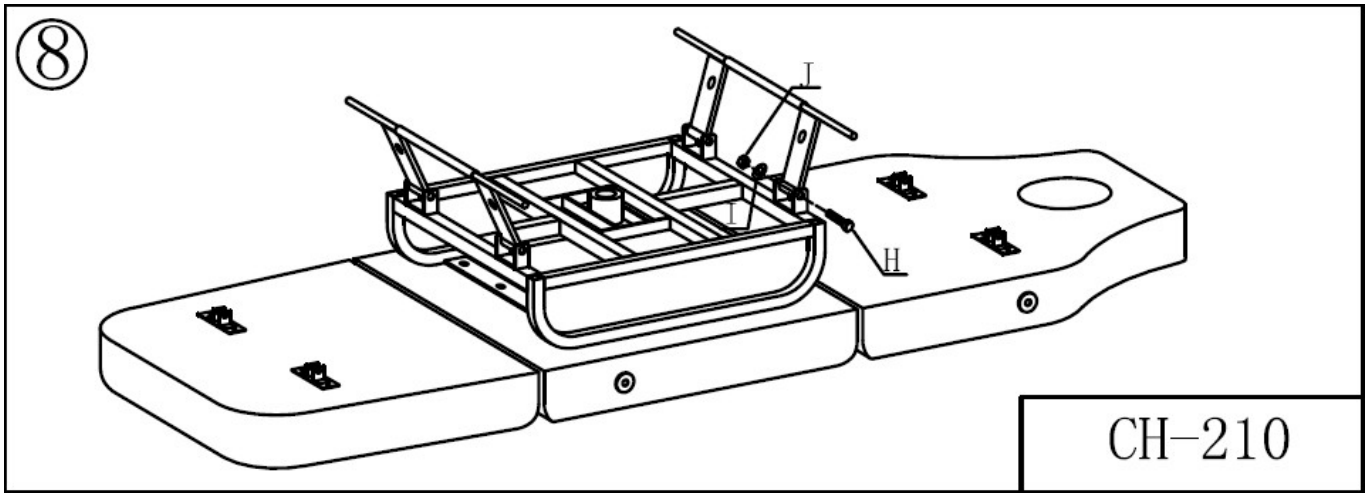


8. Kinnitage osad J ja H abil ning korrake sama teisel pool.

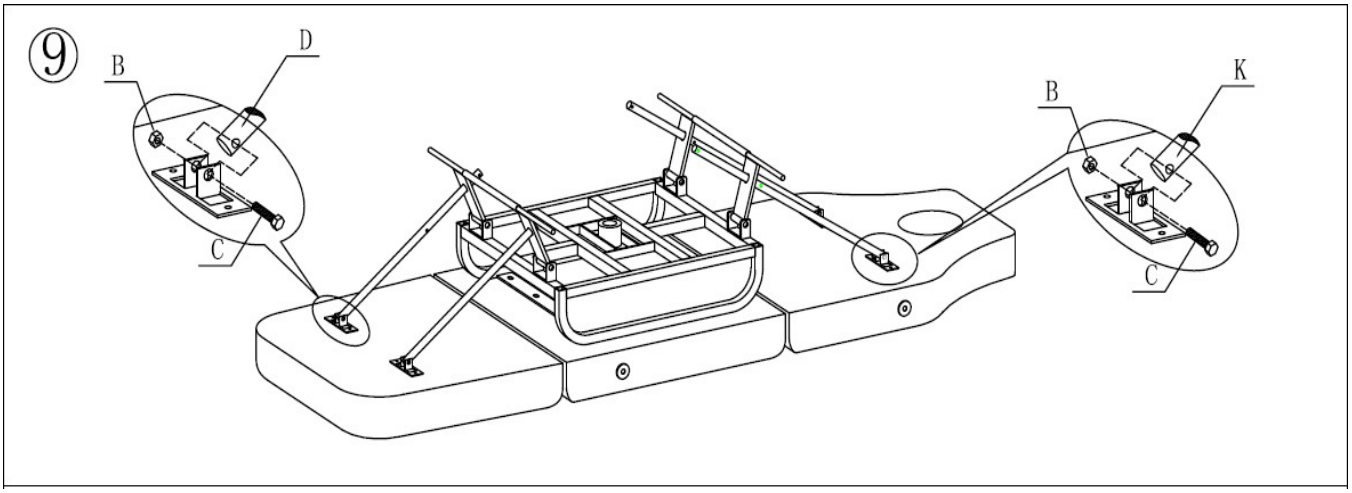

9. Sisestage elemendid D ja K ning kinnitage need elementidega B ja C.

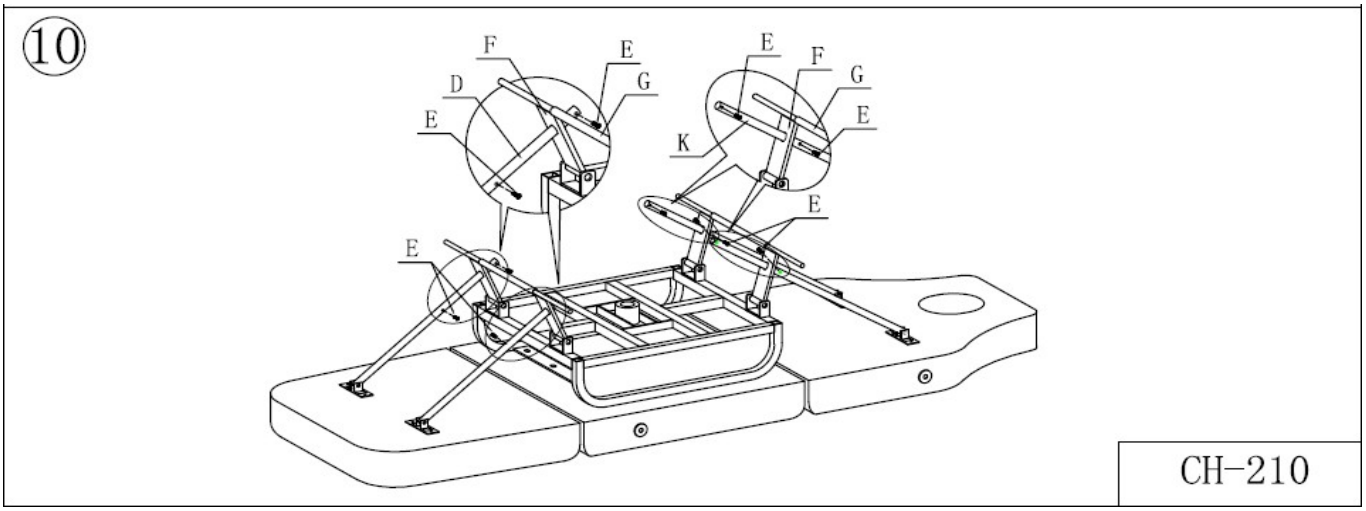

10. Kinnitage toed elementidega E.

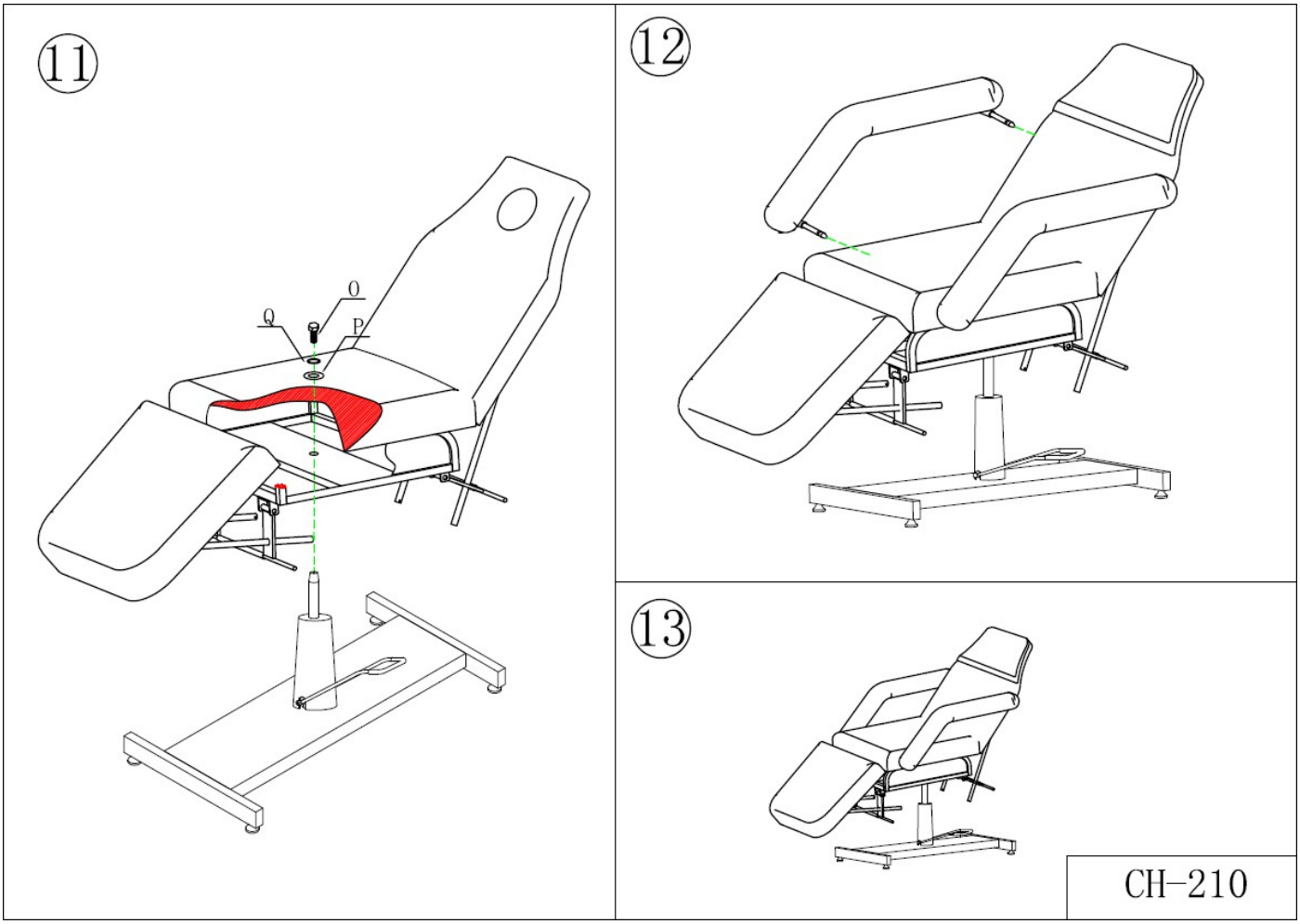

11. Asetage iste silindri teljele ja kinnitage see elementidega Q, P ja O.

12. Sisestage käetoed joonisel näidatud viisil.

Istme funktsioonid:

-Istme tõstmine: tõstke istet, vajutades kangi

-Istme langetamine: suruge alla, kuni iste on täielikult langetatud

-Istme pöörlemise lukustamine: tõstke kangi maksimaalselt üles

Tähelepanu!

Ärge istuge toolile järsult ega visake sellele raskusi. Tooli ei tohi liigutada ega teisaldada, kui sellel on inimesed või muud raskused. Toolile ei tohi astuda jalgade või põlvedega, k i ikuda, istuda käetugedel ega istuda rohkem kui üks inimene.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Et hoida toolipinda heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Puhasta ja desinfitseeri tool pärast iga kasutamist. Soovitav on teha põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metalli- ja plastpinnad

Metall- ja plastpindade ning juhtnuppude puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju puhastusvedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Parim tulemus saavutatakse pehme detergendilahusega. Ammoniaak ja enamik lahusteid sobivad raskesti eemaldatavate plekkide puhastamiseks. Vältige kloori sisaldavaid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (dušš, kõrgsurve veepihusti).

- Ärge puhastage kõrgel temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge asetage seadet tingimustesse, mis võivad põhjustada vedelikuga saastumist.

- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Puhasta istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel puhasta see puhtaks pehme lapiga.

Hooldus:

1. **Igapäevane puhastamine**
   Eemaldage tolm pehme, kuiva lapiga.
2. **Kangekaelse mustuse eemaldamine**
   Nagu teada, on raske eemaldada püsivat mustust tavalise kuiva lapiga. Sellisel juhul tuleb esmalt kasutada pehmet lappi, millele on kantud lahjendatud neutraalset pesuvahendit, ja seejärel pühkida kuiva lapiga.
3. **Benseeni, lahusteid, bensiini ega muid lahusteid kasutada ei tohi.**
   Need ained võivad nahka kahjustada või toodet korrodeerida.
4. **Hooldus ja kasutustingimused**
   Ärge jätke toodet tugeva päikesevalguse või niiskuse kätte. Vastasel juhul võib see toodet kahjustada.

OHUTUSMEETMED

Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.

Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) töötaja.

Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.

Järgmistes juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega:

a) vedelik on sattunud seadmesse, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid,

c) toitejuhtme on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.

Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pistikupesast välja tõmmata pärast iga seadme kasutamist.

Ärge pistke midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.

Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).

Toiteallikas peab vastama nimikilbil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib see rikkuda või isegi põleda.

TÄHELEPANU:

Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.

Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise või vaimse puudega inimesed ning inimesed, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise osas, et seonduvad ohud oleksid arusaadavad.

Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.

Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või elektriseadmega kokkupuutumine võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.

SEADME KÄITLEMINE



Kasutatud elektriseadmed, tööriistad ja pakendid tuleb viia ringlussevõtu keskustesse vastavalt keskkonnakaitse nõuetele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Järgige selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitseks vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- j a elektroonikaseadmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed tuleb koguda eraldi ja seejärel viia kogumispunktidesse.

kasutatud elektroonikaseadmete ja elektriseadmete kogumine. Kasutusaja lõpus sisaldavad ka vanad seadmed täisväärtuslikke ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need anda ringlussevõtuks. Seetõttu tuleb need viia vastavatesse kogumispunktidesse, samuti võib need anda ka firmale ACTIVESHOP Sp. z o.o.

HOIDMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, ega seda mehaanilistele löökidele või ilmastikutingimustele avaldada.