

ACTIVESHOP[®]


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWAX DIAMOND viaszmelegítő
AX900 modell



Importőr:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

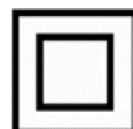

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	220V/240V
Elektromos teljesítmény	100W
Névleges frekvencia	50/60HZ

Figyelem

- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
- Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő névleges feszültségű forrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni.
- A kábelre nem szabad semmilyen nehéz tárgyat helyezni.
- Az eszközt nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a berendezés ütközés vagy leesés következtében megsérül, a készüléket nem lehet tovább használni.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

Tisztítás és tárolás

- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt;
- A készülékhez való speciális viasztisztítószerszel szabaduljon meg a nem kívánt szennyeződésektől.

Összeszerelés és használat



- Helyezze a viaskazettát a fűtőberendezésbe, majd válassza le a készüléket a tápegységről,
- Fordítsa a gombot ON állásba - a piros fény jelzi, hogy a készülék megkezdte működését,
- A készülék működése közben a lámpa kialszik és újra kigyullad, hogy állandóan fenntartsa a viasz hőmérsékletét,
- Várjon körülbelül 15-30 percet a viasz típusától és a beállított hőmérséklettől függően,
- Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze a viasz hőmérsékletét, mielőtt felviszi a bőrre,
- Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg lehűl,
- Ezután tisztítsa meg a készüléket.



Műanyag fedél



Rozsdamentes acél tartály

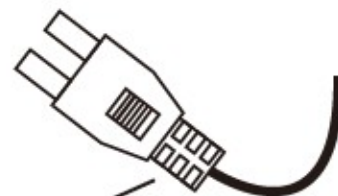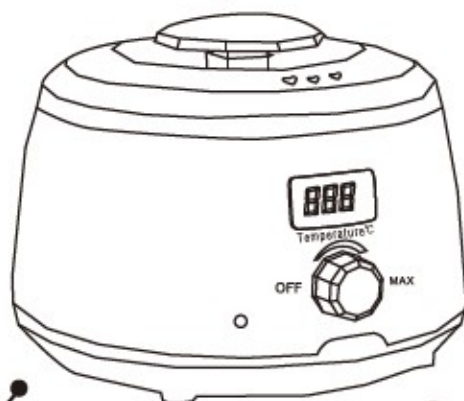

Dugó



**Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás termosztáttal és
visszajelző lámpával**



360°-os fűtőelem

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. a tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén forduljon egy erre felhatalmazott szerződéses szervizzel - ezzel elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiányában tapasztalatlan személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésére kerüljenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein átadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A weboldal alatt

tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

