ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Elektrischer Kosmetikstuhl Azzurro 708A




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.


Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

Abmessungen des Geräts:

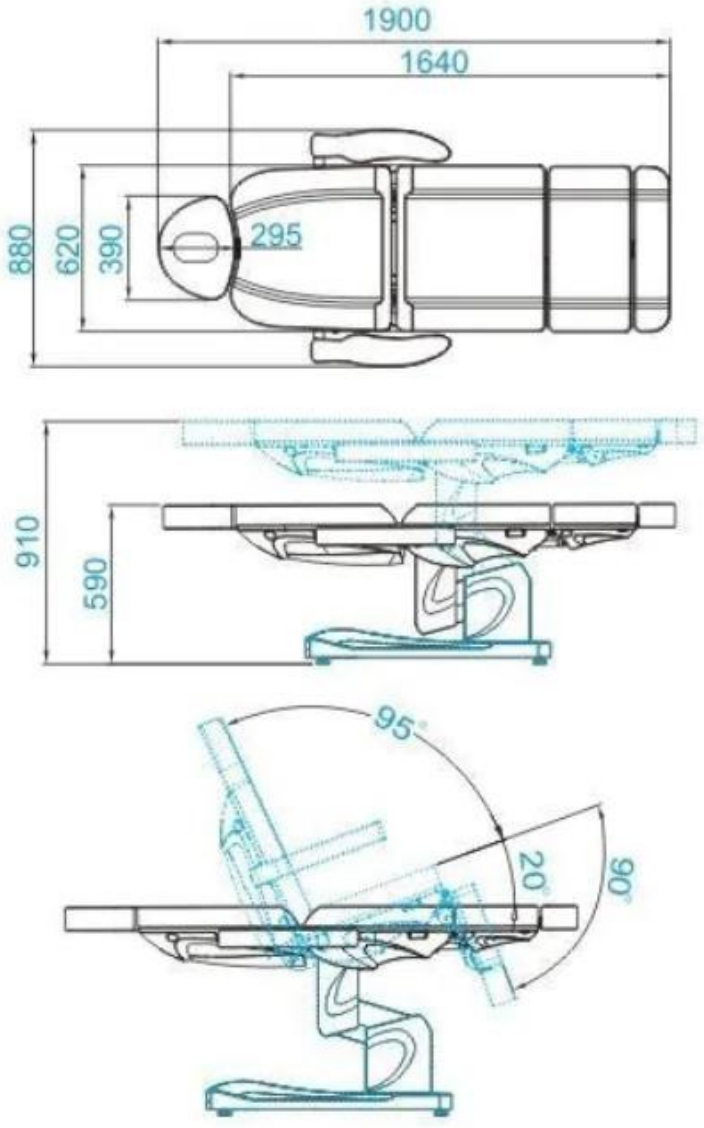

Maximale Stuhlbelastung: 140 kg

Aufbau des Geräts:

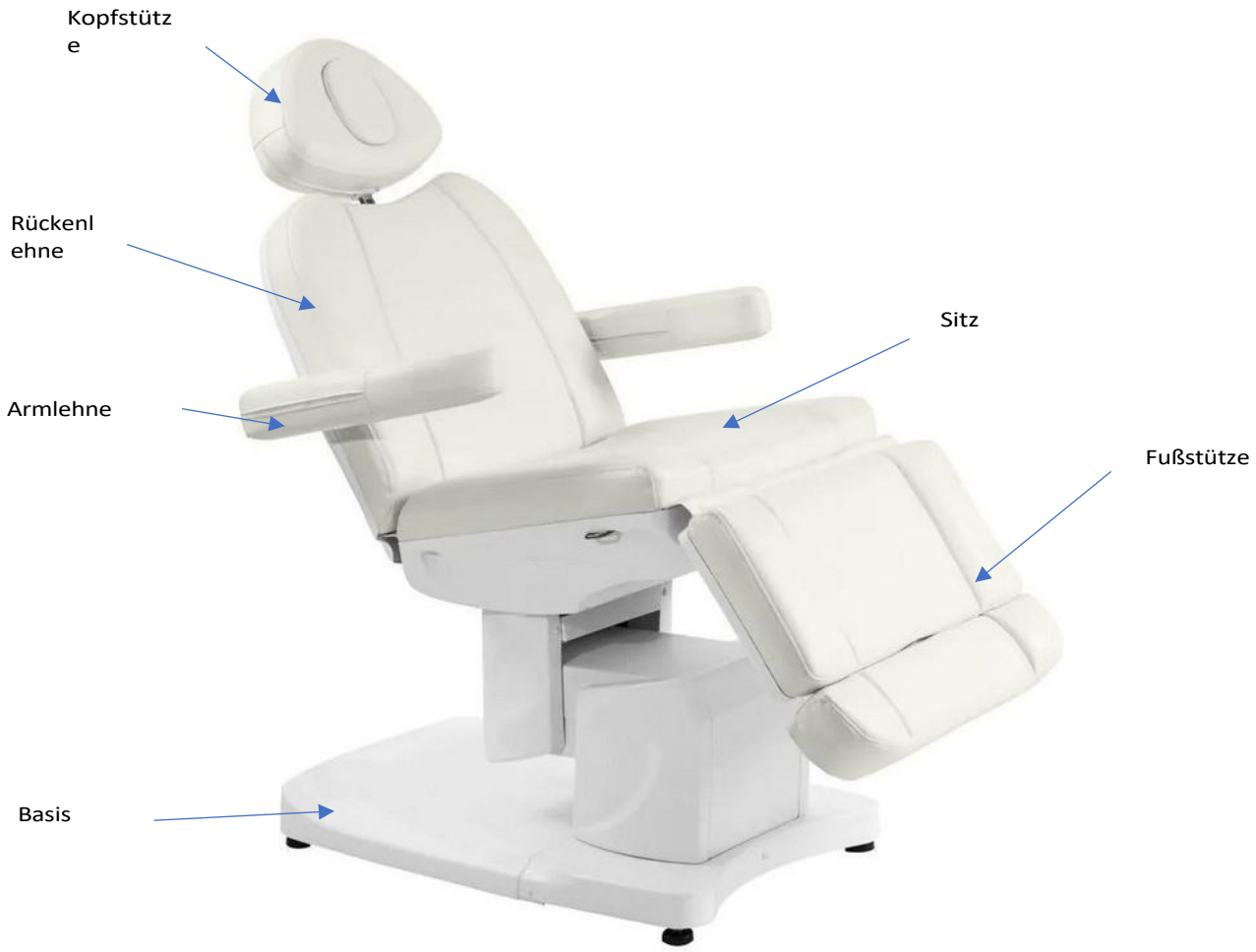

Verwendung des Geräts:

Der Sitz ist mit der Fernbedienung verstellbar, mit der Sie die Höhe des Sitzes, die Neigung der Rückenlehne und der Fußstützen einstellen sowie den Sitz in die Wiegeposition bringen können.


1. Schließen Sie das Netzkabel an das externe Stromnetz 110V~240V an.

Einbau der Kopfstütze


Um die Kopfstütze anzubringen, schieben Sie sie in die entsprechende Aussparung am oberen Ende der Rückenlehne. Wenn Sie die Kopfstütze in der richtigen Höhe angebracht haben, ziehen Sie den Drehknopf fest, damit die Kopfstütze fest sitzt. Um die Kopfstütze abzusenken, schrauben Sie den Knopf leicht auf, senken die Kopfstütze ab und ziehen den Knopf wieder fest.

Einbau der Armlehne

Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte fest angebracht sein. Drehen Sie sie im oder gegen den Uhrzeigersinn, damit sie richtig sitzt.

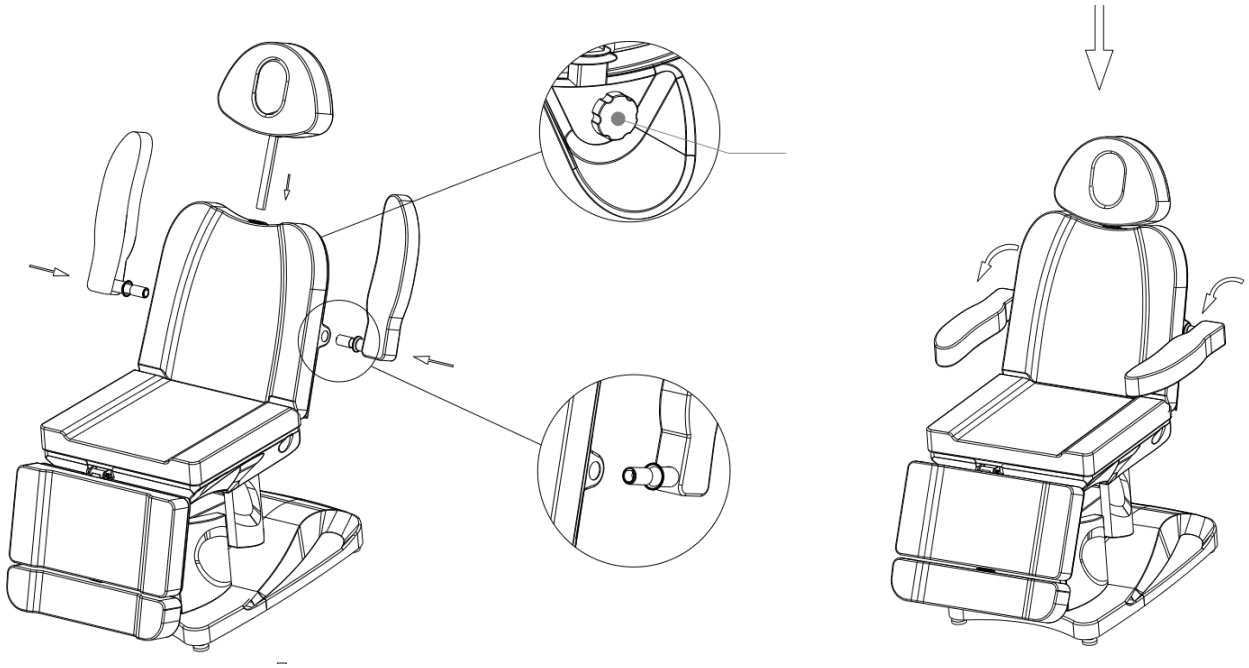

Funktionen der Fernbedienung:

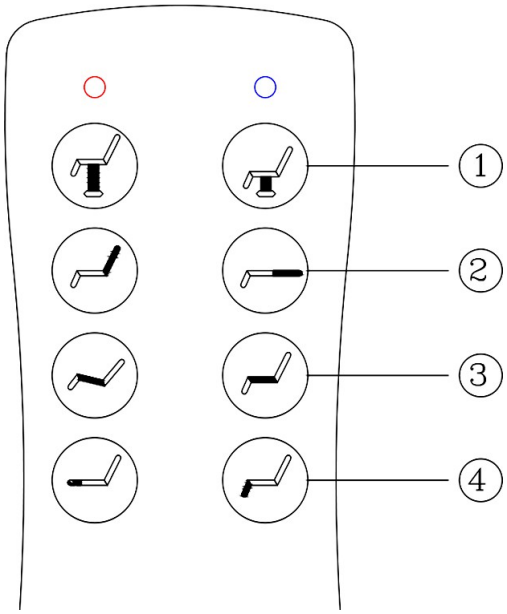

1. Drücken Sie , um den Sitz anzuheben, oder , um den Sitz abzusenken.


2. Drücken Sie oder , um den Winkel der Rückenlehne einzustellen.

3. Drücken Sie oder , um den Sitzwinkel einzustellen.

4. Drücken Sie oder um den Winkel der Fußstütze einzustellen.


Sitzhöhe einstellen:

Drücken Sie auf , um den Sitz anzuheben (er befindet sich in der Liegeposition). Mit der Taste wird der Sitz abgesenkt.

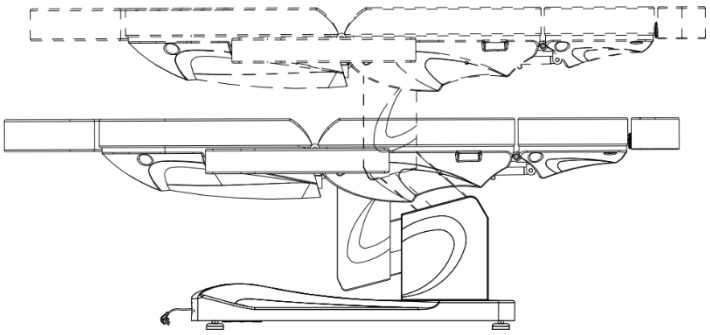


Einstellen der Rückenlehne:

Drücken Sie , um die Rückenlehne in eine Sitzposition zu bringen oder sie anzuheben, oder , um die Rückenlehne abzusenken (z. B. in eine Liegeposition).

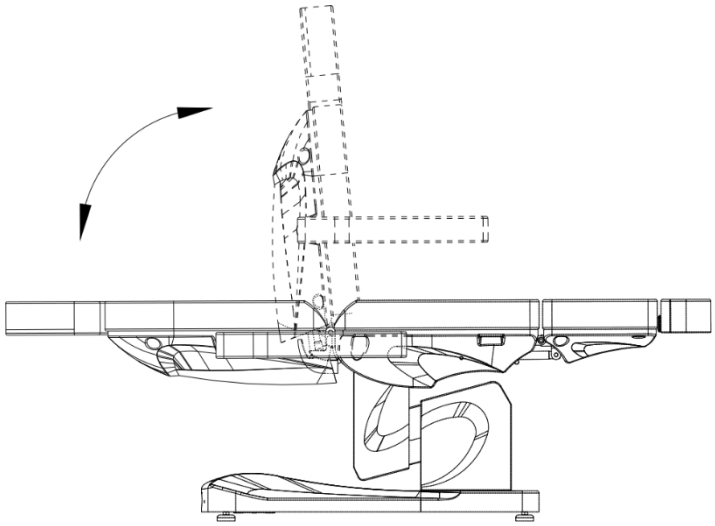


Einstellen des Sitzwinkels:

Drücken Sie auf oder , um den Winkel der Sitzfläche einzustellen.

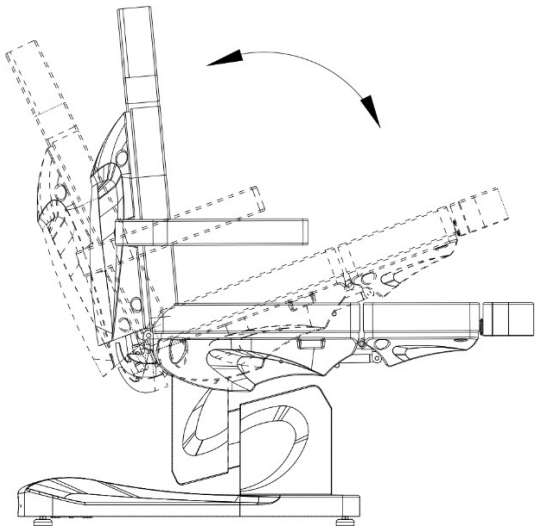


Einstellen der Fußstütze:


Drücken Sie um die Fußstütze in eine horizontale Position zu bringen (oder anzuheben), oder um die Fußstütze abzusenken.

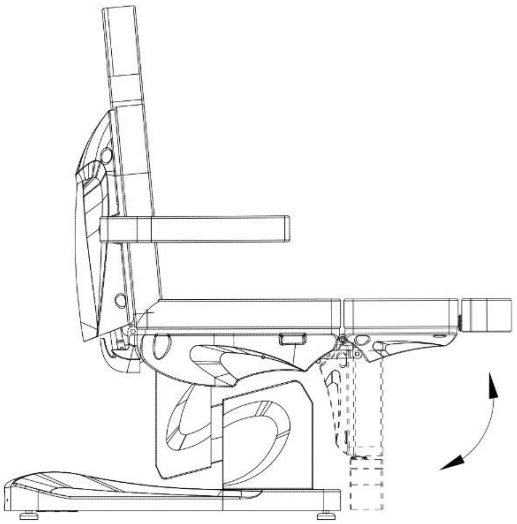

Einstellen der Fußstütze:

Lösen Sie den Knopf an der Unterseite der Fußstütze und bringen Sie sie auf die richtige Länge, dann ziehen Sie den Knopf wieder fest.

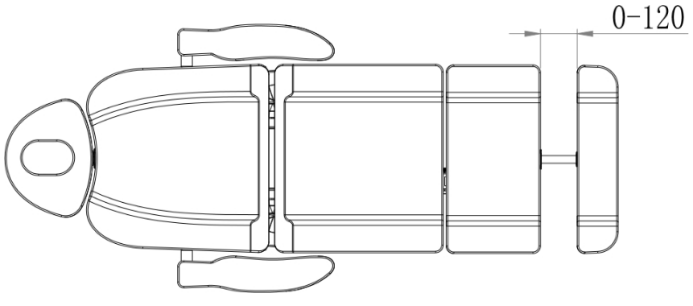

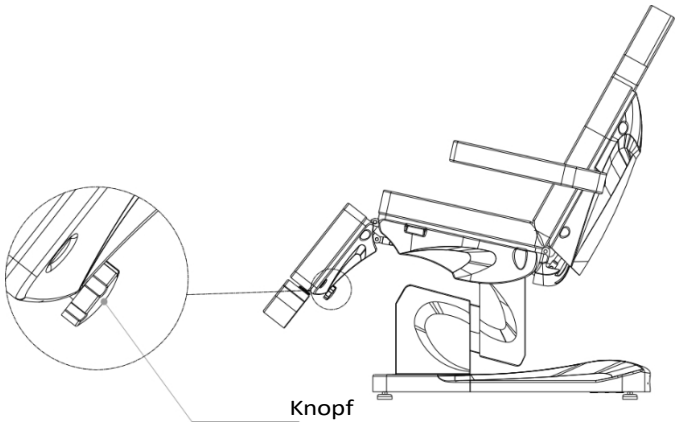

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Am besten funktioniert die Reinigung mit einer milden Waschmittellösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III. Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).

- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren für die Reinigung.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Wartung

Das Gerät muss vor der Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.

1. Reparaturen sollten nur von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.

2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.

3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß

funktionieren. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Fehlersuche

Problem	**Ursache**	**Lösungsansatz**
Die Tasten auf der Fernbedienung reagieren nicht.	1. Schalter wird nicht oder nur unzureichend betätigt. 2. Sitz kann sein. bereits inseinermaximalen Position. 3. Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	1. Versuchen Sie, das Gerät ein- und auszuschalten. 2. Prüfen Sie, ob die anderen Tasten funktionieren. 3. Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist. Wenn nicht, dann schließen Sie es an.
Das Gerät macht beim Heben und Senken seltsame Geräusche.	Lose Schraube.	Prüfen Sie i anziehen. alle Schrauben.
Licht schaltet sich nicht ein, obwohl der Schalter eingeschaltet ist.	Durchgebrannte Sicherung.	Die Sicherung auswechseln.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.

4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisierten Kundendienst:
a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen S t ö r u n g an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und bei folgenden Sammelstellen abgegeben werden

Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Altgeräte und A l t g e r ä t e enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher zur Wiederaufbereitung an

zur Wiederaufbereitung übergeben werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.