ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique électrique Azzurro 708A




Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lire les instructions et effectuer les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
2. S'assurer que le fauteuil est en état de marche.
3. Placer le fauteuil cosmétique dans l'endroit où il sera utilisé.
4. Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.


Remarque ! Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique.

Dimensions de l'appareil :

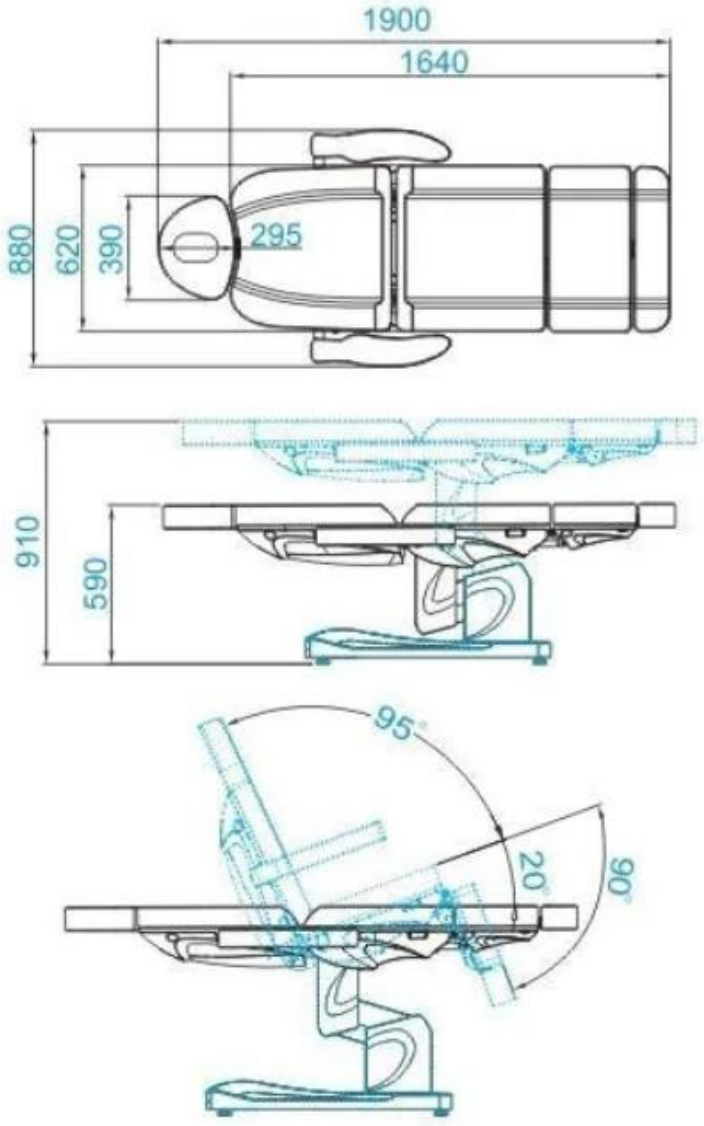

Charge maximale du fauteuil : 140 kg

Construction de l'appareil :

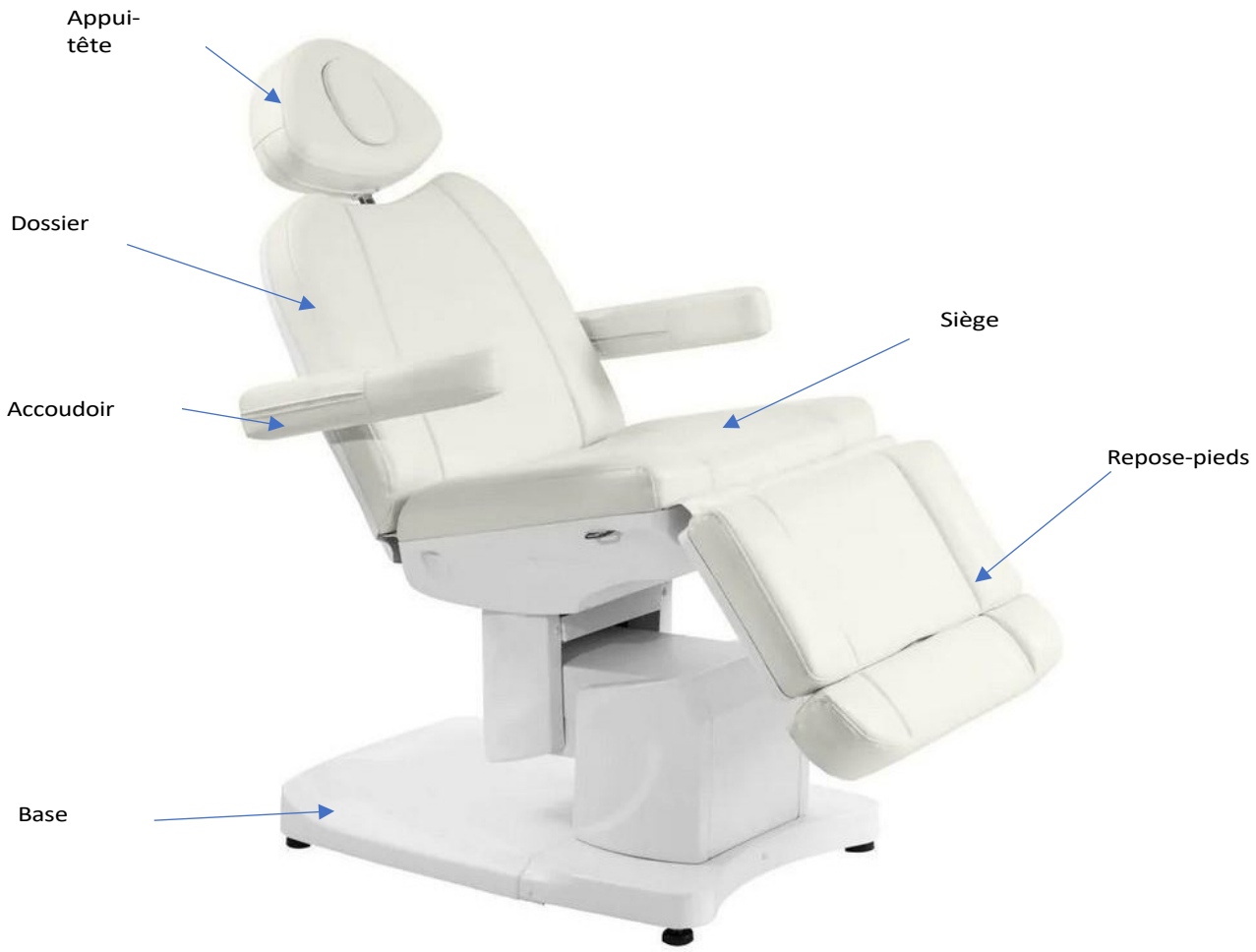

Utilisation de l'appareil :

Le siège est réglable par télécommande, ce qui permet de régler la hauteur du siège, l'inclinaison du dossier et des repose-pieds, ainsi que de mettre le siège en position berceau.


1. Branchez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation externe 110V~240V.

Installation de l'appui-tête


Pour mettre en place l'appui-tête, faites-le glisser dans l'espace approprié en haut du dossier. Lorsque vous avez placé l'appui-tête à la bonne hauteur, serrez la molette de manière à ce que l'appui-tête tienne fermement. Pour abaisser l'appui-tête, dévissez légèrement la molette, abaissez l'appui-tête et resserrez la molette.

Installation de l'accoudoir

Faites glisser l'accoudoir dans le trou situé sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être fermement fixé. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour qu'il se mette en place correctement.

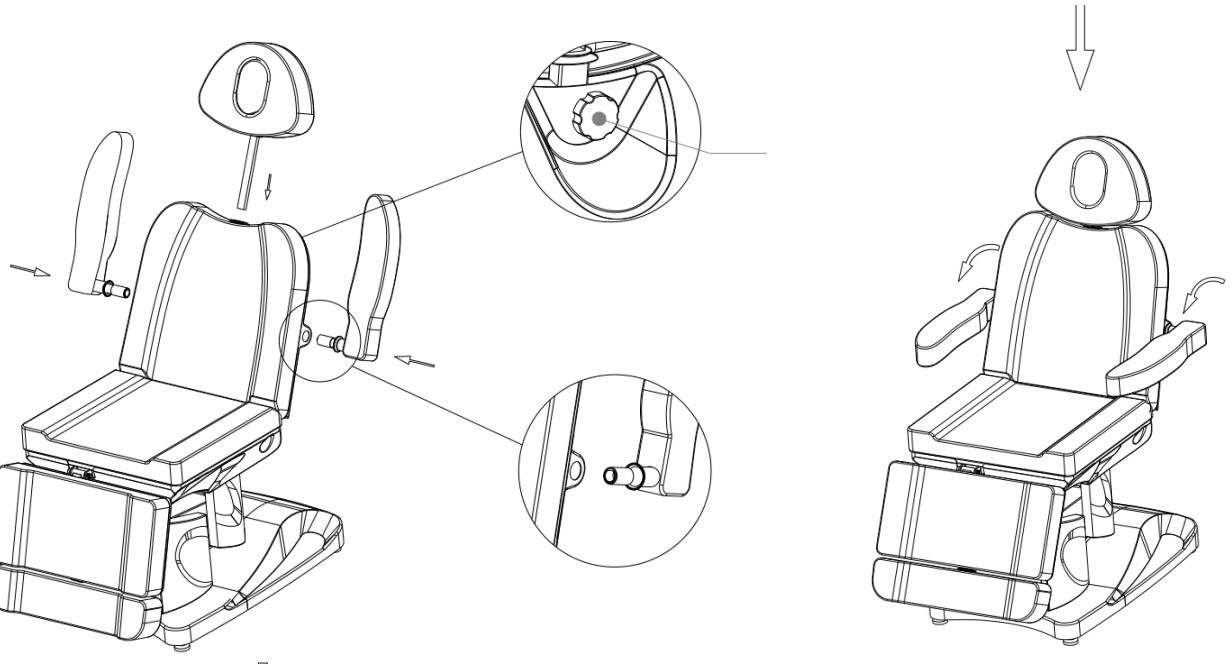

Fonctions de la télécommande :

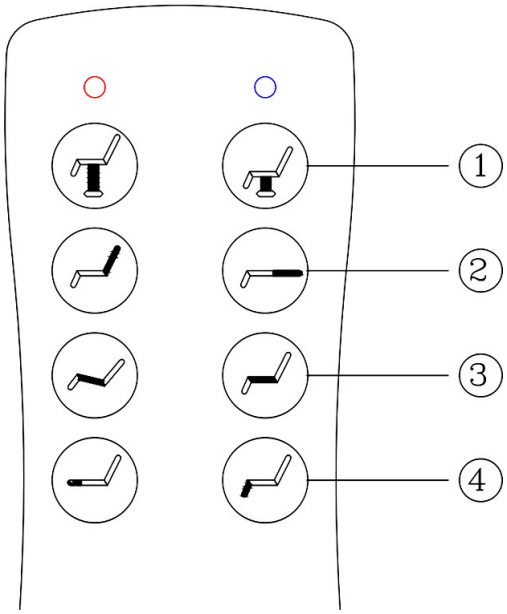

1. Appuyez sur pour relever le siège ou sur pour l'abaisser.


2. Appuyez sur ou pour régler l'angle du dossier.

3. Appuyez sur ou pour régler l'angle de l'assise.

4. Appuyez sur ou pour régler l'angle du repose-pieds.


Réglez la hauteur du siège :

Appuyez sur pour relever le siège (qui est en position inclinée). Le bouton abaisse le siège.

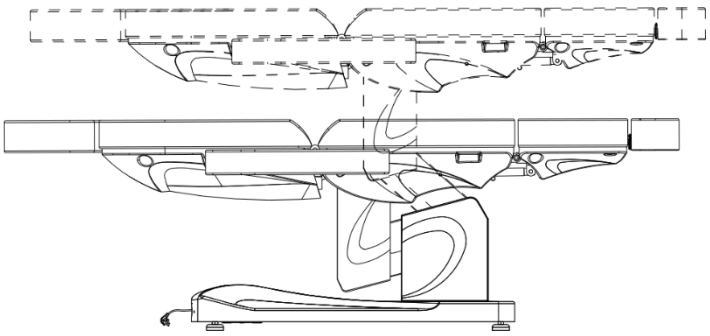


Réglage du dossier :

Appuyez sur pour régler le dossier en position assise ou pour le relever, ou sur pour abaisser le dossier (par exemple en position allongée).

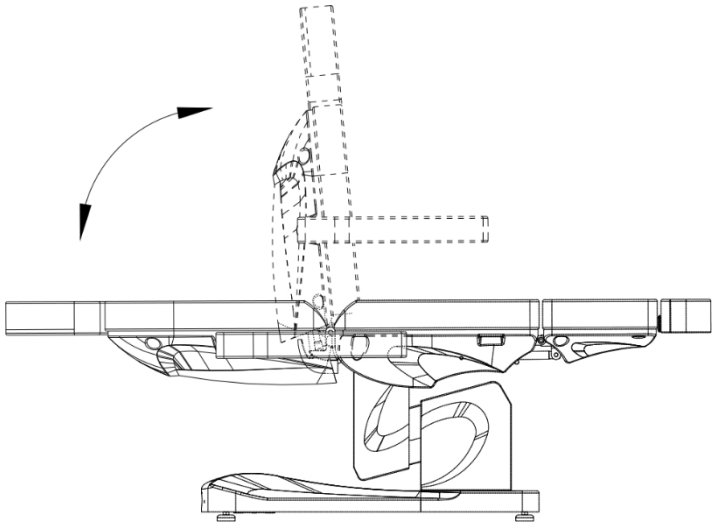


Réglage de l'angle du siège :

Appuyez sur ou pour régler l'angle du siège.

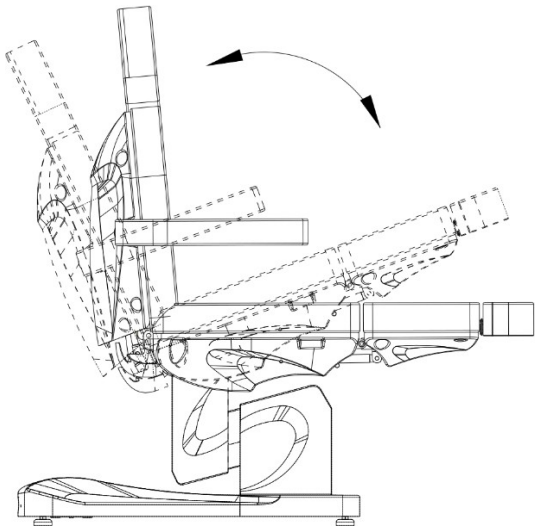


Réglage du repose-pieds :


Appuyez sur pour mettre le repose-pieds à l'horizontale (ou le relever), ou sur pour abaisser le repose-pieds.

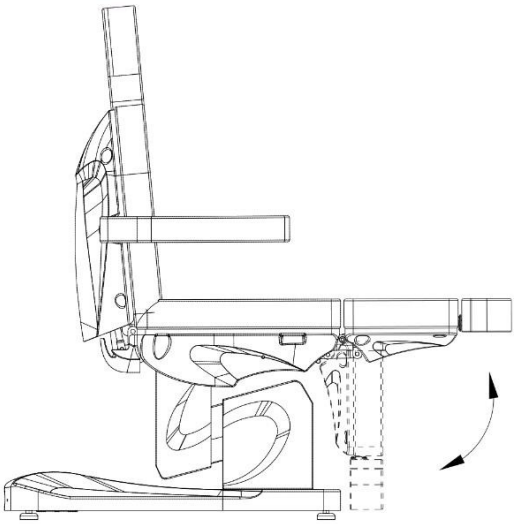

Réglage du repose-pieds :

Desserrez la molette au bas du repose-pieds et allongez-le à la bonne longueur, puis resserrez la molette.

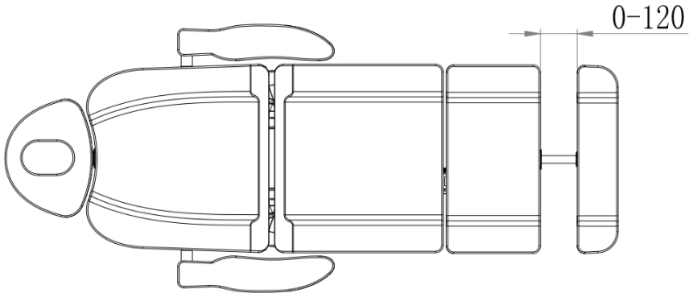

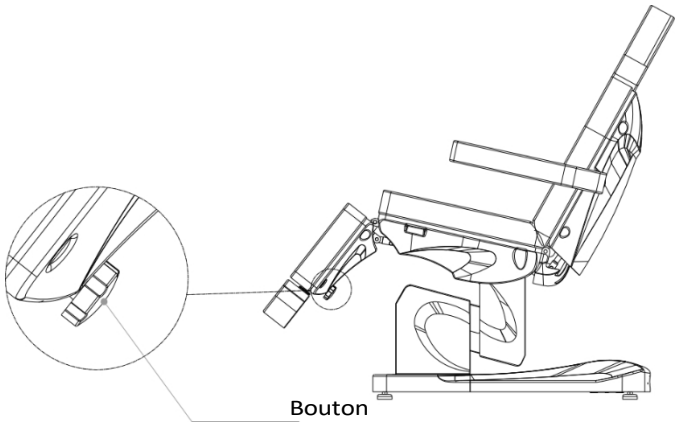

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. Pensez à nettoyer et à désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.

- Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.

- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant tout entretien.

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Ne pas utiliser le fauteuil de beauté électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas

correctement. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés

Résolution des problèmes

Problème	Cause du problème	Méthode de résolution
Les boutons de la télécommande ne répondent pas.	1. L'interrupteur L'interrupteur de la commande électrique s'actionne ou ne s'actionne pas. 2. Le siège peut être déjà dans sa position maximale. 3. L'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique.	1. Essayez de l'allumer et de l'éteindre. 2. Vérifiez que les autres boutons fonctionnent. 3. Vérifiez que l'appareil est branché. Si ce n'est pas le cas, branchez-le.
L'appareil émet des bruits étranges lors de la montée et de la descente.	Vis desserrée.	Vérifier i serrer toutes les vis.
La lumière ne s'allume pas bien que l'interrupteur soit activé.	Fusible brûlé.	Remplacer le fusible.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en esthétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres,
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres d y s f o n c t i o n n e m e n t s , contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.

3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte suivants
centres de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc leur être remis pour retraitement.

à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.