ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Fotel kosmetyczny elektryczny Azzurro 708A




Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Przed użyciem fotela kosmetycznego zapoznaj się z instrukcją i wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
2. Upewnij się, że fotel jest sprawny.
3. Umieść fotel kosmetyczne w miejscu, gdzie będzie używany.
4. Podłącz wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka.


Wskazówka! Dzieci i niedoświadczone osoby nie mogą korzystać z tego urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane i nie mogą bawić się w pobliżu fotela kosmetycznego.

Wymiary urządzenia:

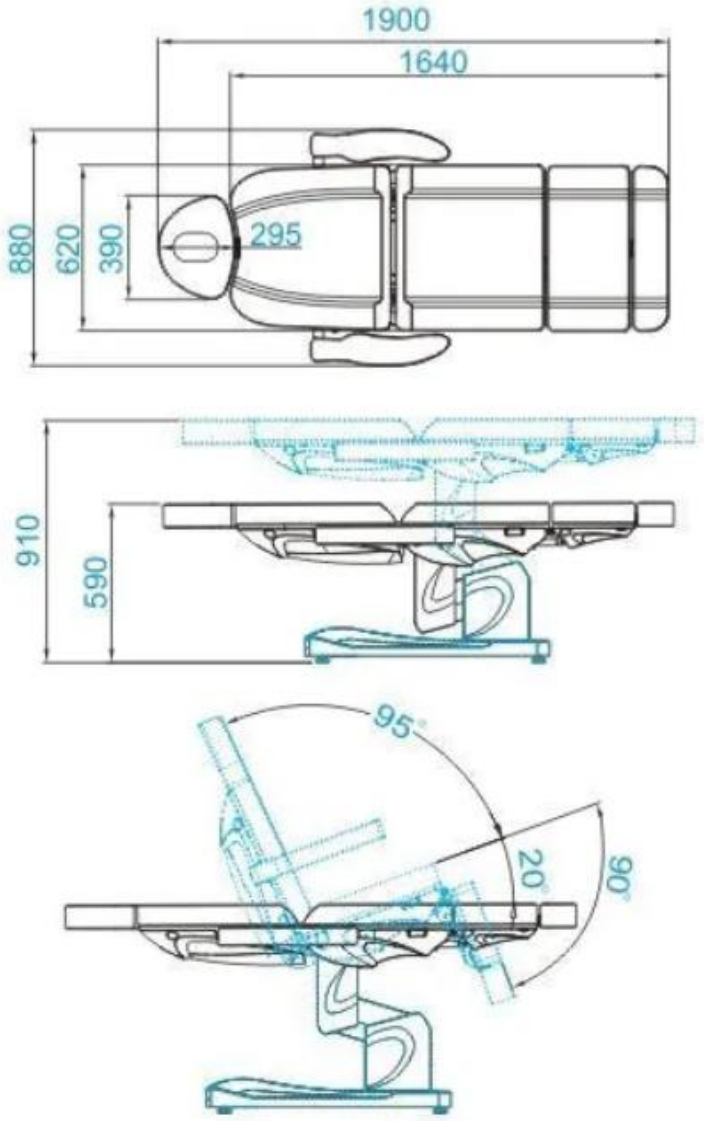

Maksymalne obciążenie fotela: 140kg

Budowa urządzenia:

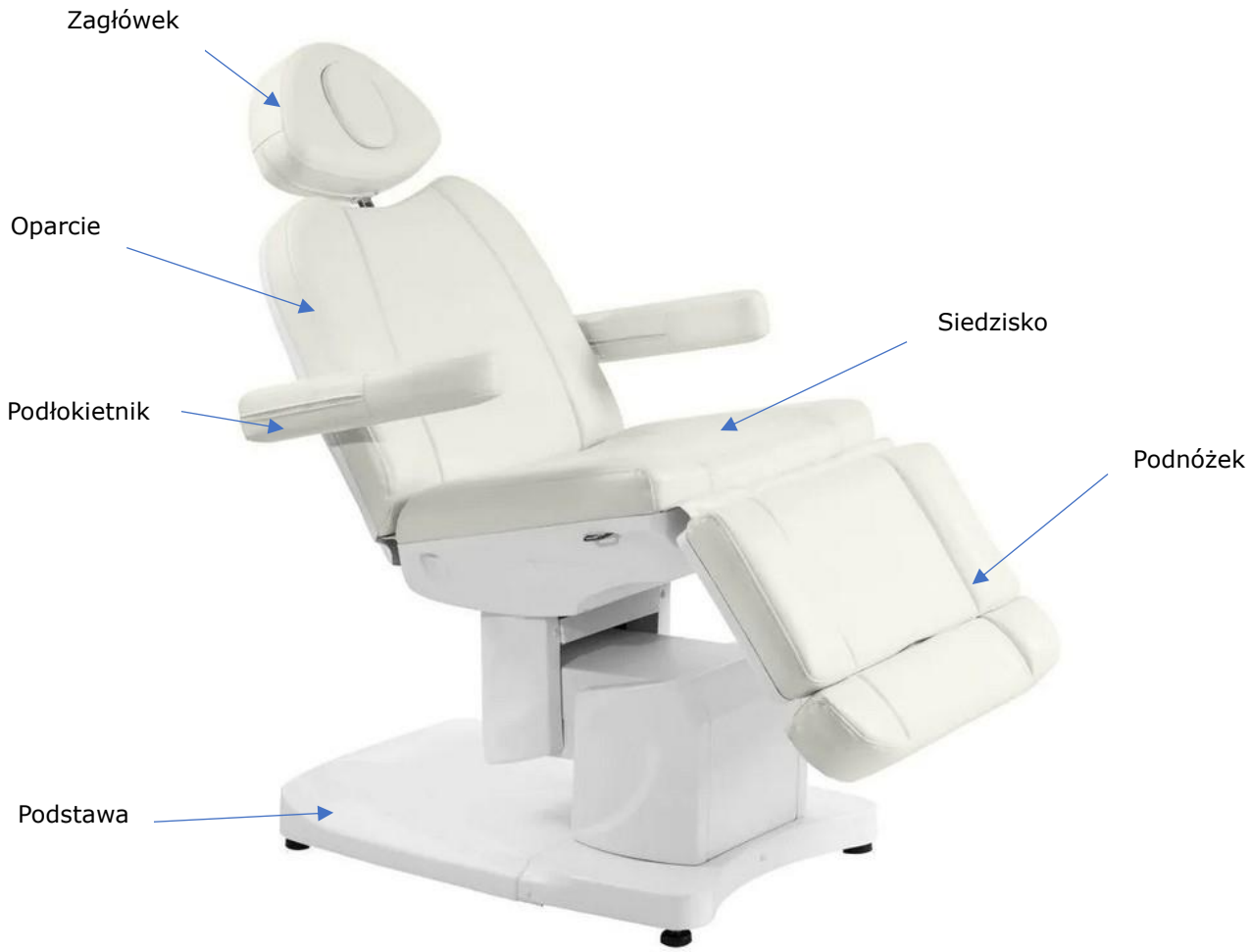

Użytkowanie urządzenia:

Fotel regulowany jest za pomocą pilota, którym można dostosować wysokość fotela, nachylenie oparcia i podnóżków, a także ustawić siedzisko w pozycji kołyski.


1. Podłącz przewód zasilający do zewnętrznego zasilacza 110V~240V.

Instalacja zagłówka


Aby zamontować zagłówek wsuń go w odpowiednią lukę na górze oparcia. Kiedy umieścisz zagłówek na odpowiedniej wysokości dokręć pokrętło, aby zagłówek stabilnie się trzymał. Aby obniżyć zagłówek, lekko odkręć pokrętło, obniż zagłówek i dokręć pokrętło.

Instalacja podłokietników

Wsuń podłokietnik w otwór znajdujący się z boku oparcia. Podłokietnik powinien być stabilnie przymocowany. Przekręć go w prawo lub lewo, aby odpowiednio wszedł na miejsce.

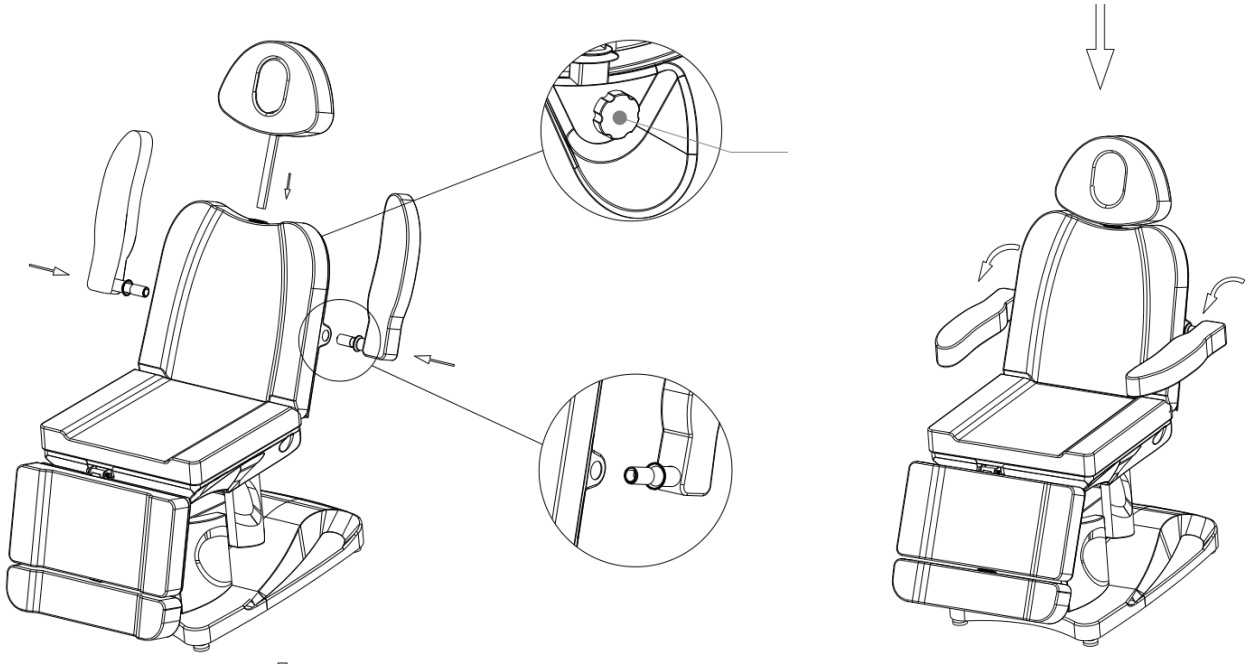

Funkcje pilota:

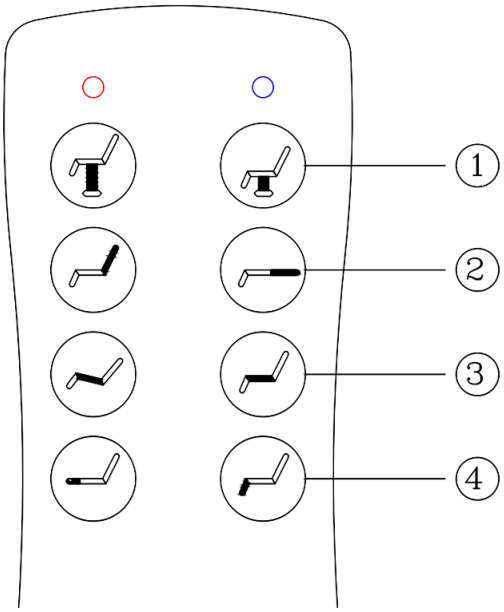

1. Naciśnij  **aby podnieść fotel lub**  **aby opuścić fotel.**


2. Naciśnij  **lub**  **aby dostosować kąt oparcia.**

3. Naciśnij  **lub**  **aby dostosować kąt siedziska.**

4. Naciśnij  **lub**  **aby dostosować kąt podnóżka.**


Dostosowanie wysokości fotela:

Wciśnij aby podnieść fotel (znajdujący się w pozycji leżanki). Przycisk opuści fotel.

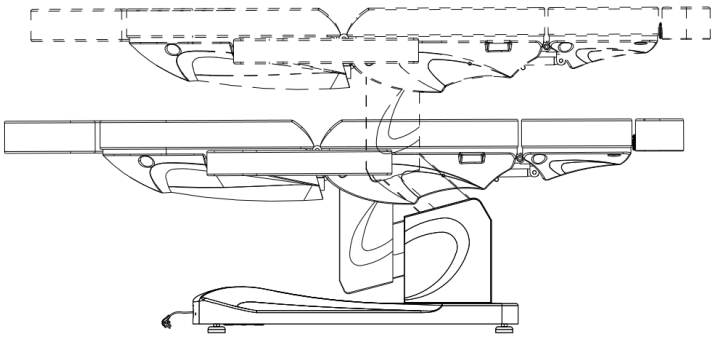


Dostosowanie oparcia:

Wciśnij aby ustawić oparcie w pozycji siedzącej lub podnieść je, albo aby opuścić oparcie (np. do pozycji leżącej).

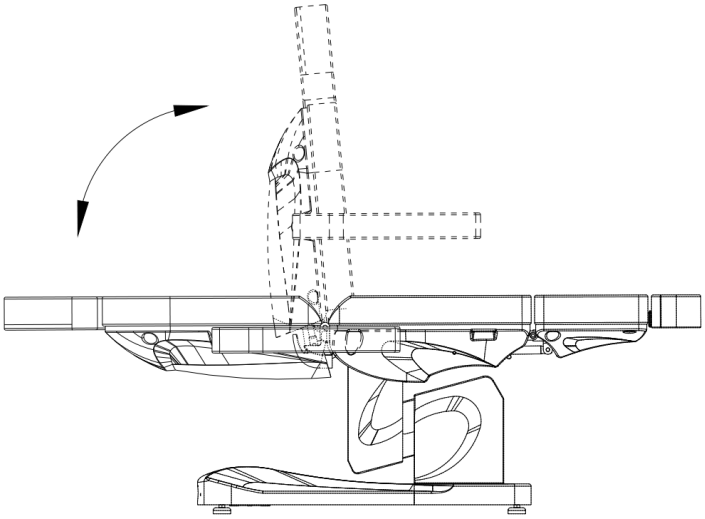


Dostosowanie kąta siedziska:

Naciśnij lub aby dostosować kąt pod jakim ustawione jest siedzisko.

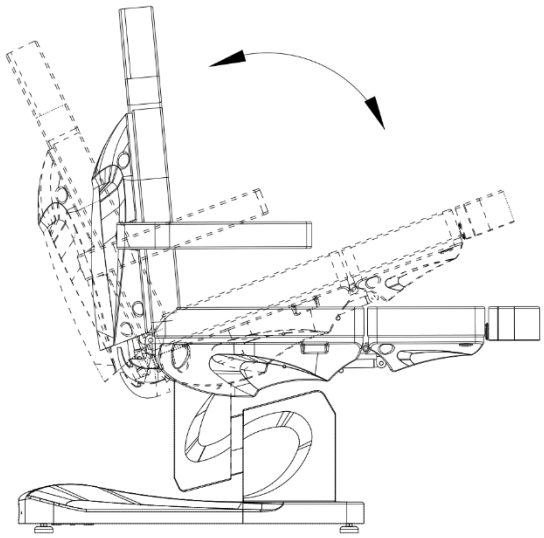


Dostosowanie podnóżka:


Naciśnij aby ustawić podnóżek w pozycji poziomej (lub go podnieść), albo aby opuścić podnóżek.

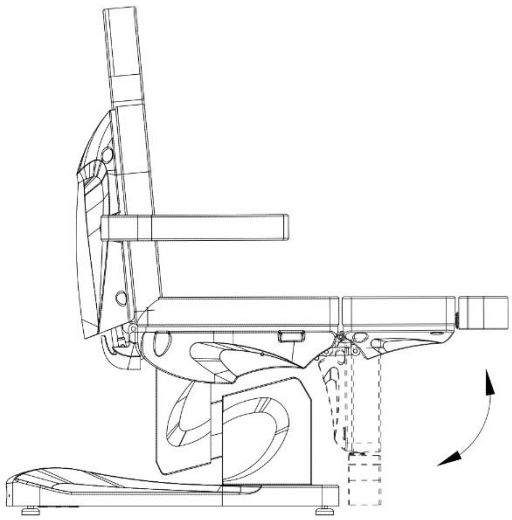

Regulacja podnóżka:

Poluzuj pokrętło znajdujące się w dolnej części podnóżka i wysuń go na odpowiednią długość, a następnie dokręć pokrętło.

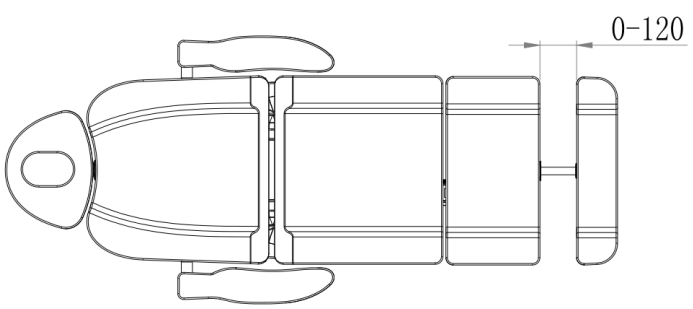

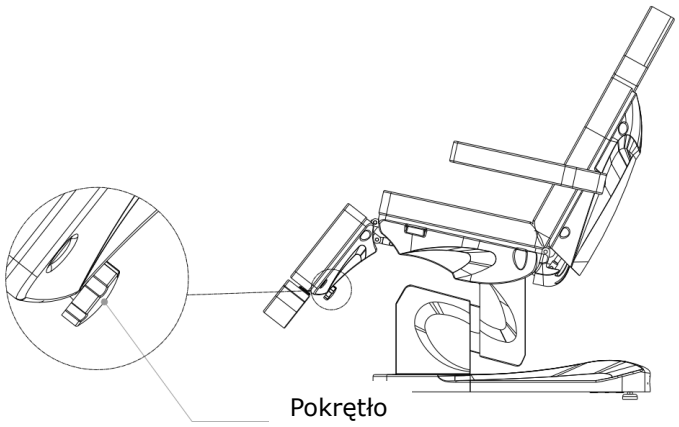

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia:
- Odłącz urządzenie do prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Aby utrzymać powierzchnię fotela w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić. Pamiętaj, aby czyścić i dezynfekować fotel po każdym użyciu. Zaleca się wykonać dokładną dezynfekcję raz w miesiącu.

I Powierzchnie metalowe i plastikowe
- Aby wyczyścić metalowe i plastikowe powierzchnie oraz elementy sterujące przetrzyj je wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.

II Powierzchnie ze stali nierdzewnej
- Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Amoniak i większość rozpuszczalników mogą być stosowane do usuwania trudnych plam. Unikaj roztworów na bazie chloru.

III Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe
- Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne) do czyszczenia.
- Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza, nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia cieczą.
- Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

IV Powierzchnia fotela
- Wytrzyj powierzchnię fotela równomiernie specjalnym środkiem do czyszczenia skóry, a następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką.

Konserwacja
Przed konserwacją urządzenia należy odłączyć je od prądu.
1. Naprawy powinny być wykonywane przez doświadczony i upoważniony przez producenta personel. Naprawa przez nieautoryzowany personel może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
3. Nie używaj elektrycznego fotela kosmetycznego ani akcesoriów, jeśli nie działają prawidłowo.

Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane

Rozwiazywanie problemów

Problem	**Przyczyna**	**Metoda rozwiązania**
Przyciski na pilocie nie reagują.	1.Przełącznik sterowania zasilania uruchamia się lub nie. 2.Fotel może być już w maksymalnej pozycji. 3.Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	1.Spróbuj włączyć i wyłączyć. 2.Sprawdź czy inne przyciski działają. 3. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu. Jeśli nie, to podłącz je.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki podczas podnoszenia i opuszczania.	Poluzowana śruba.	Sprawdź i dokręć wszystkie śruby.
Światełko nie włącza się, mimo że przełącznik jest włączony.	Spalony bezpiecznik.	Wymień bezpiecznik.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać

je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.