ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Azzurro 708A



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

III


CE

Înainte de a utiliza fotoliul cosmetic, citiți instrucțiunile și efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în zona în care va fi utilizat.
4. Conectați ștecherul la o priză adecvată.


Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiunile aparatului:

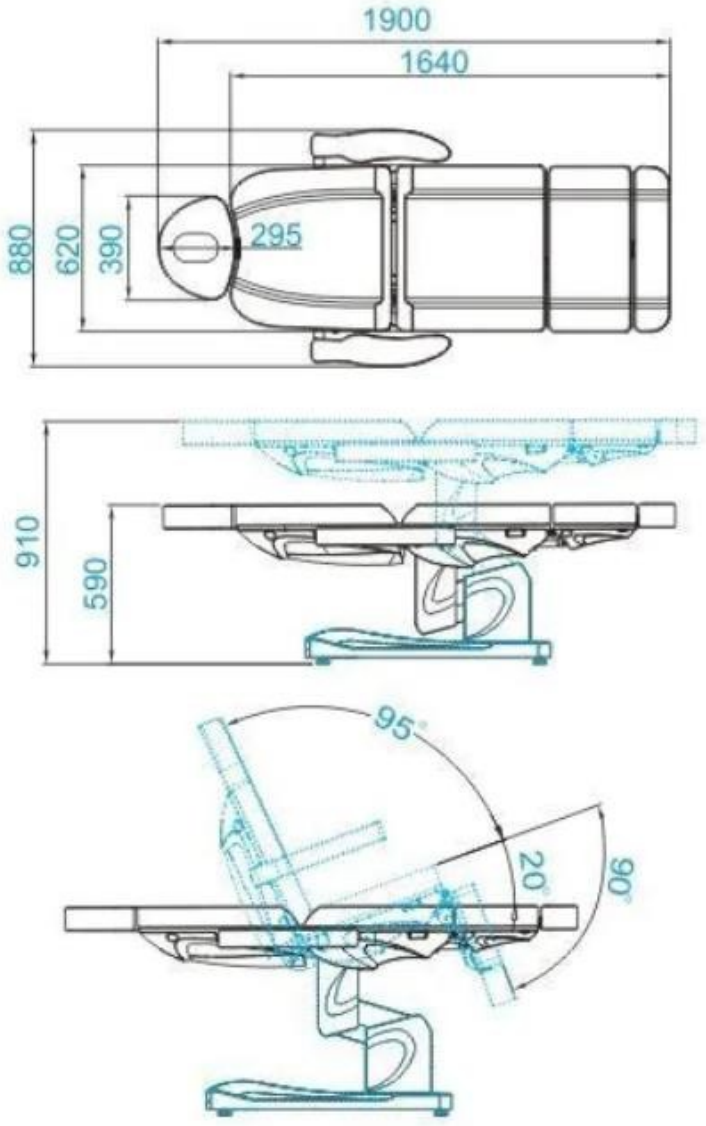

Sarcina maximă a scaunului: 140 kg

Construcția aparatului:

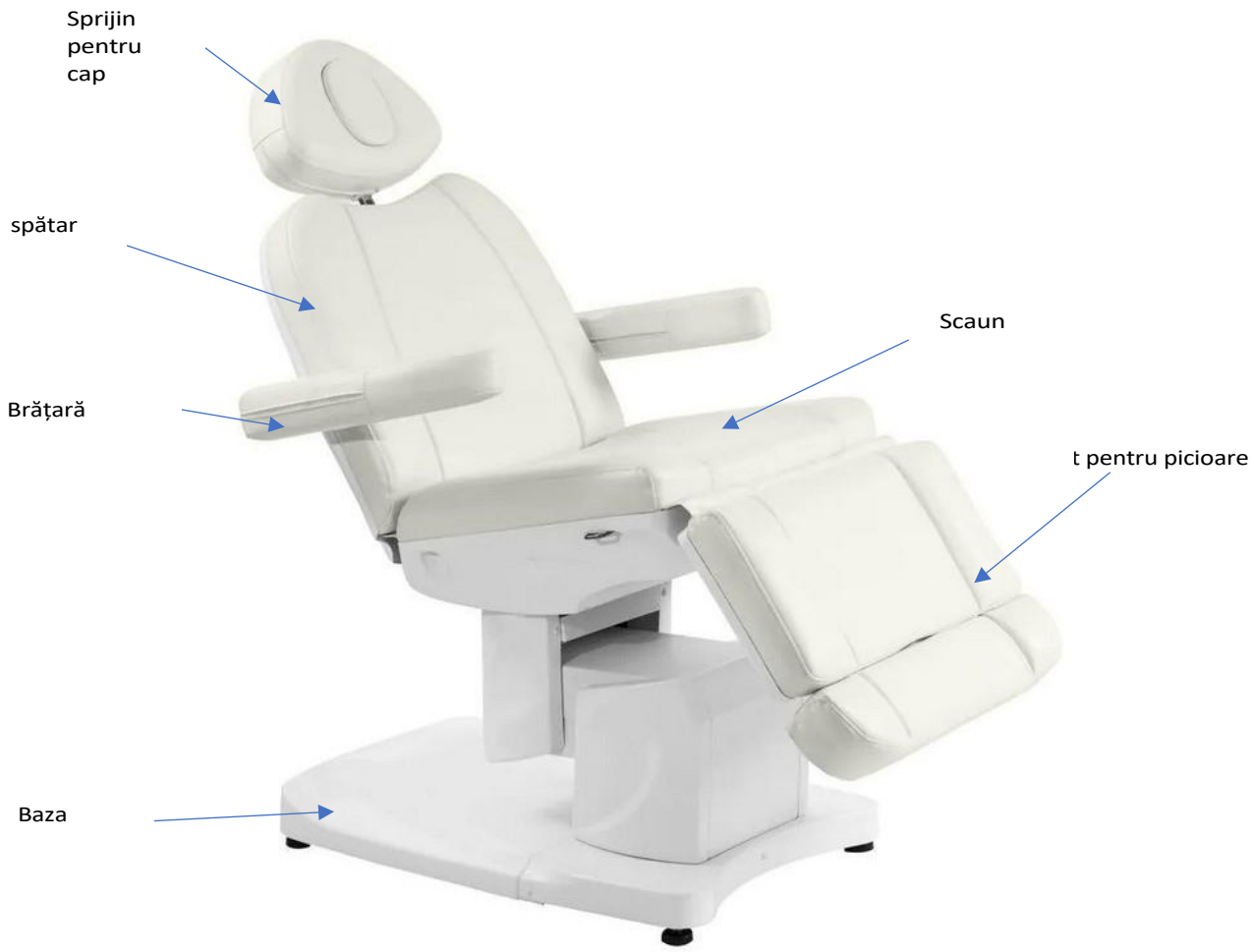

Utilizarea dispozitivului:

Scaunul este reglabil cu ajutorul telecomenzii, cu ajutorul căreia puteți regla înălțimea scaunului, înclinarea spătarului și a suporturilor pentru picioare, precum și setarea scaunului în poziția leagăn.


1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare externă 110V~240V.

Instalarea tetierei


Pentru a monta tetiera, glisați-o în spațiul corespunzător din partea superioară a spătarului. După ce ați plasat tetiera la înălțimea corectă, strângeți butonul astfel încât tetiera să se mențină ferm. Pentru a coborî tetiera, deșurubați ușor butonul, coborâți tetiera și strângeți butonul.

Instalarea cotierei

Glisați cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic sau antiorar astfel încât să intre corect în poziție.

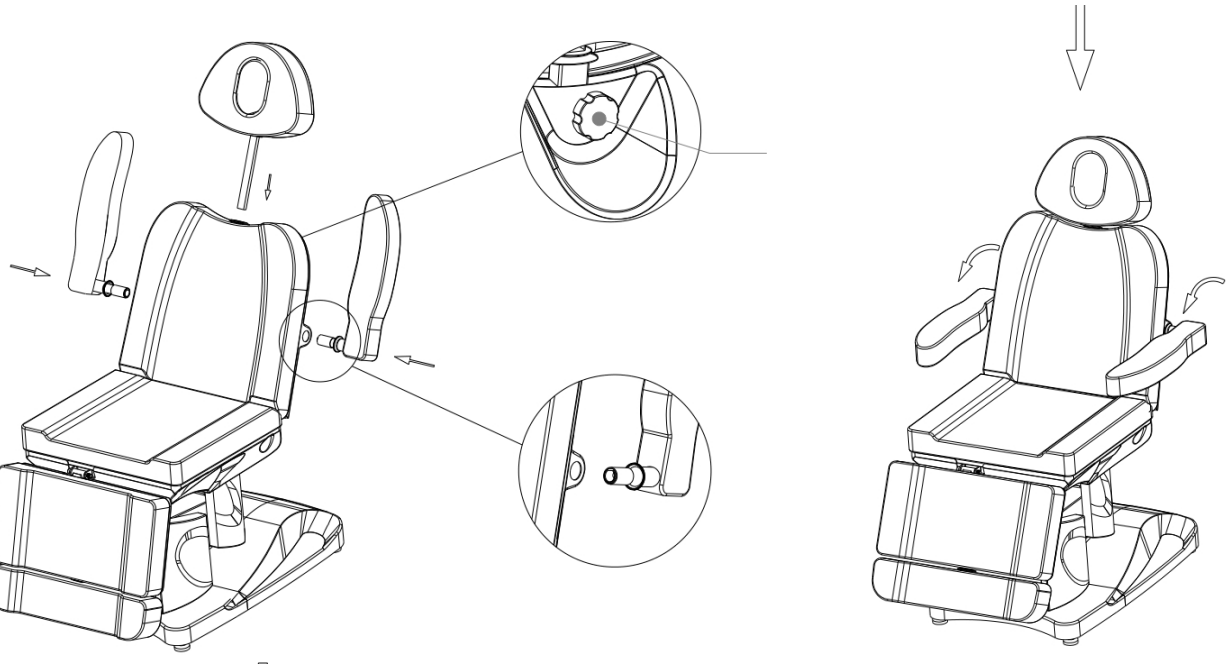

Funcțiile telecomenzii:

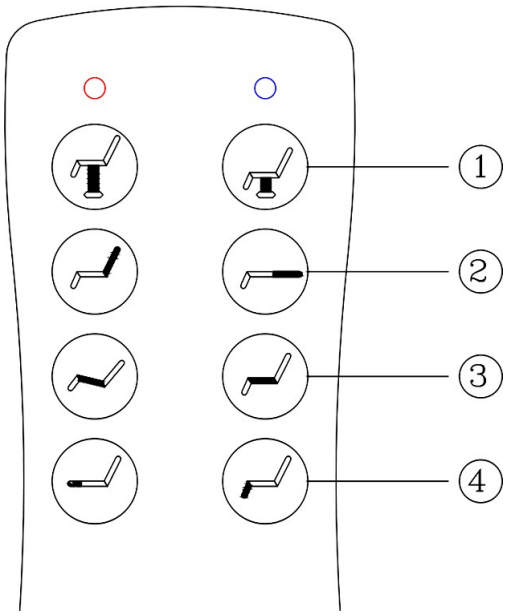

1. Apăsați  **pentru a ridica scaunul sau**  **pentru a coborî scaunul.**


2. Apăsați  **sau**  **pentru a regla unghiul spătarului.**

3. Apăsați  **sau**  **pentru a regla unghiul scaunului.**

4. Apăsați  **sau**  **pentru a regla unghiul suportului pentru picioare.**


Reglați înălțimea scaunului:

Apăsați pentru a ridica scaunul (care este în poziția de înclinare). Butonul va coborî scaunul.

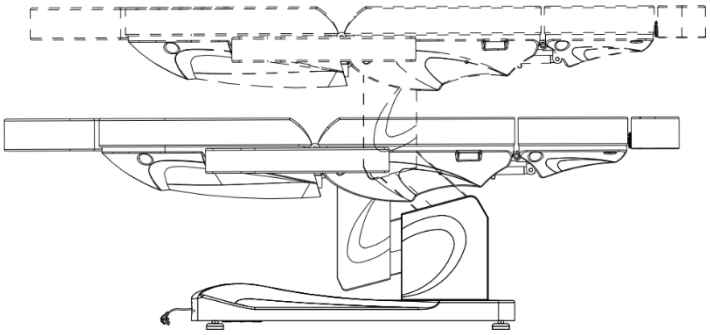


Reglarea spătarului:

Apăsați pentru a regla spătarul în poziția așezat sau pentru a-l ridica, sau pentru a coborî spătarul (de exemplu, în poziția culcat).

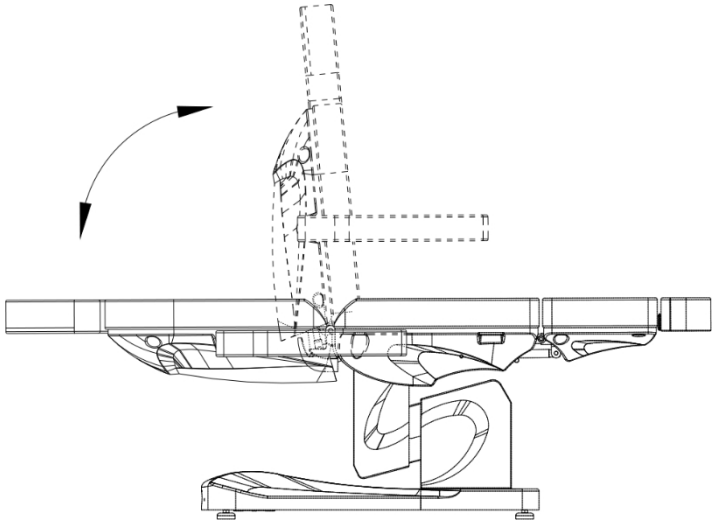


Reglarea unghiului scaunului:

Apăsați sau pentru a regla unghiul la care este setat scaunul.

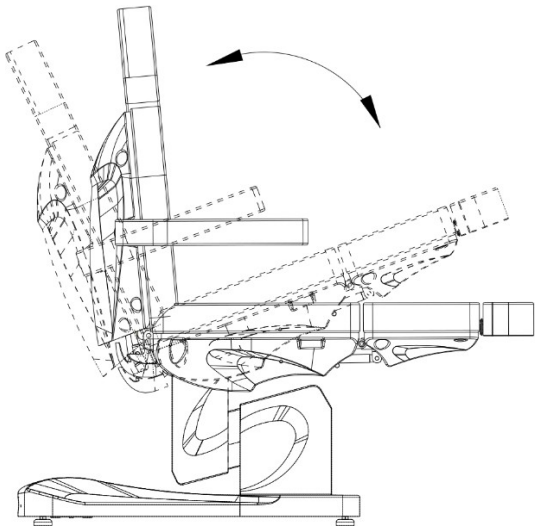


Reglarea suportului pentru picioare:


Apăsați pentru a pune rezemătoarea pentru picioare în poziție orizontală (sau pentru a o ridica), sau pentru a coborî suportul pentru picioare.

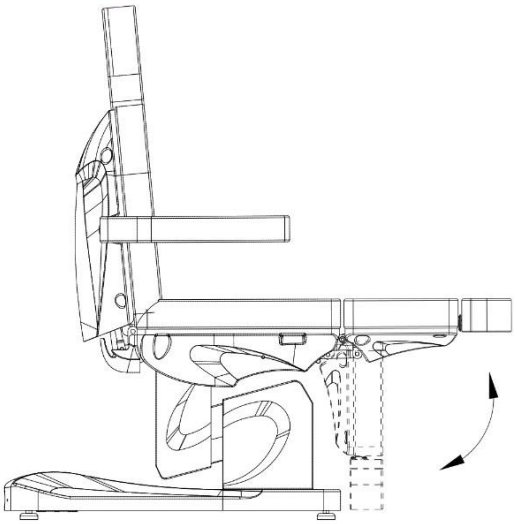

Reglarea suportului pentru picioare:

Slăbiți butonul din partea de jos a suportului pentru picioare și extindeți-l la lungimea corectă, apoi strângeți butonul.

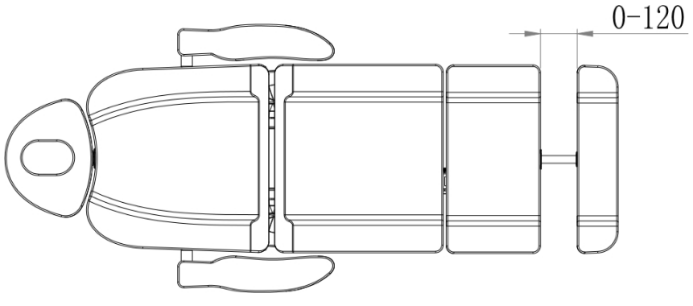

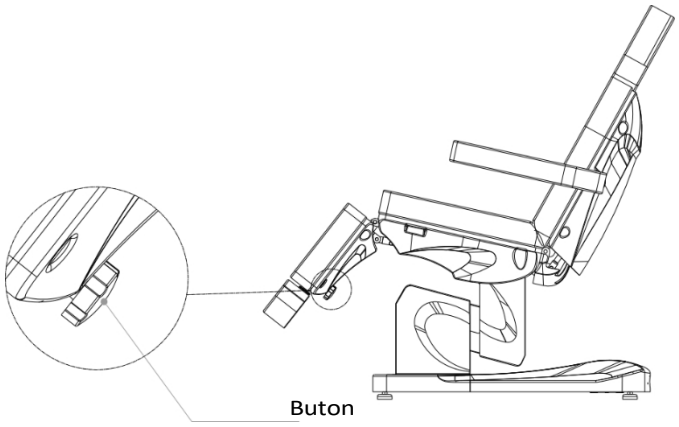

Curățarea și dezinfectarea aparatului:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va funcționa cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.

- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.

- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează

corespunzător. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate

Rezolvarea problemelor

Problema	**Cauza**	**Metoda de rezolvare**
Butoanele de pe telecomandă nu răspund.	1. Comutatorul de control al puterii acționează sau nu acționează. 2. Scaunul poate fi deja în poziția samaximă. 3. Aparatul nu este conectat la sursa de alimentare.	1. Încercați să-l porniți și să-l opriți. 2. Verificați dacă celelalte butoane funcționează. 3. Verificați dacă dispozitivul este conectat la priză. Dacă nu este, atunci conectați-l.
Aparatul face zgomote ciudate la ridicare și coborâre.	Șurub slăbit.	Verificați i strângeți toate șuruburile.
Lumina nu se aprinde chiar dacă întrerupătorul este pornit.	Siguranță arsă.	Înlocuiți siguranța.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor d e f e c ț i u n i , contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la următoarele puncte de colectare
puncte de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate la

acestora pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.